
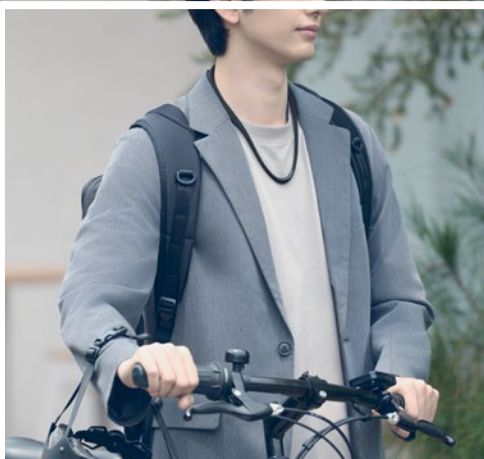


Panasonic


高周波が、
血流からコリ治療。

高周波治療器 コリコラン

CoriCoran

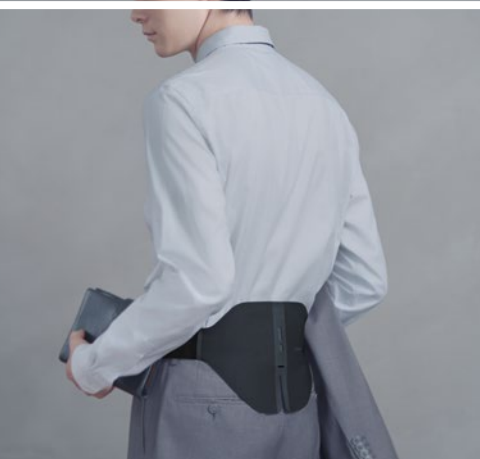

高周波が血流にアプローチして 肩や腰のコリを改善。

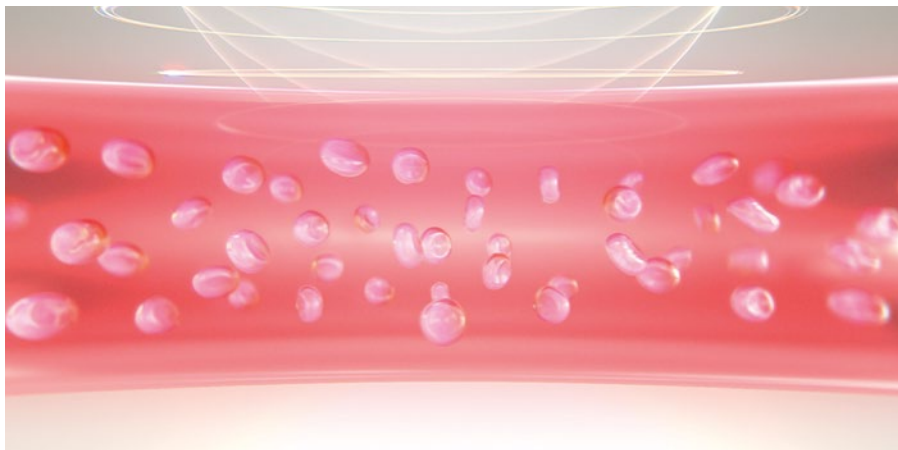

高周波治療器とは

高周波には、身体組織まで深く浸透し、
コリの患部に到達し血管を拡張させて血行を促進、
肩や腰のコリを改善する働きがあります。


刺激がないので、仕事や日常生活の邪魔をせず、
長時間にわたってコリ※²治療し続けられます。

朝からつけておけば、いつのまにかコリ※²を改善できるのが
高周波治療器コリコランシリーズの特徴です。


業界唯一^{※1}の家庭用高周波治療器



WEBで詳しく

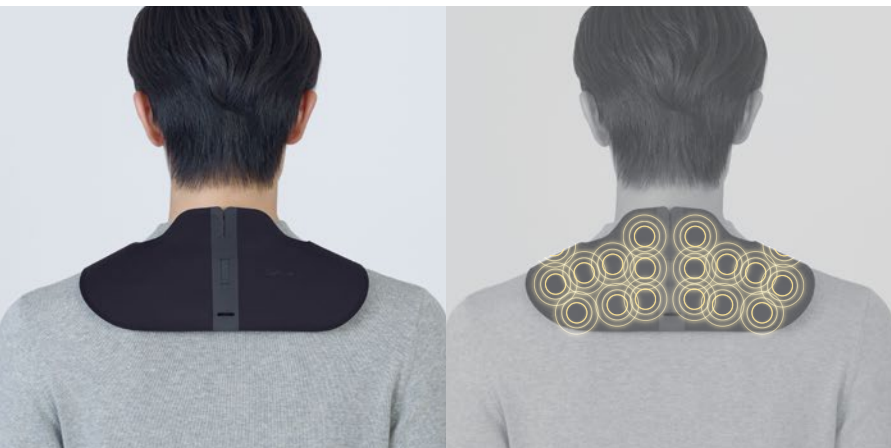


約9 MHz^{※3}の高周波

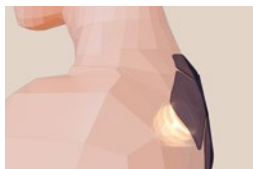

患部に繰り返し高周波パルスを送り、コリ^{※2}の患部に深く浸透。

血管を拡張し血行促進

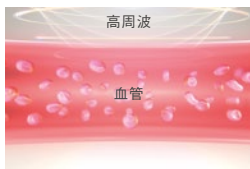

気になる患部の血管を広げて血行を促進。

無刺激でコリ^{※2}改善



仕事や家事中でも支障なく長時間治療可能。

血管に作用してコリ^{※2}を治療

コリの改善には血流改善が重要です。一般的なコリ治療の多くは筋肉をほぐして血行促進をしますが、高周波治療器は血管にダイレクトに作用します。血流が滞っている部分に高周波パルスを送り、血管を広げて血行を促進します。



※2:肩または腰の部位。 ※3:1秒間に約900万回。

◎画像、イラストは全てイメージです。

選べるラインアップ



WEBで比較

コリコランワイド3D



アタッチメント

本体

EW-RA560

-K(ブラック) -H(グレージュ)

▶P5



アタッチメント

本体

EW-RA561

-K(ブラック)

▶P7

広範囲を3D(立体)治療

高周波デバイス数	20個	
対応部位	肩専用	腰専用
本体の大きさ	<p>約 14.7 cm</p> <p>約 29.1 cm</p> <p>本体は肩専用</p>	<p>約 16.05 cm</p> <p>約 22.8 cm</p> <p>本体は腰専用</p>
治療できる範囲		
高周波照射向き (コリコランワイド3Dと コリコランワイドの違い)	<p>背中側だけでなく 肩上、肩前から 立体的に照射</p> <p>高周波デバイス</p>	<p>腰のカーブに沿って立体的に照射</p>

使用目的又は効果：肩又は腰の凝りの改善に用いること。一般家庭で使用する事。

医療機器認証

EW-RA560は肩専用、EW-RA561は腰専用です。

●ご使用前のご注意：ご購入・ご使用の前に、「安全に関するご注意」を必ずご確認ください。

コリコランワイド		コリコランループ	コリコラン	
 <p>アタッチメント 本体</p> <p>EW-RA550 -K(ブラック) -H(グレーージュ) ▶P9</p>	 <p>アタッチメント 本体</p> <p>EW-RA550W -K(ブラック) ▶P9</p>	 <p>EW-RA520 -K(ブラック) -H(グレーージュ) ▶P11</p>	 <p>EW-CRA518 -K(ブラック) ▶P13</p>	
じっくり平面治療		目立たず 手軽に治療	狙った場所を ピンポイント治療	
12個		4個		
肩用	本体共通	腰用	肩専用	肩および腰用
 <p>約 11.7 cm 約 23.6 cm</p>	 <p>約 11.7 cm 約 23.6 cm</p>	 <p>長さ 約 55.5 cm</p>	 <p>肩・腰のお好みの場所に 直径 約 3.3 cm×4個</p>	
本体共通、アタッチメントの追加購入で肩と腰に併用可能				
 <p>そうぼうきん 僧帽筋 けんこうきん 肩甲挙筋 りょうけいきん 菱形筋</p>	 <p>たれつきん 多裂筋 せきちゅうきん 脊柱起立筋 ようほうきん 腰方形筋</p>	 <p>むう-けいばんじょうきん 頭・頸板状筋 けんこうきん 肩甲挙筋 そうぼうきん 僧帽筋</p>		
 <p>背中側から 平面的に 照射</p>	 <p>背中側から平面的に照射</p>	 <p>—</p>		

高周波が立体的に届いて、 広範囲をコリ治療。

CoriCoran

高周波治療器

コリコランワイド3D 肩専用

EW-RA560

医療機器認証



WEBで詳しく



●この商品は肩専用です。



20個の高周波デバイスが、コリコラン史上最大※1の照射範囲を実現。

肩甲骨まわりや肩上からも高周波が浸透することで、コリのポイントを立体的にとらえて、血行を促進します。

無刺激だから長時間つけて、治療し続けることが可能です。






コリコラン史上最多※1

高周波デバイス20個搭載 広い範囲を3D(立体)治療

背中側だけでなく肩・
肩前から高周波パルス
を立体的に照射。より効
率的に肩コリを治療します。

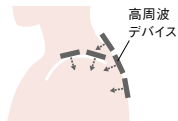

アタッチメントに入れて 肩にはおるだけの簡単装着

簡単だから無理なく毎日使える、継続できる。
服の上からでも高周波が届きます。

おもりでバランスが取れる

マグネットで固定も可能



その他の特長



2時間充電で約
12時間連続動作
が可能

USBプラグ
Type-C充電式



高周波が出てい
るかチェッカーで
確認できる

高周波治療器 コリコランワイド3D 肩専用

EW-RA560 医療機器認証

-K(ブラック) -H(グレージュ)
オープン価格※

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

医療機器認証番号 307AKBZX00038000

●電気的定格

本体動作時：定格電圧 DC3.8 V
本体充電時：

電源AC 100 V 50-60 Hz、定格消費電力 0.4 W

- 寸法 本体：約 幅291 × 奥行147 × 高さ8.8 mm
アタッチメント：約 幅327.5 × 奥行342 × 厚み7.2 mm
高周波チェッカー：約 幅40 × 奥行48.5 × 高さ3 mm

- 質量 本体：約45 g
アタッチメント：約94 g
高周波チェッカー：約6 g

- 使用電池(本体)：
ラミネート型 リチウムイオン(Li-ion)蓄電池 2個



本体



防水非対応



肩アタッチメント
-K(ブラック)



洗える



肩アタッチメント
-H(グレージュ)



洗える

別売品

- 肩アタッチメント -K(ブラック) EW-9R56S-K オープン価格※
- 肩アタッチメント -H(グレージュ) EW-9R56S-H オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

◎画像、イラストは全てイメージです。

立体的に届く高周波が、 腰の深部のコリまで治療。

CoriCoran

高周波治療器

コリコランワイド3D 腰専用

EW-RA561

医療機器認証



WEBで詳しく




●この商品は腰専用です。

コリのポイントに最適な配置を追求した20個の高周波デバイスを搭載。

高周波が脊柱起立筋・多裂筋・腰方形筋まで立体的にアプローチして、血行を促進。

腰の深部のコリまで治療します。


刺激や痛みがないから長時間つけて、治療し続けることが可能です。

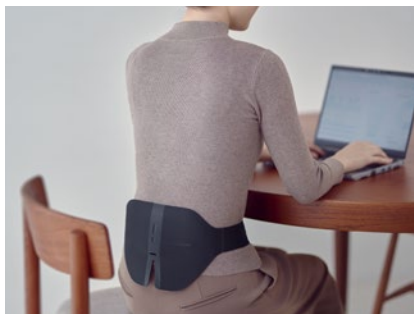


コリコラン史上最多^{※1} 高周波デバイス20個搭載 独自の3D(立体)形状がコリのポイントをしっかりカバー



腰のカーブに沿って高周波デバイスを立体的に配置。高周波が多裂筋や脊柱起立筋および深層の腰方形筋までアプローチ。

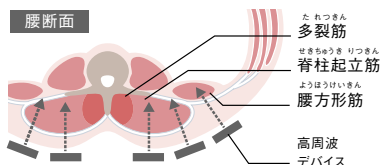

アタッチメントに入れて 腰に巻くだけの簡単装着

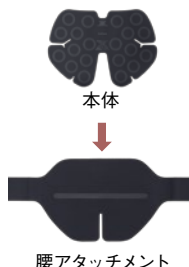

その他の特長



2時間充電で約
12時間連続動作
が可能

USBプラグ
Type-C充電式



高周波が出てい
るかチェッカーで
確認できる

高周波治療器 コリコランワイド3D 腰専用

EW-RA561 医療機器認証

-K(ブラック)
オープン価格[※]

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



本体



防水非対応



腰アタッチメント



洗える

医療機器認証番号 307AKBZX00038000

- 電気の定格 本体動作時：定格電圧 DC3.8 V
本体充電時：
電源AC 100 V 50-60 Hz、定格消費電力 0.4 W
- 寸法 本体：約 幅228 × 奥行160.5 × 高さ8.8 mm
アタッチメント：約 幅1150 × 奥行177 × 厚み5 mm
(延長ベルト含む)
- 高周波チェッカー：約 幅40 × 奥行48.5 × 高さ3 mm
- 質量 本体：約48 g
アタッチメント：約62 g(延長ベルト含む)
- 高周波チェッカー：約6 g
- 対応サイズ：腰回り 約58 ~ 100 cm(延長ベルト使用)
- 使用電池(本体)：
ラミネート型 リチウムイオン(Li-ion) 蓄電池 2個

別売品 ●腰アタッチメント EW-9R56W-K オープン価格[※]

その日のコリに合わせて、 肩にも腰にも使える。

CoriCoran

高周波治療器 コリコランワイド

(肩用セット) EW-RA550

(腰用セット) EW-RA550W

医療機器認証




WEBで詳しく




肩・腰のコリに、12個の 高周波デバイスを最適配置

高周波デバイスがコリのポイントにフィットして、コリの原因である血行を促進。別売品のアタッチメントを使えば、一つの本体で肩も腰も治療できます。

肩用セット

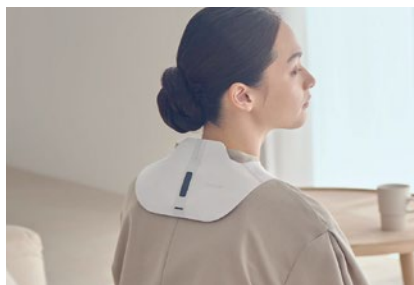

腰用セット

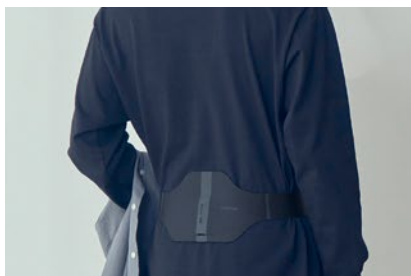



2時間充電で約
12時間連続動作
が可能

USBプラグ
Type-C充電式



高周波が出てい
るかチェッカーで
確認できる



本体



防水非対応



肩アタッチメント

-K(ブラック)



洗える



肩アタッチメント

-H(グレージュ)



洗える

高周波治療器
コリコランワイド(肩用セット)

EW-RA550

医療機器認証

-K(ブラック) -H(グレージュ)

オープン価格※

○この商品はお取り扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



GOOD DESIGN
AWARD 2023



本体



防水非対応



腰アタッチメント



洗える

高周波治療器
コリコランワイド(腰用セット)

EW-RA550W

医療機器認証

-K(ブラック)

オープン価格※

○この商品はお取り扱い先を限定しております。

○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

共通仕様

医療機器認証番号 305AKBZX00029000

●寸法 本体：約幅236×奥行117×高さ8mm

肩アタッチメント：約幅376×奥行320×厚み7.2mm

腰アタッチメント：約幅1150×奥行135×厚み5mm(延長ベルト含む)

高周波チェッカー：約幅42×奥行42×高さ15mm

●質量 本体：約39g

肩アタッチメント：約82g

腰アタッチメント：約51g(延長ベルト含む)

高周波チェッカー：約19g

●電気的定格

本体動作時：定格電圧 DC3.8V

本体充電時：

電源AC 100V 50-60Hz、定格消費電力 0.2W

高周波チェッカー動作時：

電源AC 100V 50-60Hz、定格消費電力 0.5W

●使用電池(本体)：

ラミネート型 リチウムイオン(Li-ion)蓄電池

別売品

●肩アタッチメント -K(ブラック) EW-9R55S-K オープン価格※

●腰アタッチメント EW-9R55W-K オープン価格※

●肩アタッチメント -H(グレージュ) EW-9R55S-H オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

◎画像、イラストは全てイメージです。

首にかけるだけで、 高周波がコリを治療する。

CoriCoran

高周波治療器

コリコランループ

EW-RA520

医療機器認証



WEBで詳しく



高周波治療器コリコランに、
ループタイプが誕生。
首を支える筋肉*のまわりに、
4個の高周波デバイスを配置。
コリの原因である血行を促進し、
コリを改善します。
刺激がないから、場所を選ばずに
長時間治療し続けることが可能です。


*頭・頸板状筋、肩甲挙筋、僧帽筋





薄型形状の 高周波デバイスが コリのポイントにフィット


肩まわりのコリやすい筋肉の血行を促進し、
肩コリを治療します。

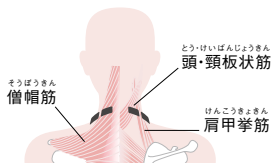

ネックレスのように 首にかけるだけで 目立たず肩コリ治療

男性も女性も使えます。

対応サイズ: 首まわり55 cmまで。

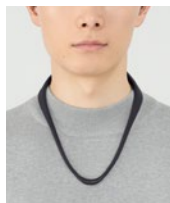

服の下なら
外出先でも
目立たない。

その他の特長



7時間充電で約17時間
(3時間充電で約8時間)
連続動作が可能。

USBプラグ
Type-C充電式



シリコンゴム素材だから、汗や汚れをさっと
拭き取れる。

高周波治療器 コリコランループ

EW-RA520 医療機器認証

-K(ブラック) -H(グレイージュ)

オープン価格*

- この商品はお取扱い先を限定しております。
- 一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。



-K(ブラック)



-H(グレイージュ)



防水非対応

医療機器認証番号 306AKBZX00052000

●電気的定格

本体動作時: 定格電圧 DC 2.3 V

本体充電時: 電源AC 100 V 50-60 Hz、
定格消費電力 0.5 W

●寸法: 本体 約 長さ555 × 厚み8 × 高さ21 mm

●質量: 本体 約49 g

●使用電池(本体): リチウム金属蓄電池

●USB専用ケーブルの長さ: 約65 cm

●体に直接接触する部位の組成:

シリコン・PET・ステンレス

日常的なコリ^{※1}に、 痛みのある部位をポイント治療。

CoriCoran


高周波治療器 コリコラン

EW-CRA518

医療機器認証



WEBで詳しく

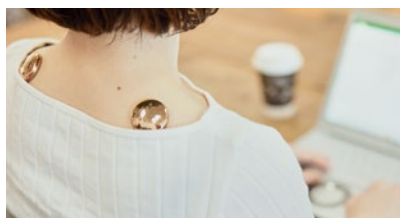

使いやすいコードレス



肌になじみやすいブロンズゴールド

3時間充電で
約**24**時間
使用可能^{※2}

長時間使える

小型コードレス
わずか
約**6**g

違和感なく使える



チェッカーの反応で
高周波を確認



ワンタッチで
取り出しやすい

※1:肩または腰の部位。※2:常温20℃の場合。(約9時間充電した場合、約48時間使用可能。)
※3:IPX7:JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」常温の水道水にて、水深1 mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しています。



高周波治療器 コリコラン

EW-CRA518 (4個入り)

医療機器認証

-K(ブラック)
オープン価格※

医療機器認証番号 229AHBZX00023Z00

●コリコラン本体

電圧：DC2.3 V 水の浸入に対する保護 IPX7※3

寸法：約 高さ8.5 mm × 外径φ33 mm

質量：約6 g(1個につき)

●充電器

電圧：ACアダプター AC100 V 50-60 Hz

乾電池(別売) DC6.0 V(単4形アルカリ乾電池4本)

寸法：約幅150×奥行105×高さ38.5 mm

質量：約170 g(乾電池含まず)

●付属品

装着テープ 肌にやさしい 32枚／粘着力强め 32枚

装着リング 4個

腰アタッチメント、ACアダプター(RC6-18)

より快適に使い続けていただくために



●コリコラン本体 EW-9R50R
(コリコラン本体1個、装着リング1個)
オープン価格※



●装着テープ(肌にやさしい)
32枚入り EW-9R01
オープン価格※



●装着テープ(粘着力强め)
32枚入り EW-9R02
オープン価格※



●腰アタッチメント
EW-9R10
オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コリコランシリーズ

Q&A

Q どのくらい使えば効果があらわれますか？

A 効果のあらわれる時期は人々コリ※1の程度によって異なりますが、長時間の継続使用をおすすめします。

Q 服の上からでも使えますか？

A 服の上からでも使えます。高周波パルスは衣類を通して約4 cm奥深くまで届きます。

Q 毎日使っても問題ないですか？

A 毎日、長時間使えます。高周波はビリビリした刺激がないので、仕事中や趣味の時間に「ながら」でコリ※1を治療していただけます。

Q 使用後、別のところがコリでしたのですが？

A コリは一番こっている箇所を感じますので、そのコリがやわらぐと次の箇所でコリを感じる場合があります。

Q 本体が汚れたらどうすればいいですか？

A 本体の水洗いはできませんので、乾いた布で汚れをふき取ってください。

Q 防犯ゲートに反応しますか？

A 店舗や空港の防犯ゲートに近づくくと反応する場合があります。

安全に関するご注意

⊖ してはいけない内容です。 ❶ 実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

- ⊖ ● 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしない
(1) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
(2) 心電計などの装着形の医用電気機器
(事故・身体への著しい障害の原因)

⚠ 警告

- ⊖ ● 肩以外の部位に使用しない(EW-RA560)
● 腰以外の部位に使用しない(EW-RA561)
● 肩・腰以外の部位に巻き付けない(EW-RA550・EW-RA550W)
● 首もと以外の部位に使用しない(EW-RA520)
● 心臓の近く、頭部、顔、口中や陰部、皮膚疾患のある部位に使用しない(EW-CRA518)
● 自分で意思表示ができない人、または操作できない人に使わせない
また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない
(事故・けが・体調不良の原因)
- 子供に使わせない
また、本体の上で遊ばせたり、上にのせない(事故・けがの原因)

- ❶ ● 医師の治療を受けているときや下記の場合は必ず医師と相談のうえ使用する
(1) 急性疾患 (2) 悪性しゅよう(腫瘍) (3) 心臓に障害がある (4) 生理中・妊娠中・出産直後 (5) 糖尿病など高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害がある (6) 感染症疾患 (7) 貧血 (8) 皮膚知覚障害または皮膚に異常がある (9) 血圧に異常がある(180 mmHg以上) (10) 脊椎の骨折・捻挫・肉離れなど急性[とう(疼)痛症]疾患 (11) 体温 38℃以上(有熱期)の場合(例:急性炎症症状[けいん急感・悪寒・血圧変動など]の強い時期・衰弱しているとき) (12) 安静を必要とする場合や著しく体調のすぐれないとき (13) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき(事故・体調不良の原因)
- 使い始めは、連続使用最大3時間以内に限り(体調不良の原因)

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。● 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

パナソニック理美容・健康商品ご相談窓口

月～土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時～18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。



0120-878-697

上記番号がご利用いただけない場合: 06-6907-1187

FAX: 0120-878-236

高周波治療器
WEBサイトはこちら



このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック理美容・健康商品
ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目5-20

このカタログの記載内容は
2025年11月1日現在のものです。

EW-JJ033H25C