

## 取扱説明書

【家庭用】 コリコランワイド 腰アタッチメント

品番 EW-9R55W-K

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

● ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

● この取扱説明書は大切に保管してください。

● パナソニック製高周波治療器 コリコランワイド専用の腰アタッチメントです。



適用品番：EW-RA550



## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


 <b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 <b>注意</b> 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 してはいけない内容です。
 実行しなければならない内容です。



### 警告

### 注意

#### トラブルを防ぐために

-  ● 腰以外の部位に巻きつけない  
(事故・けが・体調不良の原因)
- 子供に使わない  
(事故・けがの原因)
- 就寝時は使わない  
(事故・けが・体調不良の原因)

#### 使用前・使用中は

-  ● 体に強く押し当てたり、こするような状態で使わない  
(圧迫部分での内出血・擦過傷などの原因)
-  ● 本品の使用によって発疹・発赤・かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談する  
(事故・体調不良の原因)

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>

	<b>理美容・健康商品</b> 使い方・お手入れなどのご相談窓口
	フリーダイヤル <b>0120-878-697</b> パナは ロクキューナナ 受付時間 9:00~18:00 月~土曜日 (祝日・正月三が日を除く)
 上記電話番号がご利用いただけない場合 <b>06-6907-1187</b>	 FAX フリーダイヤル <b>0120-878-236</b>
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号



© Panasonic Corporation 2023

W90309R55W1

SH0923Y0

Printed in China

# 各部のなまえ

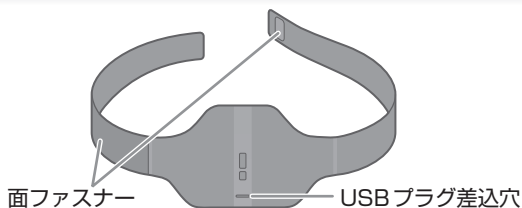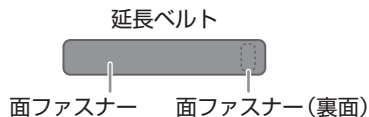

## 腰アタッチメントを使う


肌着や服の上に装着してください。

- 高周波治療器 コリコランワイド(本体)の充電や操作、動作について詳細はEW-RA550取扱説明書をご覧ください。

### 1 腰アタッチメントに本体を入れる


- ① 腰アタッチメントと本体を裏向きにし、上下方向を合わせる
- ② 本体挿入スリットを開いて本体を入れる
- ③ 表向きにし、本体の電源ボタンが見えていることを確認する

腰アタッチメント(裏面) 本体(裏面)

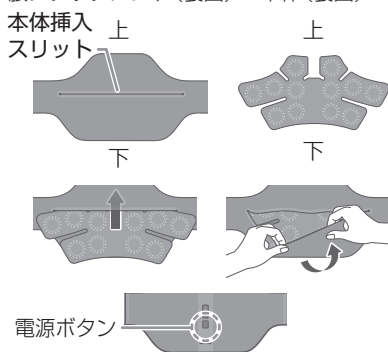

### 2 本体の電源を入れてから腰にあて、面ファスナーをとめる

- ベルトが足りない場合は、延長ベルトをお使いください。

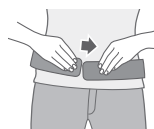

### 3 使い終わったら、腰からははずす

- はずしてから本体の電源を切ってください。

## お手入れ・保管

### お手入れ

- 腰アタッチメントは丸洗いできます。本体を取り出し、面ファスナーを固定してから洗ってください。(詳細はEW-RA550取扱説明書P.17参照)
- 面ファスナーにごみ・髪の毛などがからまった場合は、つまようじなどで取り除いてください。



### 保管

- 次のような場所には置かない
  - ・ 温度・湿度が高い所(故障・生地が変色する原因)
  - ・ 日光があたる所(生地が変色する原因)
  - ・ 小さな子供の手の届く所(事故・けがの原因)
- 表面にものを置いた状態で保管しない(表面に跡がつく・色が移る・変色する原因)
- 犬や猫などのペットを近づけない(破損の原因)

## 定格・仕様

寸法(延長ベルト含む) :  
約幅1150×奥行135×厚み5mm  
質量(延長ベルト含む) :  
約51g  
対応サイズ :  
腰周り約58~100cm  
(延長ベルト使用)

品質表示

ナイロン 80 %  
ポリウレタン 20 %

