


音波振動ハブラシ・ジェットウォッシャー交換品互換一覧

ブラシの交換時期について

いつまでもツルツルの磨き心地をキープするために、衛生上3か月を目安に新しいブラシと交換してください。また、3か月以内でも、毛先が広がったら交換の目安です。


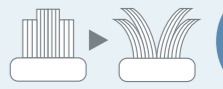


交換は
3か月が
目安

おすすめブラシ 3か月に1度の交換を


歯ぐきケア/歯垢除去/ステインケア※1

これ1本で3つの機能。「歯ぐきケア」・「歯垢除去」・「ステインケア※1」ができる。

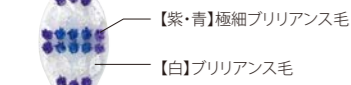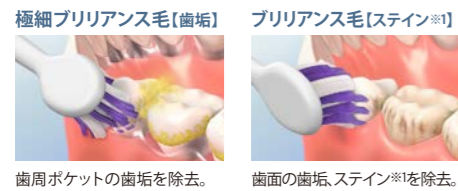

歯ぐきケア/歯垢除去


ブラシの毛先約0.02 mmで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをかき出す。

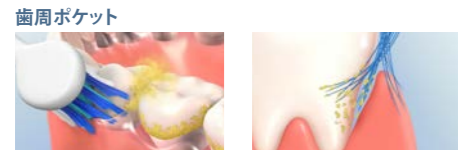


デリケートな歯周ポケットに必要以上に極細毛が入り込まないよう、毛先に約3 mmの段差を設けています。

〈毛先イメージ〉
約3 mm
全面極細毛
細さ約0.02 mm


歯垢除去/ステインケア※1

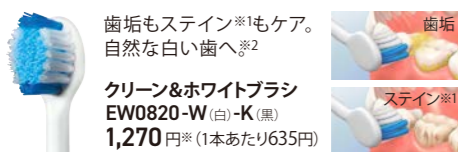

歯間ケア/歯周ポケットケア

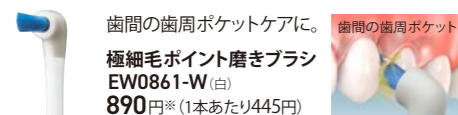

キッズ用

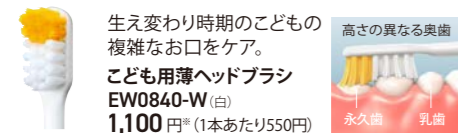

※ブラシの価格は全て、2本入り商品のメーカー希望小売価格(税込)です。

音波振動ハブラシ

	音波振動ハブラシ												
	薄ヘッド細ネックブラシ			歯当たりのやさしい素材をブラシヘッド部に採用			薄ヘッド細ネックブラシ						
	トータルケア ブラシ	極細毛ブラシ (コンパクト)	極細毛ブラシ (ラージ)	クリーン& ホワイトブラシ	極細毛ポイント磨き ブラシ	ポイント磨き ブラシ	こども用 薄ヘッドブラシ	ステインオフ アタッチメント	ステイン クリーンペースト (販売名:ドリルはみがきCP)	シリコンブラシ	歯間クリア ブラシ	舌クリーニング ブラシ	山切りブラシ Vヘッド
	EW0810-W (白)-K (黒) メーカー希望小売価格 1,650円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0800-W (白)-K (黒) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0801-W (白)-K (黒) メーカー希望小売価格 1,400円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0820-W (白)-K (黒) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0861-W (白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0860-W (白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0840-W (白) メーカー希望小売価格 1,100円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0944-W (白) メーカー希望小売価格 1,520円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0956P メーカー希望小売価格 760円(税込) ■容量25 g	EW0932-W (白) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW0943-W (白)★ メーカー希望小売価格 1,780円(税込) ■4本入、 識別リング4色入	EW0941-W (白) メーカー希望小売価格 1,520円(税込) ■2本入、 識別リング4色入	EW09104C-W (白) メーカー希望小売価格 1,270円(税込) ■4本入、 識別リング4色入
		EW0914/0916/0917の後継モデルです。			EW0915/0938の 後継モデルです。			EW0956Pとセットで ご使用ください。	EW0944とセットで ご使用ください。				
EW-DT73	●	●	●	○	●	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DT63	●	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DP57	●	●	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DP37	●	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DA48	●	●	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DA18	●	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DM74	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DK31	○	○	○	○	○	○	●	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DA57 ★	●	●	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DA37 ★	●	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DL39 ★	●	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DT52・72 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-CDP55 / DP55・56 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-CDP35 / DP35・36 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DA45・46 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DL57・58 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DL37・38 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DT51 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-CDP54 / DP54 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-CDP34 / DP34 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DA44 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DL56 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-DL36 ★	○	○	○	○	○	○	○	△ ※3	△	△ ※3	△ ※3	○ ※3	△ ※3※4
EW-CDP53 / DP53 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-CDP33 / DP33 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DA43 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DL55 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DL35 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-CDP52 / DP51・52 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DA51・52 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DA41 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DA21 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DE24・25・44・45 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DE20・21・40・41・42・43・54・55 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DL53・54 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DL32 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DL22・23・34 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EW-DL21・43 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。 ※2 清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時。 ※3 ブラシ差し込み部が、本体取り付け部より太くなります。 ※4 同様の機能を兼ね備えたおすすめブラシがあります。

★の品番は生産終了品のため、在庫のみの取り扱いとなります。 ●写真、イラストはすべてイメージです。

	音波振動ハブラシ(スリムタイプ)			音波振動ハブラシ(その他)		
	スリム用 密集極細毛ブラシ	スリム用 マルチフィットブラシ	スリム用 ポイント磨きブラシ	山切りブラシ Vヘッド	替カーブ スピニングブラシ	EW-DM51用 スリムネックブラシ
	EW0971-W(白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、識別シール3色入	EW0973-W(白) メーカー希望小売価格 890円(税込) ■2本入、識別シール3色入	EW0961-W(白) メーカー希望小売価格 510円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW084-W(白) メーカー希望小売価格 380円(税込) ■2本入	EW0981-W(白) メーカー希望小売価格 1,140円(税込) ■1本入	EW0970-W(白)★ メーカー希望小売価格 760円(税込) ■2本入
●…付属品 ○…取りつけられる ×…取りつけられない						
本体品番						
EW-DM61・62・63★	●	●	○	×	×	×
EW-DM51★	×	×	×	×	×	●
EW-DM41/SA10・20・40★	○	○	○	×	×	×
EW1162P・1163★	○	○	○	×	×	×
EW1100・1150・1160・1882・1912★	×	×	×	○	○	×
EW115～122・126～129・ 135～141・144・145・147・ 150・152～159・182・ 183・187・1192・1452・1472・ 1522・1532・1542・1572・ 1822・1832・1872★	×	×	×	○	×	×
EW188・191★	×	×	×	○	○	×
EW166～168★	×	×	×	○	×	×

	ポケットドルツ						
	ポケットドルツ用 極細毛ブラシ	ポケットドルツ用 舌ケアブラシ (やわらかめ)	ポケットドルツ用 替ブラシ (やわらかめ)	ポケットドルツ用 ステインオフ アタッチメント	ポケットドルツ用 歯間ブラシ (SSサイズ)	EW-DS11用 替ブラシ	EW-DS32用 替ブラシ (やわらかめ)
	EW0968-W(白) メーカー希望小売価格 700円(税込) ■2本入	EW0966-W(白) メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入	EW0958-W(白) メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入	EW0964-P(ピンク) メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入	EW0967-W(白) メーカー希望小売価格 1,140円(税込) ■10本入	EW0957-W(白)★ メーカー希望小売価格 640円(税込) ■2本入	EW0959-W(白) メーカー希望小売価格 760円(税込) ■2本入
●…付属品 ○…取りつけられる ×…取りつけられない							
本体品番							
EW-DS42	●	○	○	×	×	×	×
EW-DS1C	●	○	○	○	○	×	×
EW-DS41★	●	○	○	×	×	×	×
EW-DS28★	○	●	○	●	○	×	×
EW-DS29★	○	●	○	○	●	×	×
EW-DS1A・1B★	○	●	○	×	×	×	×
EW-DS32★	×	×	×	×	×	×	●
EW-DS27★	○	●	○	×	●	×	×
EW-DS26★	○	●	○	●	○	×	×
EW-DS25★	○	●	○	○	●	×	×
EW-DS24★	○	●	○	●	○	×	×
EW-DS23★	○	○	●	●	○	×	×
EW-DS15・16・17・18★	○	●	○	×	×	×	×
EW-DS12・13・14・60★	○	○	●	×	×	×	×
EW-DS11★	×	×	×	×	×	●	×

オーラルケア Q & A

1 どんな歯ブラシを選ばいいのでしょうか？

まずは1本で「歯ぐきケア」「歯垢除去」「ステインケア※6」の3つの機能があるトータルケアブラシがおすすめです。特に歯と歯ぐきの健康を気にされる方には「極細毛ブラシ」を、また特に歯の着色汚れを気にされる方には「クリーン&ホワイトブラシ」をおすすめします。さらに歯周ポケットを集中的にケアしたい場合は、「極細毛ポイント磨きブラシ」の併用や、歯並びの悪いところには「ポイント磨きブラシ」を追加するなど、お口の悩みに合わせてブラシを使い分けて様々なケアが可能です。

2 電動歯ブラシを使う場合、どのように磨けばいいのでしょうか？

ドルツは、ブラシが音波振動※7により、高速かつ細かい振動をするので、手を大きく動かさずにブラシの毛先を歯に当てるだけで使用できます。(ポケットドルツを除く)

3 電動歯ブラシで歯磨きをする場合、何分くらい磨けばいいのでしょうか？

2分間を目安としています。ドルツは「磨き時間お知らせタイマー」を搭載しているので、お口の中を上下左右で4分割し、1エリアを約30秒かけて磨くことをおすすめします。

●DTシリーズについては、「磨きポイント切り替えお知らせ」機能搭載(ドルツアプリ使用時)

4 電動歯ブラシの使い心地は？

使い始めはくすぐったいなどの違和感を覚える時がありますが、数回の使用で慣れる方がほとんどです。

5 矯正中でも電動歯ブラシは使えるのでしょうか？

使用可能です。ドルツは矯正器具まわりにもおすすめの「ポイント磨きブラシ」で、ワイヤー下などの細かい部分まで磨けます。さらに、ジェットウォッシャーと併用していただくと、矯正器具が邪魔をしてブラシの届きにくい箇所汚れもしっかり除去できます。

- …付属品
- …取りつけられる
- ×…取りつけられない

本体品番

EW-DE55★	●
EW-DE25・45★	●
EW-DE54★	○
EW-DE24・44★	○
EW-DE42・43★	○
EW-DE41★	○
EW-DE20・21・40★	○
EW1044・1045・1046★	○
EW-DC11・EW1300★	×

	音波振動ハブラシ(イオンタイプ)			ステインクリーナー用
	イオン用密集極細毛ブラシ	イオン用マルチフィットブラシ	イオン用2Wayシリコンブラシ	ステインクリーンペースト (販売名:ドルツはみがきCP)
	EW0913-K(黒)-W(白) メーカー希望小売価格 1,900円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW0909-K(黒)-W(白) メーカー希望小売価格 1,900円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW0906-W(白)★ メーカー希望小売価格 1,780円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW0956P メーカー希望小売価格 760円(税込) ■容量25g
●…付属品 ○…取りつけられる ×…取りつけられない				
本体品番				
EW-DE55★	●	●	●	○
EW-DE25・45★	●	○	○	●(付属はEW-DE45のみ)
EW-DE54★	○	○	○	○
EW-DE24・44★	○	●(付属はEW-DE44のみ)	○	○
EW-DE42・43★	○	○	○	○
EW-DE41★	○	○	○	○
EW-DE20・21・40★	○	○	○	○
EW1044・1045・1046★	○	○	○	○
EW-DC11・EW1300★	×	×	×	●

- …付属品
- ◎…取りつけられる
- …取りつけられる(使用上影響なし)
- △…取りつけられる(使用上影響あり)
- ×

本体品番

EW-NJ80	●	×	×	×	×	×	×	×	×
EW-DJ75 EW-DJ74 / CDJ74★	×	●	△※3	×	●	●	△※2※3	×	△※2
EW-DJ55 EW-DJ54★	×	●	△※3	×	●	●	△※2※3	×	△※2
EW-DJ64 EW-DJ61・63 / EW1250・1250P★	×	×	×	×	×	×	×	●	×
EW-DJ42 EW-DJ41★	×	△※1	●	×	○※4	○※4	△※2	×	△※1※2
EW-DJ11	×	△※1※2	△※2	×	○※4	○※4	●	×	△※1
EW-DJ73 / CDJ73★	×	●	△※3	×	●	○	△※2※3	×	△※2
EW-DJ71・72 / CDJ72★	×	×	×	●	×	×	×	×	×
EW-DJ53★	×	●	△※3	×	●	○	△※2※3	×	△※2
EW-DJ52★	×	●	△※3	×	○	○	△※2※3	×	△※2
EW-DJ51 / EW1211・1211P★	×	△※2	△※2※3	×	○	○	△※3	×	●
EW-DJ10・40★	×	△※1※2	△※2※3	×	○※4	○※4	△※3	×	△※1

ノズルの交換時期について 清潔&効果的に使用いただくために、定期的に新しいノズルへ交換してください。

ナノクレンズノズル・超音波水流ノズル・替ノズル

ノズルの先端の変形、又は、衛生上約6か月を目安に交換してください。

●ノズルの仕様は商品により異なります。

ポイント磨きノズル

毛先が広がった場合、又は、衛生上約3か月を目安に交換してください。

舌磨きノズル

クロスが変色した場合、又は、衛生上約6か月を目安に交換してください。

★の品番は生産終了品のため、在庫のみの取り扱いとなります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 取りつけられますが、本体横のノズル収納部には収納できません(代替品あり)。 ※2 取りつけられますが、超音波水流にはなりません。 ※3 取りつけられますが、つばが無いため片手で回転操作ができません。 ※4 取りつけられますが、本体横のノズル収納部には収納できません(代替品なし)。 ※5 取りつけられますが、つばが小さくなります。 ※6 ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。 ※7 音波領域内での振動。 ●写真、イラストはすべてイメージです。