


取扱説明書

SANYO

フットマッサージャー 品番 HER-582

このたびは、フットマッサージャーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保証書とともに大切に保管してください。

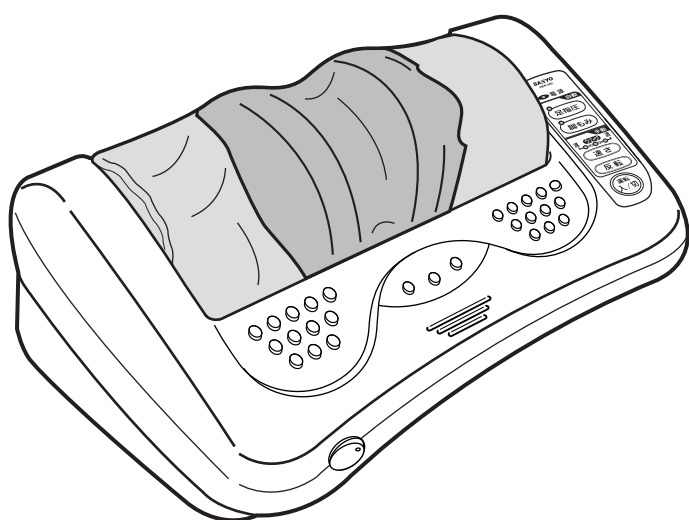

も く じ

ページ

安全上のご注意	1～3
各部のなまえとはたらき	4
使いかた	5～7
マッサージのしかた	8
お手入れのしかた	9
故障かな？と思ったら	10
仕様／保証とアフターサービス	裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、
国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan
only and cannot be used in any other country.

安全上のご注意

どの項目も大切な内容です。
しっかりお守りください。

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



強制

次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。

- 医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じているとき
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 生理中や妊娠している人
- 安静を必要とする人
- 背骨に異常のある人や曲がっている人
- かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- 熱の高い人(38℃以上)
- 骨の弱い人(骨粗しょう症など)
- ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人

事故や体調不良を起こす原因になります。



禁止

足・脚部のマッサージ用ですので、頭部や胸部、腹部、骨部(ひざ・足の甲・ひじなど)への使用はしないでください。

気分が悪くなったり、ケガをする恐れがあります。



禁止

布力バーが破れたり、はずれた状態では使用しないでください。故障や事故の原因になります。修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(別紙)にご相談ください。






禁止

本体の上に立ったり座ったりしないでください。故障や事故の原因になります。



⚠ 警告

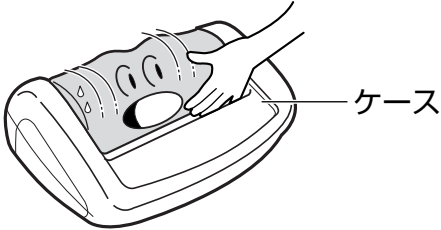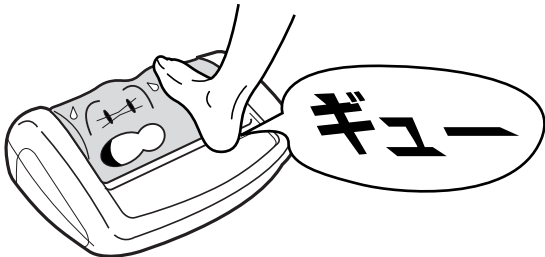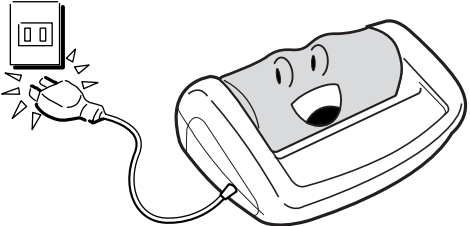 禁止	ローラーとケースのすき間に手や足などを入れないでください。 ケガをする恐れがあります。 	 禁止	足を強くあてないでください。 故障や事故の原因になります。 
 分解禁止	改造しないでください。修理技術者以外の方は、分解や修理をしないでください。 火災・感電・ケガの原因となります。 修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（別紙）にご相談ください。	 電源プラグを抜く	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電やケガをすることがあります。 
 禁止	コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。		
 禁止	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。	 強制	電源は交流100V専用コンセントを使用してください。 火災や感電の原因になります。

⚠ 注意


 強制	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。 	 電源プラグを抜く	長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 
--	---	---	--

安全上のご注意


⚠ 注 意

 強制	動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。 感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。	 強制	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。 そのまま使用を続けると思わぬ事故につながる恐れがあります。
 禁止	自分で意志表示のできない人や身体の不自由な方には使用させないでください。 ケガをする恐れがあります。	 禁止	幼児に使わせないでください。 また、使用中は幼児を近づけないでください。 ケガをする恐れがあります。
 水場での使用禁止	浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。 感電および故障の原因になります。	 禁止	足・脚部のマッサージ以外の目的には使用しないでください。 故障や事故の原因になります。
 禁止	本体に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃を与えないでください。 発火したり、感電・故障の原因になります。ただちに使用を中止して販売店で点検を受けてください。	 禁止	コードを持って本体をぶらさげたり、振り回したりしないでください。 また、コード側を下にして本体を立てないでください。 コードの断線事故の原因になります。
 禁止	ふとんの中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。 発火や本体内部の温度が高くなる原因になります。	 禁止	椅子式マッサージャー以外の他の治療器(低周波治療器など)と同時に使用しないでください。 気分が悪くなったり、体調不良を起こす恐れがあります。
 強制	1回の使用は15分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用はさけてください。 長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やケガの原因となります。	 強制	長期間で使用にならなかった場合はご使用前に、正常にかつ安全に作動することを確認してください。また電源スイッチやコードなどに異常のないことを確認してください。 事故の原因になります。
 電源プラグを抜く	停電のときはただちに電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 復帰したときに危険です。		

各部のなまえとはたらき

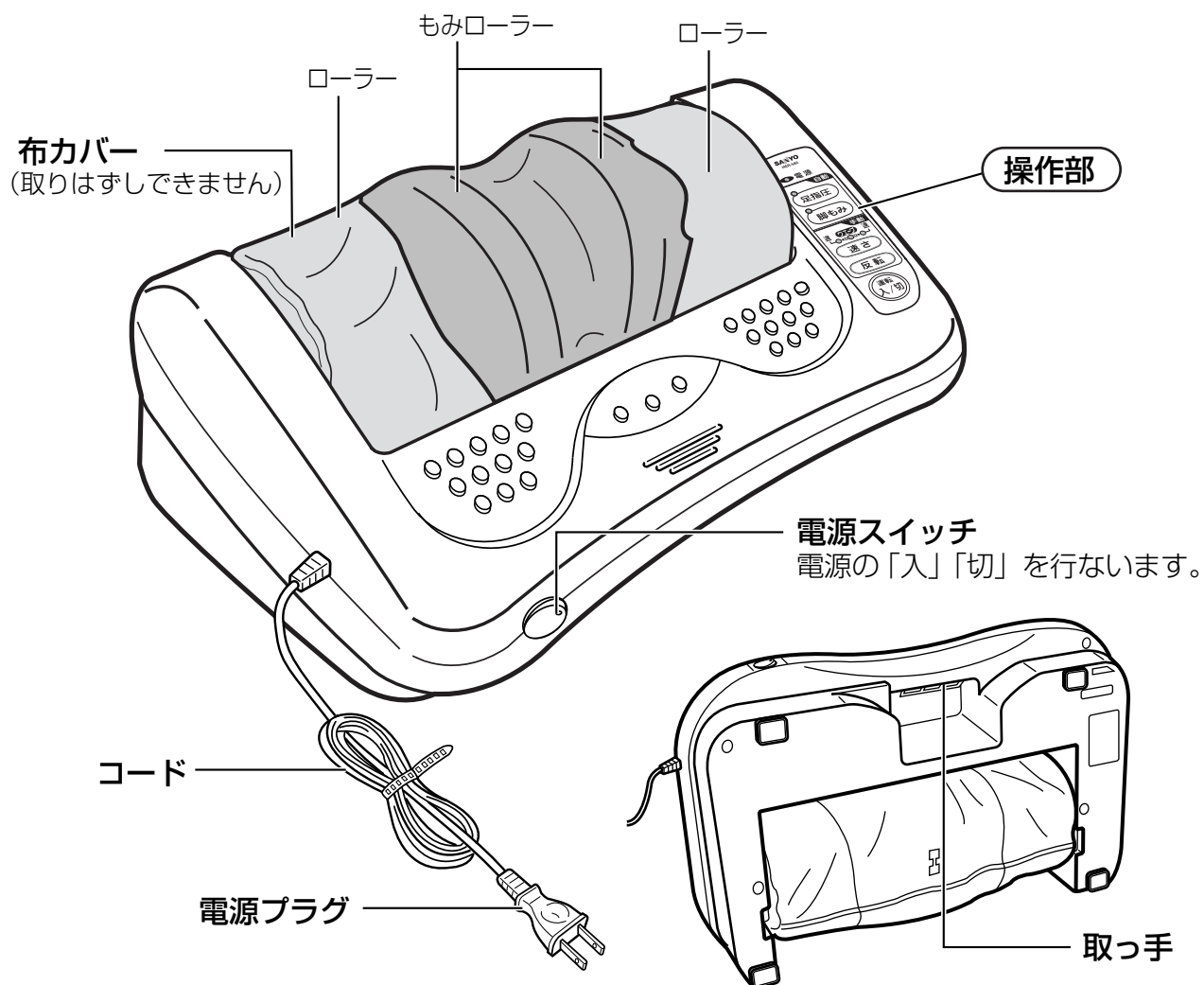

操作部

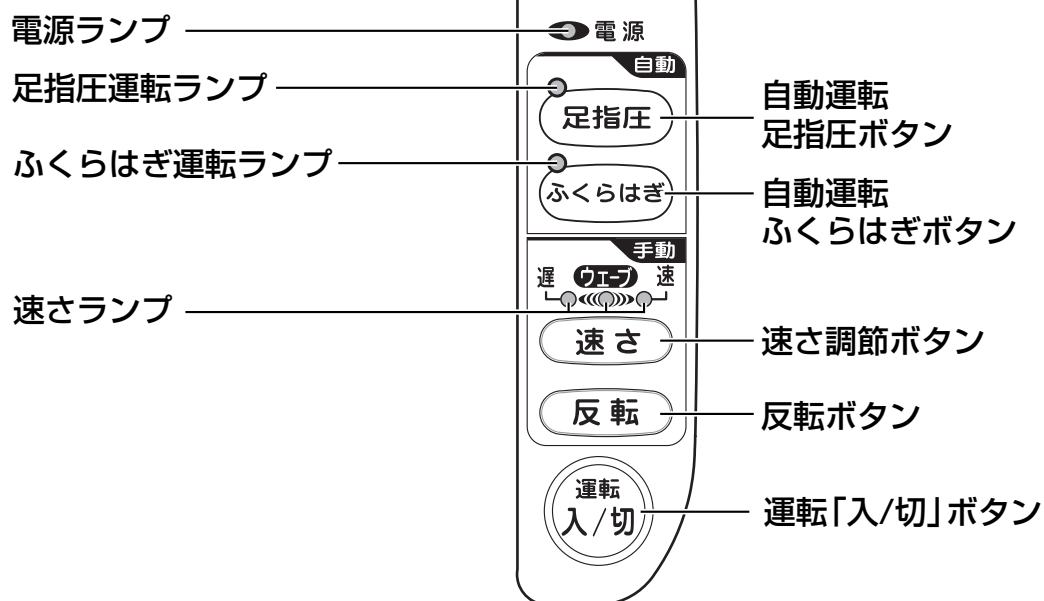

使いかた

使用場所について

- 本体を安定した場所に置いてください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。

警告


- 次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。
 - 医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じているとき
 - 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 生理中や妊娠している人
 - 安静を必要とする人
 - 背骨に異常のある人や曲がっている人
 - かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
 - 熱の高い人（38℃以上）
 - 骨の弱い人（骨粗しょう症など）
 - ペースメーカー等体内植込型医用電子機器を使用している人
- 足・脚部のマッサージ用ですので、頭部や胸部、腹部、骨部（ひざ・足の甲・ひじなど）への使用はしないでください。

注意

- 1回の使用は15分以内にしてください。
また、同一箇所への連続使用はさけてください。
- 使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にします。

- 電源ランプが点灯します。

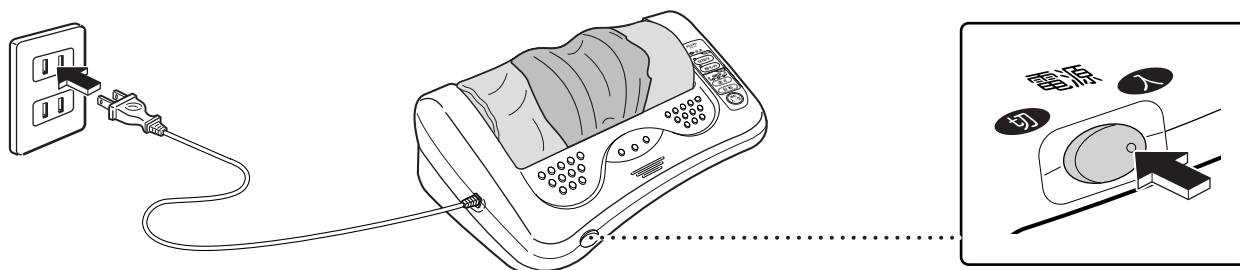

2 運転「入/切」ボタンを押します。

- 手動コース（速さ「ウェーブ」、回転方向「正転」）で運転を開始します。



3 マッサージをします。

※マッサージのしかたは8ページを参照してください。


自動コース

もみローラーやローラーの速さや回転方向を自動的に変化させて、効果的にマッサージします。


「足裏」や「足」をマッサージしたいとき・・・・・・・・ 足指圧コース
「ふくらはぎ」や「足首」をマッサージしたいとき・・・ふくらはぎコース

足指圧コース

- ① いすに座って、足をもみローラーの間に入れるか、ローラーの上にのせてください。

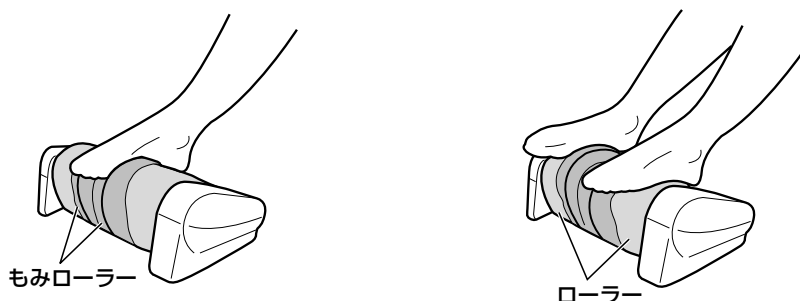

- ② 足指圧ボタンを押すと、ランプが点灯し自動運転をします。

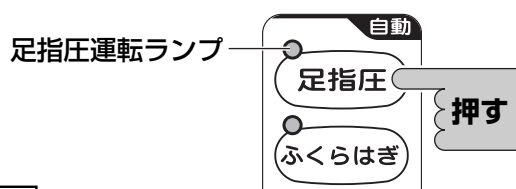


ふくらはぎコース

- ① ふくらはぎや足首を、もみローラーの間に入れるか、ローラーの上にのせてください。



- ② ふくらはぎボタンを押すと、ランプが点灯し自動運転をします。

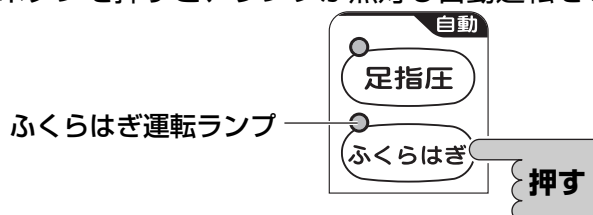

お願い

- ・自動コースで運転中、一時的に運転が停止しますが、これは自動運転のプログラムの一部で異常ではありません。

使いかた


手動コース

お好みにより 速さ と 回転方向 を変えたいときに

速さを変えたいとき

- 速さボタンを押すごとに速さが切り換わりランプで表示します。

ウェーブ → 速 → 遅

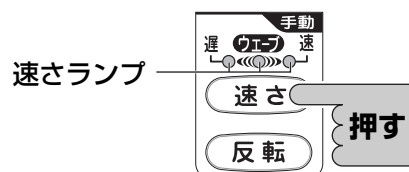

- ウェーブは速さを自動的に変化させてマッサージします。

回転方向を変えたいとき

- 反転ボタンを押すごとに回転方向が切り換わります。



4 マッサージをやめたいとき。

- 運転「入/切」ボタンを押して運転を止め、電源スイッチを「切」にしてください。



注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

タイマーについて

- 運転「入/切」ボタンを押してから、約15分経過するとタイマーがはたらき、自動的に運転が停止します。


コースを変更したいときは

- 自動コース → 手動コース 速さボタンか反転ボタンを押します。
(速さ「ウェーブ」、回転方向「正転」で運転をします。)
- 手動コース → 自動コース 足指圧ボタンかふくらはぎボタンを押します。

マッサージのしかた

足をマッサージ

椅子に座った状態で、足をローラーの上にのせてください。

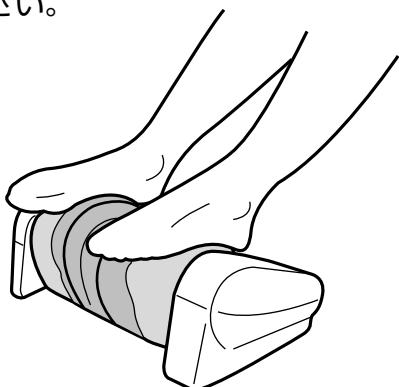


椅子に座った状態で、足をもみローラーの間にに入れてください。




足首をマッサージ

足首をローラーの上にのせてください。

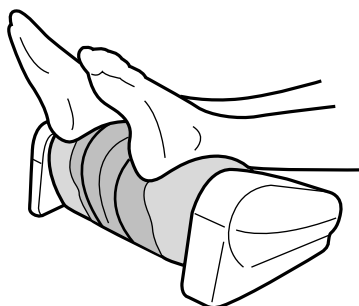


足首をもみローラーの間にに入れてください。

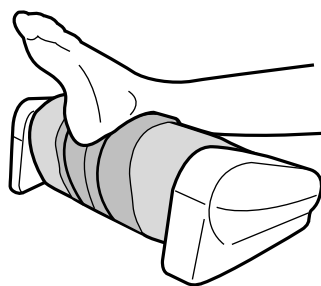


ふくらはぎをマッサージ

ふくらはぎをローラーの上にのせてください。

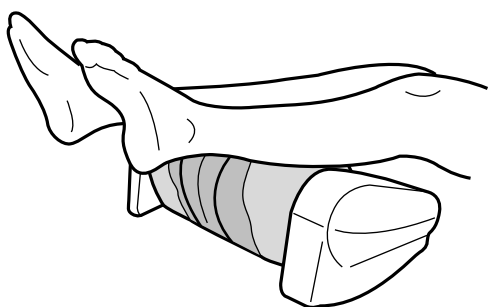


ふくらはぎをもみローラーの間にに入れてください。

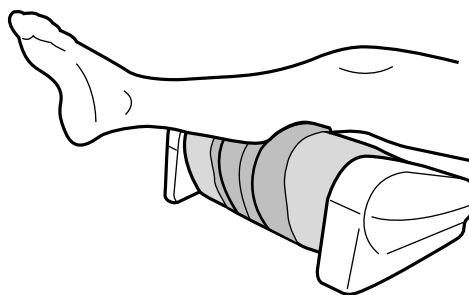

大腿部（ふともも）をマッサージ

大腿部をローラーの上にのせてください。

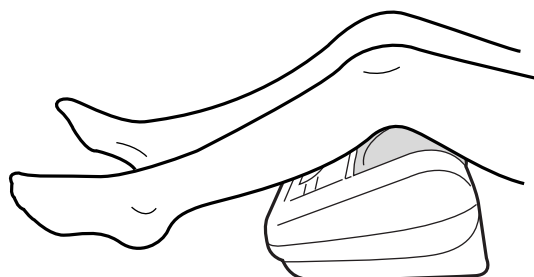


お手入れのしかた


警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

- 1 やわらかい布にうすめた台所用中性洗剤をひたしてよく絞ってください。

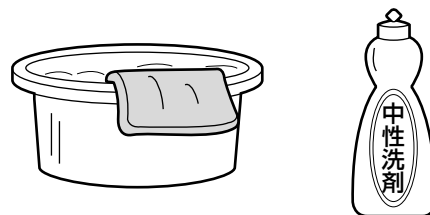

- 2 本体をふき、最後にからぶきをしてください。

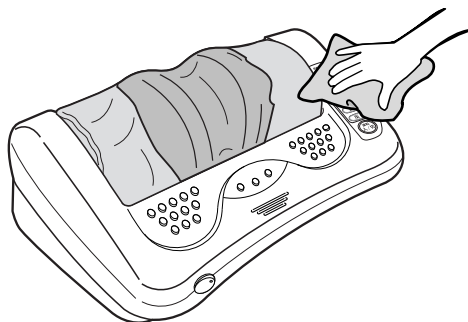

お願い

ベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤などは使用しないでください。
傷、変色、ひび割れの原因になります。

別売品

- 本体を清潔にご使用いただくために、着脱できて洗えるカバーがあります。
お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。


品名：フットマッサージャー専用カバー

品番：HERP-C2

希望小売価格：1,890円（税抜1,800円）

※価格は2005年2月現在のものです。

フットマッサージャー専用カバー

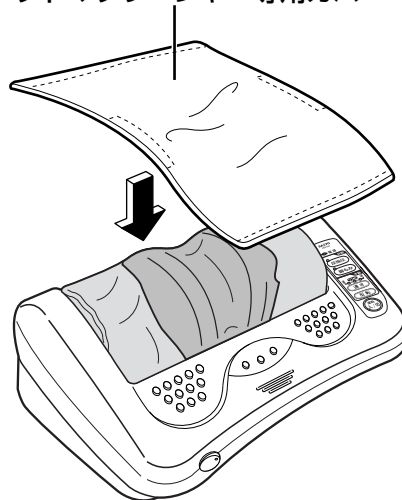

故障かな？と思ったら

警告

- ・ 次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・ ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	調べるところ	直しかた
運転時の音 ・ もみ運転時の布カバーがこすれる音（キュッキュッ音） ・ 歯車のジージー音 ・ ローラーの回転音（コロコロ、カタカタ、コンコン、キュルキュル音など）	● 構造上やむをえず発生するもので機能等には影響ありません。	
電源スイッチを「入」にしても、電源ランプが点灯しない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 
運転「入/切」ボタンを押しても、運転しない	● 電源スイッチが「入」になっていますか。	● 電源スイッチを「入」にしてください。 
マッサージの途中で運転が停止した	● 運転「入/切」ボタンを押してから、15分以上経過していませんか。	● タイマーのはたらきによるもので故障ではありません。 
マッサージの途中で運転が停止した (電源ランプが点滅したとき)	● ローラーに無理な力がかかっていませんか。	● 本体の安全装置が働いています。 

安全装置がはたらいたときは

- ローラーに無理な力がかかると、運転が停止し、電源ランプが点滅します。そのときは電源スイッチを「切」にし、3秒以上経過してから再度「入」にしてご使用ください。足の大きい方（27cm以上）がご使用になられると、途中で運転が停止することがあります。

仕様/保証とアフターサービス

仕 様

- 取扱説明書には商品の色記号の表示を省略しています。
- 包装箱に表示している品番の（ ）内の記号が色記号です。

電 源	AC100V 50-60Hz共用	定 格 時 間	30分
消 費 電 力	10.5W	寸 法	幅495×奥行290×高さ175mm
タ イ マ ー	約15分	質 量	5.8kg
ローラーの回転数	遅:35 速:55回転/分	布カバーの材質	ナイロン100%
ローラーの回転方向	正転方向および逆転方向	電源コードの長さ	2m

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

保 証 書	補修用性能部品の 保有期間	ご不明な点や修理に 関するご相談は
●この商品には保証書を別途添付しております。 ●保証書は販売店でお渡しいたしますから所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。 保証期間 お買い上げ日より1年間です。	●当社は、このフットマッサージャーの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年保有しています。 ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。	●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（別紙）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

- 10ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さま メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ 販 売 店 名	TEL () —

愛情点検

長年ご使用のフットマッサージャーの点検を！



こんな症状はありませんか

- ・スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ・コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中、異常な音がある。
- ・本体が変形していたり、異常に熱い。
- ・こげくさい臭いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため、電源
プラグを抜いて、必ず販売店
に点検をご相談ください。

三洋電機株式会社

HAカンパニー 生活家電ビジネスユニット
〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4