


## 取扱説明書

ジェットウォッシャー ドルツ 家庭用

品番 EW-DJ61

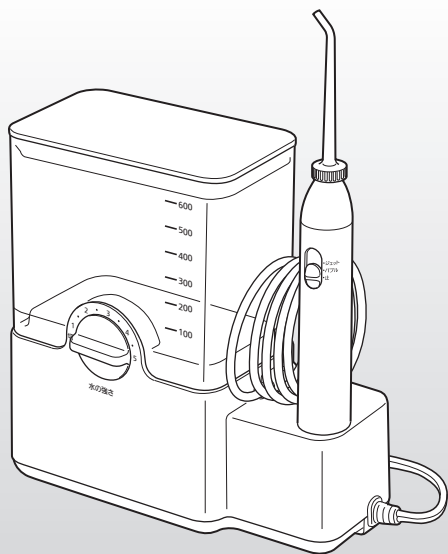

### もくじ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6
使いかた	7
使い終わったら（お手入れ）	12
修理を依頼される前に	14
お知らせ	15
・別売品 ・ノズル交換について ・定格・仕様	
保証とアフターサービス	18
保証書	裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP.22をご参照)

保管用

保証書付き

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**⚠ 危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

**⚠ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**⚠ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


## ⚠ 警告

### トラブルを防ぐために

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない  
(取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やけがの原因)

### 電源について

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない  
(感電やけがの原因)
- 本体は水につけたり、水洗いしない
- 本体は風呂・シャワー室で絶対に使用しない
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源コードを傷めない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねて使用する、重いものを載せる、挟み込む など  
(感電やショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない  
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 必ず交流 100 V で使用する (日本国内専用)
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)

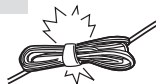

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

火災、感電、やけど、  
けがなどを防ぐために



### 異常・故障時には

- ❗ ● 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (火災・感電・けがの原因)  
＜異常・故障例＞  
本体が  
・変形したり異常に熱い  
・こげ臭いにおいがする  
・使用中に異常な音がする  
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

### 本製品は

- ⊘ ● 絶対に改造・分解・修理しない (発火や異常動作によるけがの原因)  
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 落としたり、ぶつけたりしない (感電や発火の原因)



### 掃除について

- ❗ ● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(感電やけがの原因)
- 電源プラグにほりかが付着しないように定期的  
(半年に一度) に掃除する  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)  
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください



# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

### 歯や歯ぐきを傷めないために



- 自分で操作ができない方には使用させない
- 口腔内の感覚が弱い方は使用しない  
(けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因)



- 歯周病の疑いがある人・治療中の歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医に相談のうえ、使用する  
(けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因)

事故やけがなどを  
防ぐために



### 本製品は



- 口腔洗浄以外の目的に使用しない  
(目や鼻、耳、のどなどに水流をあてると事故やけがの原因)
- タンクに 40℃ を超える温水を入れない (やけどの原因)
- ノズルは家族や他人と共用しない (感染や炎症の原因)

### 次のこともご注意ください



- 電源プラグにピンやゴミを付着させない  
(感電やショートによる火災などの原因)
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない  
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)



- 使用時以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く  
(電源コードに負荷がかかり断線し、やけど、感電、ショートによる火災などの原因)
- 使用後は必ず機器のお手入れをし、清潔にする (お手入れ方法は P.12)  
(カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因)

# 使用上のお願い


塩・洗口剤・薬品などはタンクに入れないでください

(故障の原因)



ドライヤーやファンヒーターなどで  
本体を乾燥しないでください

(部品の変形・故障の原因)

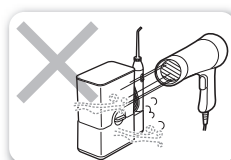


シンナー・ベンジン・アルコールなどで  
ふかないでください

(故障や部品の割れ・変色などの原因)



ご使用後は、湿気の少ないところで  
保管してください

(浴室などに放置すると故障の原因)

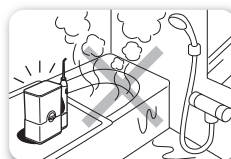


安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

安全上のご注意

使用上のお願い

# 各部のなまえ

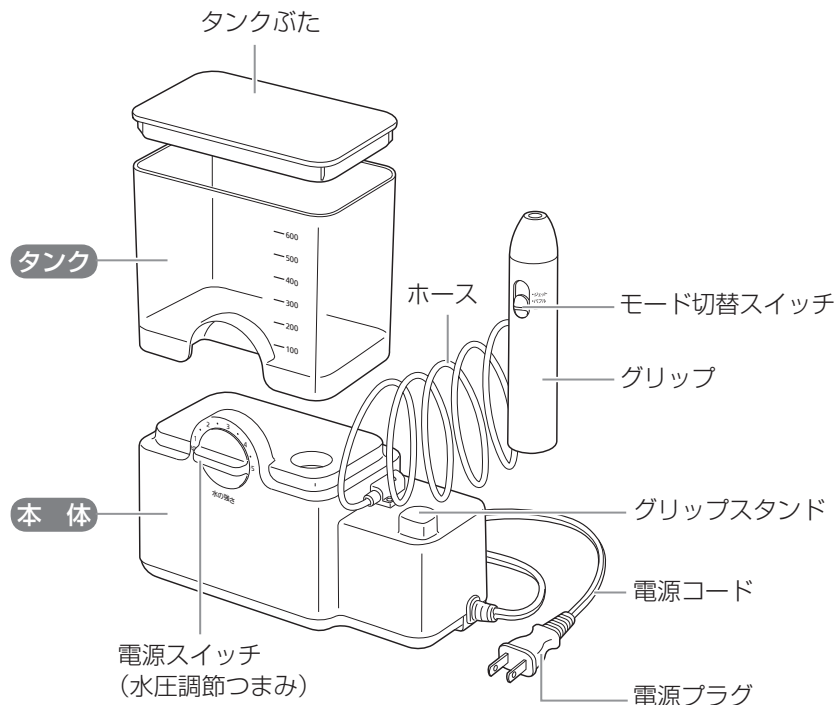


本体内部(タンク、ホースなど)に性能(水流)テストを行った際の蒸留水が付着している場合があります。


## ノズル (2本)

- ノズルは消耗品です

ノズルハンドル

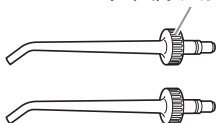


## ノズルスタンド

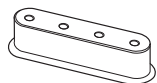

# 使いかた


## 洗面台や棚などに置く

- ① 水平で安定したところに本体を置く
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む

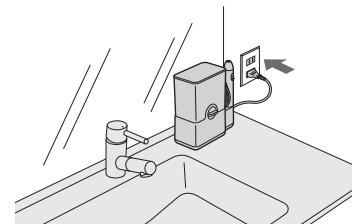


## 1 タンクを取りはずし タンクぶたを開け 水を入れる


- 常に新しい水道水またはぬるま湯を使用する
- 水が冷たく感じられる場合は40℃以下のぬるま湯を使用する
- 600 mLを超えて水を入れない

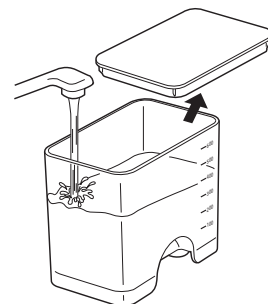

## 2 タンクぶたを閉め 本体にしっかり 取りつける

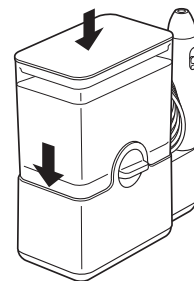

## 3 ノズルを 取りつける 確実にしっかり押し込む


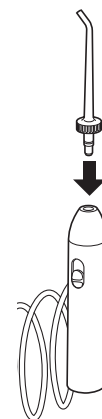


各部のなまえ

使いかた

## 4 水の強さを選ぶ


- ①ノズルを洗面ボウルに向けてモード切替スイッチを「ジェット」または「バブル」にする
- ②電源スイッチを入れ好みの水の強さに調節する
- ③モード切替スイッチを「止」にし、いったん水を止める
  - 1分以上「止」のまま放置しない(故障の原因)

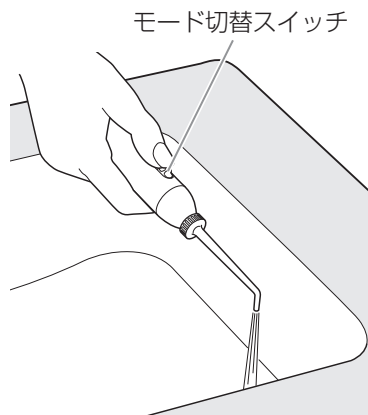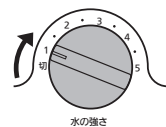


(水が出ない場合は **P.10**)

## 5 口の中にノズルを入れ、軽く口を閉じモード切替スイッチを「ジェット」または「バブル」にする

いったん水を止めたいときは、モード切替スイッチを「止」にする

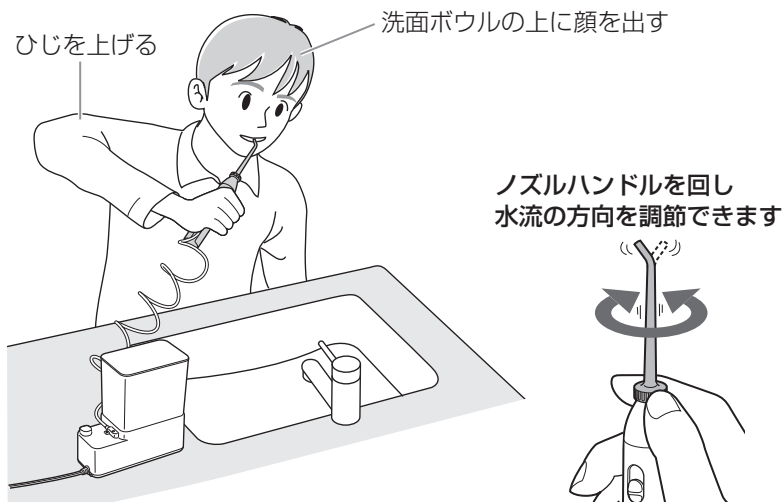


## モード切替スイッチ

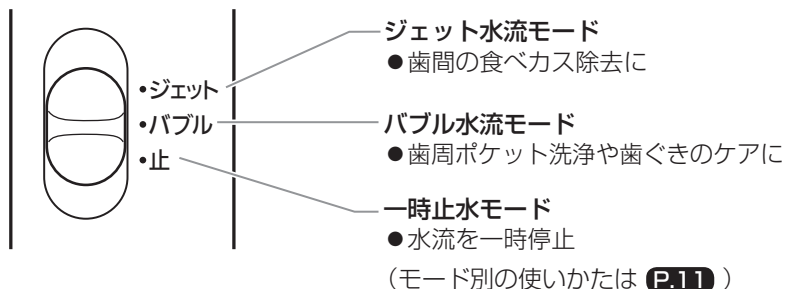

●水の強さが弱いときは、ジェット水流モードとバブル水流モードの水勢差がわかりにくい場合があります。

## 6 使い終わったら、電源スイッチを「切」にする

水の飛び散りを防ぐために、ノズルを口から出す前に運転を止める

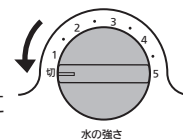


### お願い

- ノズルの先端を歯や歯ぐきに強くあてないでください。
- 歯面に付着している歯垢は水流だけでは除去できないため、必ずブラッシングが必要です。  
歯磨き後に、水流で口の中を洗浄することをおすすめします。
- 本体内の水を抜き取る時以外、タンクに水が入っていない状態で電源スイッチを入れないでください。(故障の原因)
- 連続10分以上運転させないでください。(故障の原因)


## 使いはじめは

- 水が出ない場合や水の強さが十分でない場合があります。  
そのときは、下記手順を行ってください。


### 1 モード切替スイッチを「止」にする

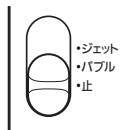

### 2 水の強さを「1」にする

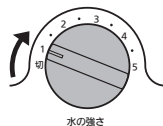

モード切替スイッチ

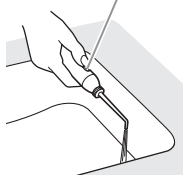

### 3 ノズルを洗面ボウルに向け、 モード切替スイッチを 「ジェット」または「バブル」にする 水が出るまで動かす

## モード別の使いかた

### 歯間洗浄



#### ジェット水流モードで

- 歯と歯の間の△ゾーンに水流をあてる
- 歯の表側と裏側の両方からあてる

### 歯周ポケット洗浄



#### バブル水流モードで

- 歯と歯ぐきの間を狙って水流をあてる
- 歯ぐきに沿ってゆっくり移動する
- 歯の表側・裏側・奥歯の奥も洗浄する
- 歯ぐきの状態の気になる部分は  
弱めのバブル水流モードで洗浄する

※ジェット水流モードでは水勢が強いため、  
歯周ポケットを洗浄しないでください

### 歯ぐきケア




#### バブル水流モードで

- 歯ぐきに刺激を与える
- 歯ぐきの状態の気になる部分は  
弱めのバブル水流モードでやさしく  
刺激を与える


# 使い終わったら(お手入れ)

## 1 タンクを取りはずし 水を捨て、洗う

- タンク内の水は、毎回必ず捨てる

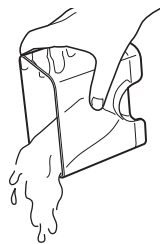


## 2 ノズルを洗面ボウルに向け モード切替スイッチを 「ジェット」または「バブル」 にする

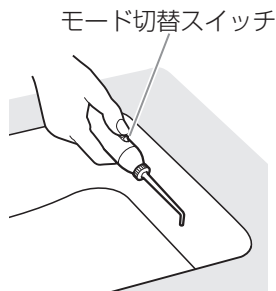

## 3 電源スイッチを入れ 本体に残っている水を 抜き取る


- 水が出なくなるまで動かし、  
電源スイッチを「切」にする

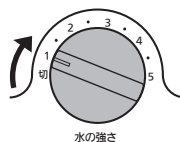

## 4 電源プラグを コンセントから抜く


## 5 ノズルを本体からはずして 洗い

- ノズルスタンドに立てる

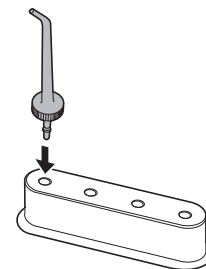

## 6 グリップを 洗い

- 本体に立てる

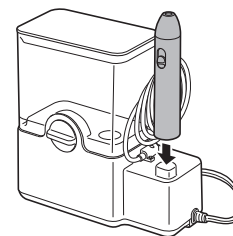


## タンク・ノズル・グリップを洗うときは

- 50℃以上の温水で洗わない
- 洗剤を使用する場合は、食器用中性洗剤を使用する  
洗剤を使用後は洗剤が残らないようによくすすぐ
- タオルなどで水分をふき取り風通しのよい所で乾燥させる

## 本体の汚れは

### 布でふき取る

- シンナーやベンジン、アルコールは使用しない  
(故障や部品の割れ・変色などの原因)
- 本体は水で洗わない

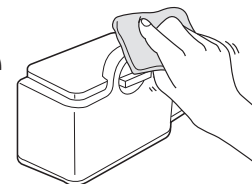


# 修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いて  
お買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは **P.18**)

症 状	考えられる原因	処 置
水が出ない 水勢が弱い	内部に空気がたまっている	1 モード切替スイッチを「止」にする 2 水の強さを「1」にする 3 ノズルを洗面ボウルに向け、 モード切替スイッチを「ジェット」 または「バブル」にする 水が出るまで動かす <b>P.10</b>
	ノズルにゴミがつまっている	ノズルを取り替えてください
使用中ノズルが はずれる	ノズルの出口がつぶれる など変形している	
	ノズルが変形している	

愛情点検	長年ご使用のジェットウォッシャーの点検を！	
	こんな 症状はあり ませんか？	・電源コードや電源プラグ が異常に熱い。 ・使用中に異常な音が する。 ・本体が変形していたり、 こげ臭いにおいがする。
	ご使用 中止	事故防止のため、 コンセントから 電源プラグを抜い て、必ず販売店に 点検をご依頼くだ さい。

# お知らせ

## 別売品

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただける  
ものもあります。

詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。


<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



**Panasonic Store**

「本体品番(EW-DJ61)」と「替ノズル品番」をご確認のうえ、お買い求めください

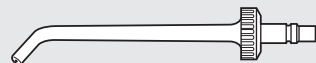

替ノズル(1本入り)

EW092P-A (青)

-R (赤)

-H (グレー)

-W (白)

希望小売価格

200円(税抜)

## ノズル交換について

新しい  
ノズル(先端)



変形(摩耗)した  
ノズル(先端)



- ノズルの先端が変形していたら、  
新しいノズルと取り替えてください
- ノズルの変形がなくても衛生上、  
半年を目安に取り替えてください



## 定格・仕様

定 格 電 圧	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	約16 W(バブル水流モード使用時)
脈 動 数	約1 600回/分
水 圧	約98 kPa ~ 580 kPa
定 格 時 間	10分
タンク容量	約600 mL (強さ「5」使用時約1分50秒使用可能)
大 き さ	高さ265×幅174×奥行84 mm (ノズル含む) 高さ185×幅174×奥行84 mm (ノズル含まず)
ホースの長さ	約100 cm
質 量	約800 g

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.14)でご確認のあと、直らないときは、  
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ジェットウォッシャー ドルツ

●品 番 EW-DJ61

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、ノズルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このジェットウォッシャー ドルツの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

## ■各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
東北地区	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
中部地区	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42
近畿地区	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
四国地区	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
九州地区	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
沖縄地区	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0514

保証とアフターサービス

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスはWEB限定のサービスです。

## ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は

<b>パナソニック 総合お客様 サポートサイト</b>	<a href="http://www.panasonic.com/jp/support/">http://www.panasonic.com/jp/support/</a>
<b>パナソニック お客様相談 センター</b> 365日 受付9時～20時	<p>パナは 365日 電話 フリーダイヤル <b>0120-878-365</b> ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</p> <p>音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)</p> <p>■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル <b>06-6907-1187</b> <b>0120-878-236</b> Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</p>

### ●修理に関するご相談は

<b>パナソニック 修理サービスサイト</b>	<a href="http://club.panasonic.jp/repair/">http://club.panasonic.jp/repair/</a> インターネットでのご依頼も可能です。
<b>パナソニック 修理ご相談窓口</b>	<p>パナは イイヨ 電話 フリーダイヤル <b>0120-878-554</b> ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</p> <p>・上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。</p>

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1213

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

## パナソニック株式会社 ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2014

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。  
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)  
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

**Panasonic**

持込修理

## ジェットウォッシャー ドルツ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-DJ61		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b> (ただし、消耗品は除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 <b>見 本</b> 様 お名前 電 話 (            ) -		
※ 販売店	住所・販売店名  電 話 (            ) -		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。