

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
保証期間はご購入日より1年間です。
但し、一般家庭用以外にお使いのときは、保証期間は3か月にさせていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのナショナルアーバンの補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の14頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は
お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(出来るだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。


保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

別売品のご紹介


座面の汚れを防ぎ、洗える
座カバー

- EP0800-CZ(ベージュ調)トリコット(パイル)
標準価格 5,000円(税別)

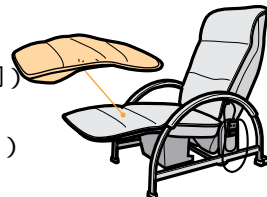


インテリアに合わせて選べる
カバーセット(背クッション、ひじカバー、座カバー)

- EP0801-YZ(カナリアイエロー調)平織(ワッフル調)
- EP0801-A(インディゴブルー調)平織(デニム調)
- EP0801-H(グレー)トリコット
- EP0801-GZ(フォレストグリーン柄)トリコット(ヘリンボン調)
標準価格 各色とも15,000円(税別)

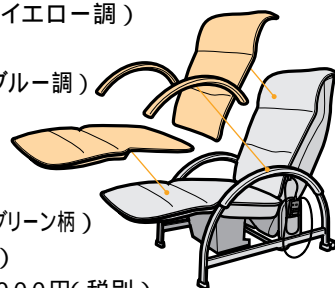


パイプを隠し、ソフトな雰囲気でお部屋にもフィットさせる
サイドカバー

- EP0803-CZ(ベージュ調)トリコット(パイル)
標準価格 11,000円(税別)

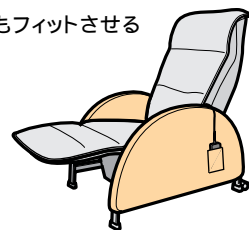


TV視聴時などより深くリラックスできる
枕

- EP0802-CZ(ベージュ調)トリコット(パイル)
- EP0802-YZ(カナリアイエロー調)平織(ワッフル調)
- EP0802-A(インディゴブルー調)平織(デニム調)
- EP0802-H(グレー)トリコット
- EP0802-GZ(フォレストグリーン柄)トリコット(ヘリンボン調)
標準価格 各色とも3,000円(税別)

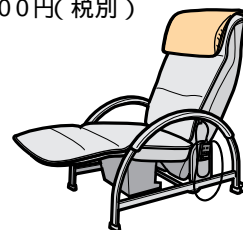


床のキズや痛みを防止する
ラグマット

- EP0806-C(ベージュ調)ループ
標準価格 5,000円(税別)

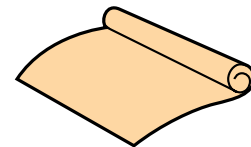

小物を置ける便利な
サイドテーブル

- EP0807-C(ベージュ調)
標準価格 7,000円(税別)

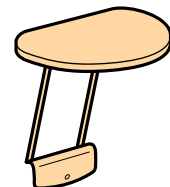

National
松下電工

ナショナル アーバン 取扱説明書

EP1800

保管用

保証書別添

医療用具許可番号
25BZ5002



目次

安全上のご注意	1
各部のはたらき	3
設置する	4
ご使用の前に	5
上半身をマッサージ	7
(おまかせの自動コース)	
上半身をマッサージ	9
(お好み動作で重点的に)	
マッサージが終わったら	11
Q&A	12
こんな異常を感じたら	14
定格・仕様	14
保証とアフターサービス	裏表紙

- ご購入ありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

A&I 快適を科学します



松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- **注意** 人が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例






○記号は、**禁止**の行為を示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告


 必ず守る	医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえ使用する。 (1)心臓に障害のある人(2)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人(3)悪性腫瘍のある人(4)妊娠中や生理中の人(5)背骨に異常のある人や曲がっている人(6)かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人(7)骨粗しょう症の人(8)急性症状のある人(9)安静を必要とする人(10)上記以外に特に身体に異常を感じているとき	事故や体調不良を起こすおそれがあります。
	必ず交流100Vで使用する。	火災や感電の原因になる。
	マッサージ使用中やリクライニング操作、脚のせ台を出し入れするときは必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。	
 禁止	お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせたり、背もたれやひじかけの上に乗ったり座ったりさせない。	事故やけがのおそれがあります。
	布地が破れた状態(内部構造が露出等)では使用しない。すぐに修理を依頼してください。	
	操作器には水などをこぼさない。	感電やショート、発火の原因になります。
	変圧器を用いた使用はしない。	故障や感電の原因になる。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。	火災や感電の原因になります。
 分解禁止	電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。	感電やショート、発火の原因になります。
	絶対に分解したり、修理・改造は行わない。	発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。

注意


 禁止	自分で意思表示ができない人に使わせない。 また、身体の不自由な方だけの使用はさせない。	事故やけがのおそれがあります。
	素肌では使用しない。	けがのおそれがあります。
	頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しない。 また、もみ玉部に手や足をはさまない。	けがのおそれがあります。 (首筋などには、柔らかいタオル等をあててご使用ください)
	電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させない。	感電やショート・発火のおそれがあります。
	浴室などの湿気の多い場所で使わない。	感電及び故障の原因になります。
	脚のせ台に座ったり、立ち上がったりしない。	事故やけがのおそれがあります。
	背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れない。	けがのおそれがあります。
	頭部に髪かざりなどの固いものをつけて使用しない。	
	脚のせ台の裏側(下側)に手や頭などを入れない。	
	マッサージ使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。	
 必ず守る	人を乗せたまま移動しない。	転倒のおそれがあります。
	もみ玉の位置を確認してから、ゆっくり座る。	事故やけがのおそれがあります。
	マッサージは1回15分以内に。 また同一カ所への使用は5分以内にします。	長時間の連続使用は逆効果やけがのおそれがあります。
	使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。	事故や体調不良を起こすおそれがあります。
	水平な場所で使用する。	本体が倒れて事故のおそれがあります。
	使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠スイッチを「閉」にする。	子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
	電源プラグは確実に最後まで差し込む。	ショートや発火のおそれがあります。
 アース線接続	はじめは弱い刺激でマッサージする。	けがのおそれがあります。
	アースを確実に取り付ける。	故障や漏電のときに感電のおそれがあります。(アースの取り付けはP4参照)
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差ししない。	感電ややけどのおそれがあります。
 電源プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。	絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。	感電やショート・発火のおそれがあります。
	動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。	感電や発火のおそれがあります。
	停電のときは直ちに電源プラグを抜く。	復帰したとき、事故やけがのおそれがあります。

各部のはたらき

本体

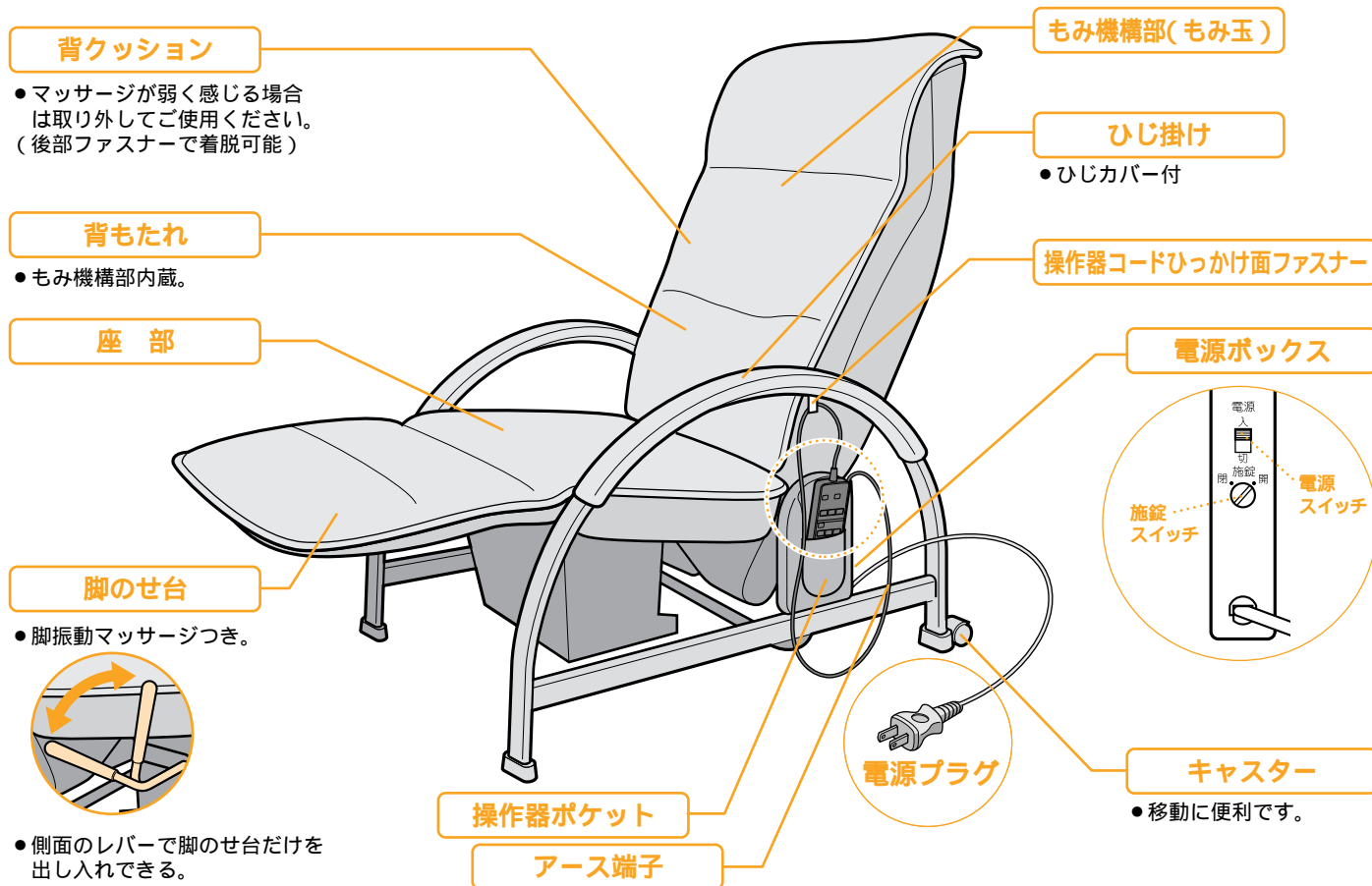

操作器

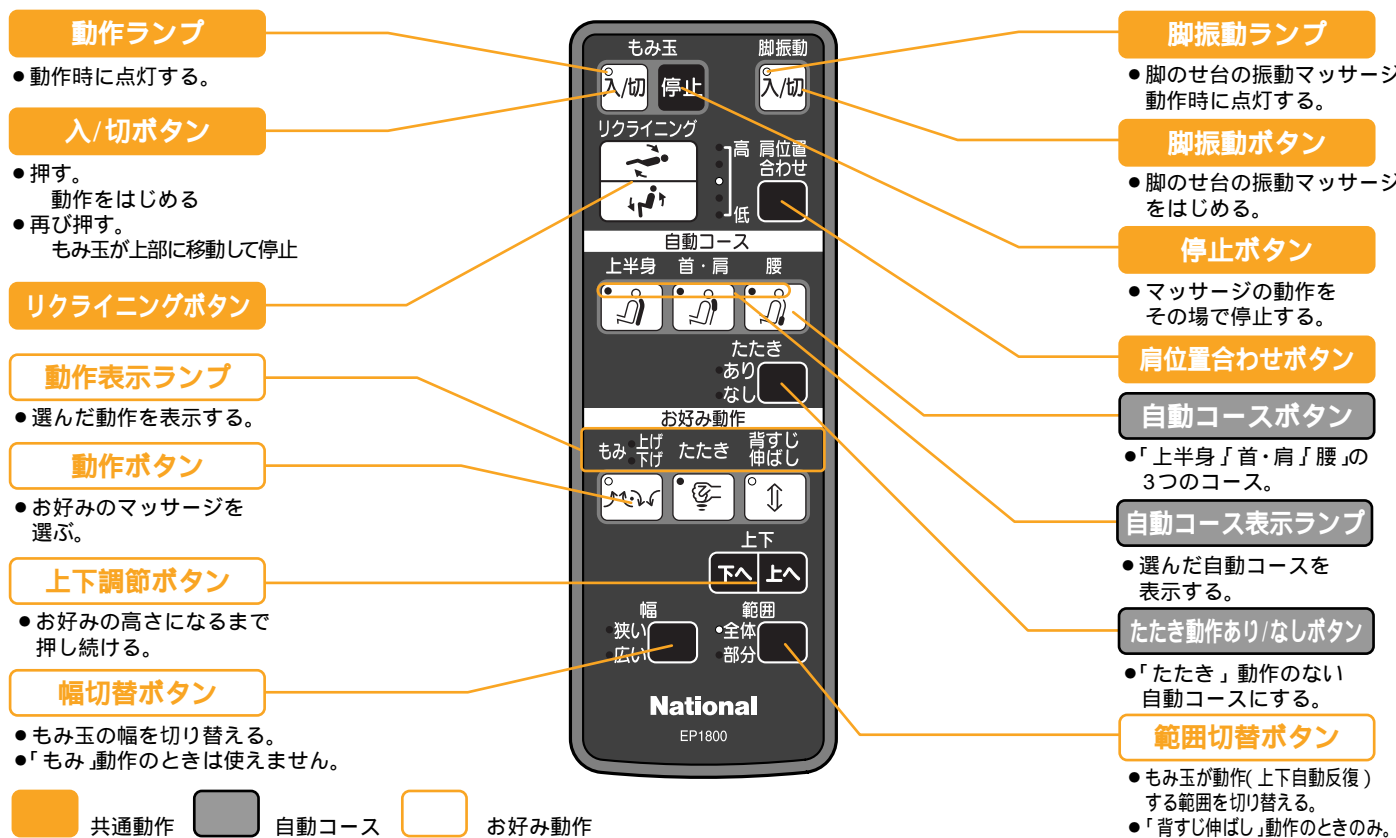


設置する

設置場所について

次のことに気を付ける

- 浴室など湿気の多い場所はさけてください。
- 直射日光が毎日長時間当たる所、ストーブの近くなど直接高温になる所はさけてください。
- 必ず水平な場所に設置してください。傾いた状態でご使用になると騒音や故障の原因になります。
- 畳・床をキズつけるおそれがありますのでマット等を敷くことをおすすめします。また、マット等を敷くことによってご使用中の運転音をやわらげます。

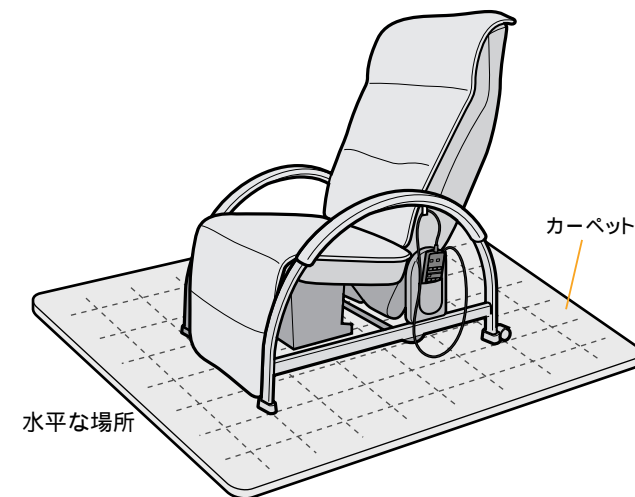


椅子の移動方法

前面を浮かせて移動する


通常時

- 背もたれを後ろに倒すようにして、全面を浮かせます。
- リクライニングしていない状態で移動することをおすすめします。

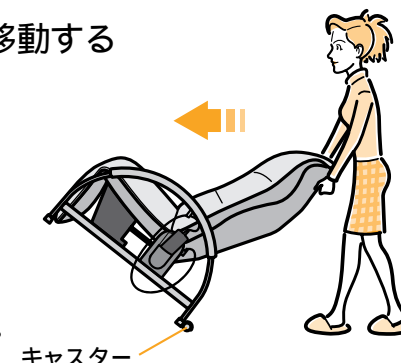

壁際などからの移動時


- ひじ掛けをもって前面を持ち上げます。

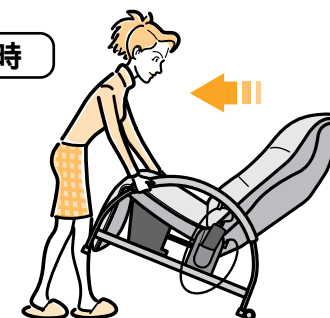

必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。(動作中に移動しない)
人を乗せたまま移動しないでください。
床をキズつけるおそれがありますので、マット等を敷いてゆっくり移動してください。
移動の際は、重量がありますので、ご注意ください。

リクライニングできるスペースのめやす

- 椅子の前方・後方ともに約40cm以上確保してください。(大人が横向きに立てるぐらいのスペース)

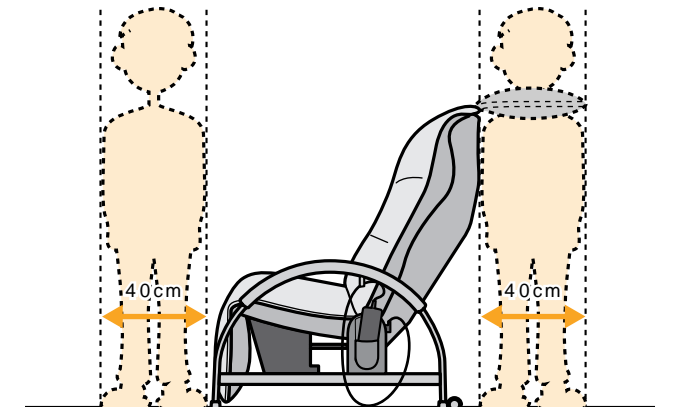

アースの取り付けについて

電源コンセントにアース端子がある場合

- お手持ちのアース線を、アース端子(ねじ)と、電源コンセントのアース端子に取り付けてください。(アース線は付属していません)

電源コンセントにアース端子がない場合


- お買い上げの販売店・電気工事に相談し、アース工事(D種 第三種 接地工事・有料)をしてください。

取り付けてはいけないところ


ガス管.....爆発や引火のおそれがあります。
電話線や避雷針...落雷のとき感電や発火のおそれがあります。
水道管.....途中がプラスチックの場合はアースになりません。

梱包箱から取り出したときのみの設定

商品お届け用の状態(下図)になっているときは、正常なリクライニング動作ができません。必ず以下の操作をしてください。

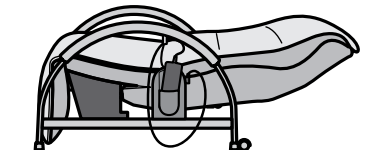

設置する場所を決め、電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込み、下記の初期設定をしてください。
脚のせ台が収納されている状態で、操作器のリクライニングボタン(リクライニング)を押す。
背もたれの動きが完全に止まったら(カチャッと音がしたら)、ボタンから手をはなす。
この操作をする際、脚のせ台は絶対にレバーで出さないでください。故障するおそれがあります。

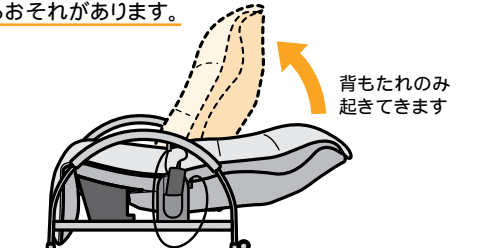

商品お届け用の状態に戻すには同梱の赤紙をご参照ください。

ご使用の前に

安全上のご注意を確認する

⚠ 警告

- 医師の治療を受けているときや下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
(事故や体調不良を起こすおそれがあります)
(1) 心臓に障害のある人 (2) ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
(3) 悪性腫瘍のある人 (4) 妊娠中や生理中の人
(5) 背骨に異常のある人や曲がっている人
(6) かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 (7) 骨粗しょう症の人 (8) 急性症状のある人 (9) 安静を必要とする人 (10) 上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- 脚のせ台を出し入れしたり、リクライニングするときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。
(事故やけがのおそれがあります)


⚠ 注意

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。
また、身体の不自由な方だけの使用は避ける。
(事故やけがのおそれがあります)
- 素肌では使用しない。(けがのおそれがあります)
- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しない。また、もみ玉部に手や足をはさまない。(けがのおそれがあります。首筋などには、柔らかいタオル等をあててご使用ください)
- 出した脚のせ台に座ったり立ち上がったたりしない。
- 頭部に髪ざりなどの固いものをつけて使用しない。
(けがのおそれがあります)
- 脚のせ台の裏側(下側)に手や頭などを入れない。
- マッサージ使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。
- もみ玉の位置を確認してから、ゆっくり座る。
(事故やけがのおそれがあります)
- マッサージは1回15分以内に。また同一カ所への使用は5分以内にする。
- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
(事故や体調不良を起こすおそれがあります)
- はじめは弱い刺激でマッサージする。
(けがのおそれがあります)

電源を入れ、周囲を確認してから座る


1. 周囲を確認する。

- 椅子の後ろや、脚のせ台の前に人やペットがいないか。また、物が置いてあったりしないかを確認します。
- リクライニングできるスペースを確保(P4 参照)したか確認します。

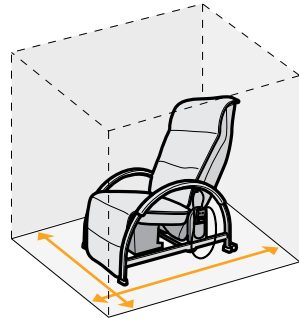


2. 電源を入れる。

- ① プラグを差し込む。(AC100V のコンセント)
- ② 施錠スイッチを、お手持ちのメダル形状のもので「開」にする。
- ③ 電源スイッチを「入」にする。
お買い上げ時は「開」「入」になっています。

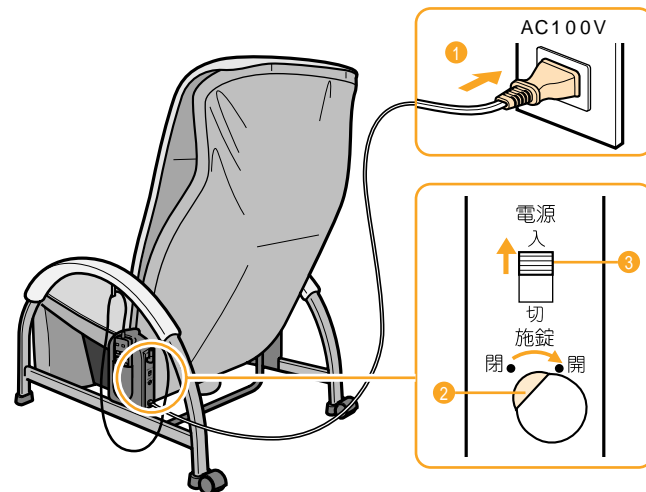

3. もみ玉の位置を手で確認してから ゆっくりと椅子の中央に座る。

- もみ玉は通常、背もたれの上部で左右に広がって、体にあたりづらい状態になっています。(収納状態)
- 上記以外の場所でもみ玉が突出している場合は、すぐに座らずに、操作器の「入/切」を2回押して、もみ玉を収納状態にしてから座ってください。

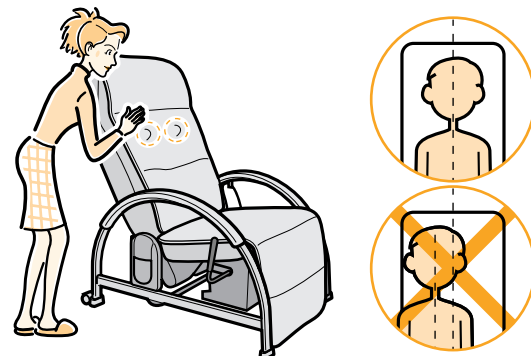


椅子を調節する

リクライニング

電動リクライニングの動きかた

背もたれの動きに合わせ、脚のせ台も自動的に動きます。

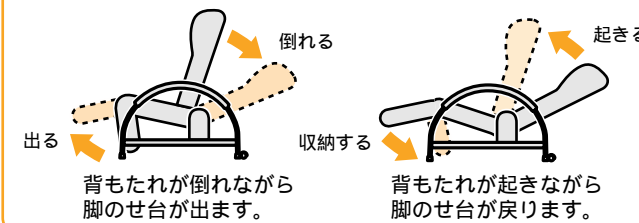

倒すとき

お好みの角度になるまで



を押す続ける。

起こすとき

お好みの角度になるまで



を押す続ける。



- リクライニングするときは、壁までの障害物やお子様にご注意ください。

脚のせ台の出し入れ

背もたれの動きに合わせ、脚のせ台も自動的に動きますが、側面のレバーで脚のせ台だけを、出し入れすることができます。


出すとき

レバーを後方に倒す

収納するとき

レバーを引き上げる

- 必ず最後まで (ロックがかかるまで) 倒してください。
- レバーで出し入れするときは、脚をうかせ気味にして操作してください。

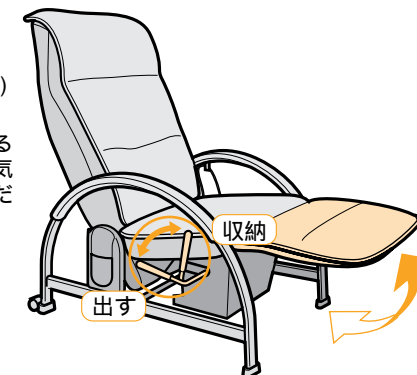

脚のマッサージ

- 脚振動だけの使用もできます。



押す

- 脚振動ランプ点灯
- 約30分で自動的に停止します。

止めたいときは

再度「入/切」を押す

上半身のマッサージをはじめる




自動コースでマッサージ P7へ

- 背すじ伸ばし・もみ・たたきを効果的にプログラムしており、約15分間自動的にマッサージします。

お好み動作でマッサージ P9へ

- こっている部分をお好みの動作で重点的にマッサージでき、約15分間で自動的に停止します。


マッサージに慣れたら(弱く感じるときは)
背クッションをはね上げて
後ろに回しておく。

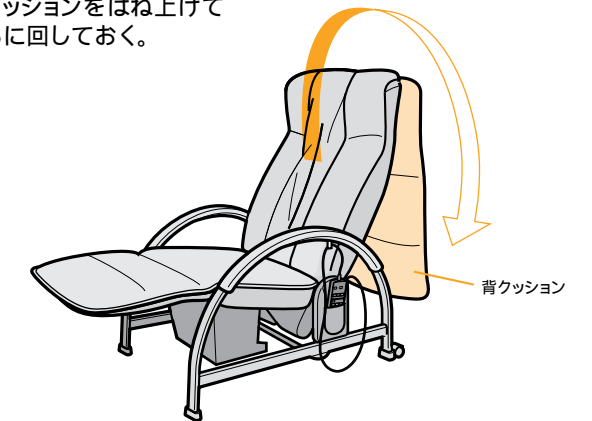

マッサージをするときのご注意

- 使いはじめのうちは、弱い刺激でご使用ください。
(マッサージに慣れるまでは背クッションをはずしたり、リクライニングを深く倒したりしないでください)
いきなり、強い刺激でマッサージすると、けがのおそれがあります。特に高齢者や、骨が弱いと思われる方は、注意してご使用ください。
- ご使用中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉の動きが止まるときがあります。そのときは体を浮かし気味にしてご使用ください。
万一操作器の表示ランプがすべて点滅してもみ玉の動きが停止した場合、操作器ポケットの横にある電源スイッチを一度切り、数秒後に再度「入」にしてから操作器の入/切ボタンを押してください。(特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください)

上半身をマッサージ (おまかせの自動コース)

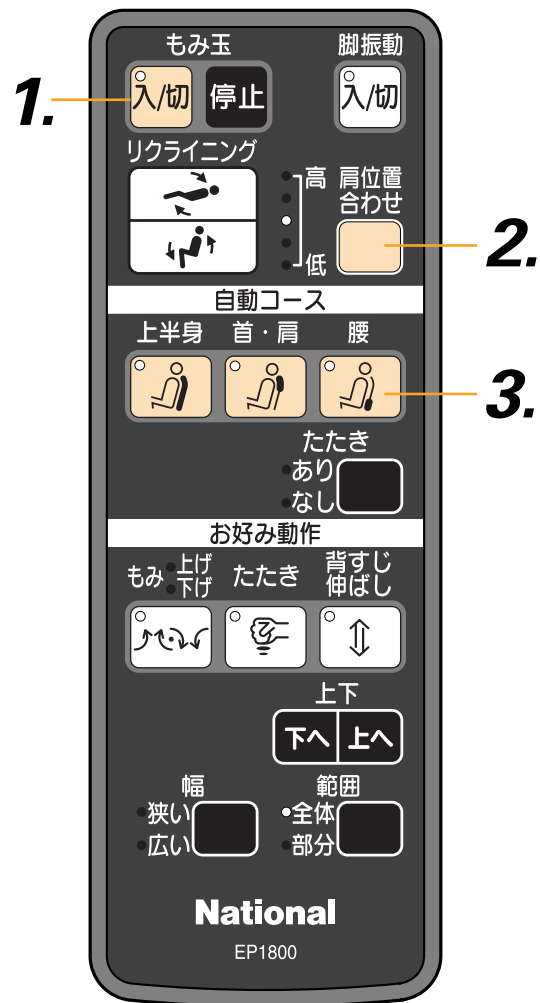

1. 入/切 押す

- 動作ランプが点灯します。
- 自動コース表示ランプが点滅します。
- 肩位置で「もみ下げ」動作をはじめます。「もみ下げ」動作中に、肩位置を合わせてください。(約20秒間)

約15分後、もみ玉が上部に移動して停止します。

2. 肩位置を合わせる


- 自動コースの表示ランプが点滅中に自分の肩の位置に合うように5段階(上下約10cm)の範囲内で合わせます。



- マッサージ途中でも肩位置合わせの変更ができます。
- マッサージ中にリクライニング調節をしたときや、座る位置を変えたときは肩位置がずれますので、再度肩位置を調節してください。

ワンポイント

- もみ玉が肩(首のつけ根)に当たるように手で触れながらご確認ください。

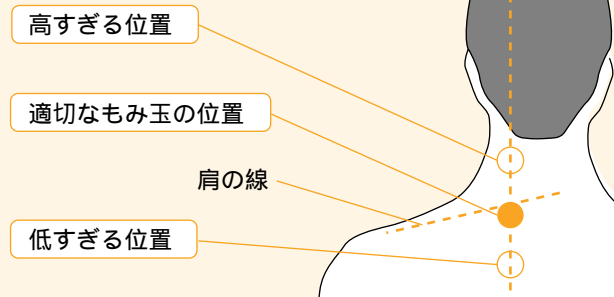

- 上下約10cmの範囲で調節できます。
- 肩位置が合わないときは、体をずらして調節してください。

3. 自動コースボタンを押す

- お好みの自動コースボタンを押す。



- 選んだコースのランプが点灯します。
- 途中で別のコースのボタンを押すと変更できます。


- 押さない場合は、上半身コースを開始します。

コースの大まかな内容




上半身コース

首・肩・背すじ・腰をまんべんなくマッサージします

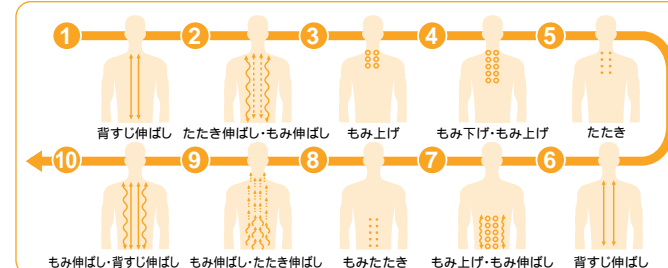


首・肩コース

首・肩を重点的にマッサージします(背・腰も若干マッサージします)

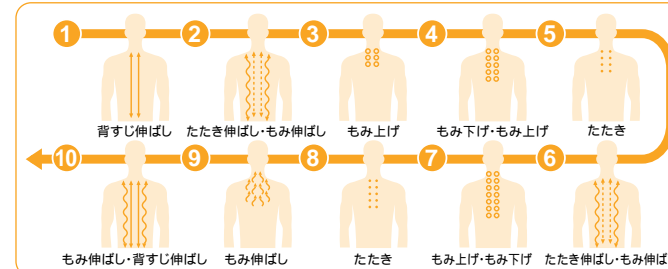

腰コース


腰を重点的にマッサージします(首・肩も若干マッサージします)

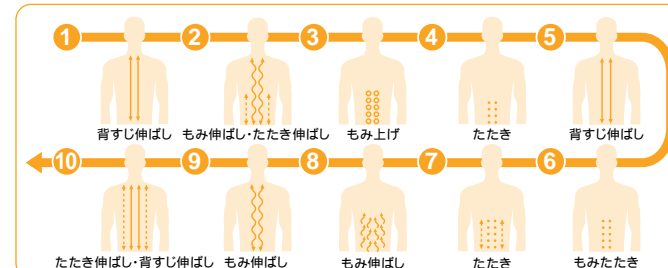

4. 入/切 を押してマッサージを

開始してから約15分後、
コース内容が終了。

- 自動的にもみ玉が上部に移動して停止します。(収納状態)
- 移動中は、動作ランプが点滅し、停止後消灯。
- マッサージが終わったら(P11)を参照してください。
- 再度動かす場合は、入/切 を押してください。

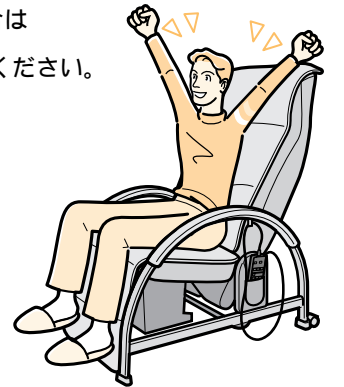

たたきのないマッサージにしたいとき



たたき
○あり
○なし **押す**

- コース中のたたき動作をぬきたいときに押す。(たたき動作がもみ動作にかわります。)再度押すと解除されます。

マッサージを途中でやめたいとき



再度 **入/切** 押す

- 動作ランプが点滅し、もみ玉が上部に移動した後、停止します。

急いで止めたいとき



停止 押す

- 全ての動作がその場で停止します。
- もみ玉が収納状態(上部で停止)にならず、座り心地をそこなうおそれがあります。収納状態にするためには、入/切 を2回押してください。(P5)

情報

使いすぎ防止タイマー(内蔵)

- 操作器の入/切 ボタンを押すと使いすぎを防ぐためのタイマーが作動します。
- 約15分でタイマーが切れ、もみ玉が上部に移動して収納状態で止まり、操作器の各ランプが消えます。
- 再度ご使用のときは、入/切 ボタンを押してください。15分使用した後は10分程休みましょう。




約15分で「切」




マッサージが終わったら

椅子を元に戻す

1. 脚のせ台の下に子供やペットがいないか障害物等がないか確認する。

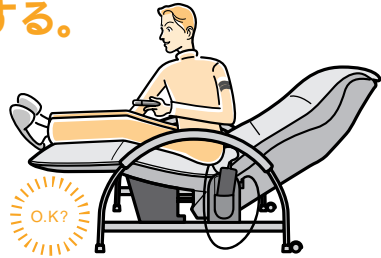


2. 背もたれと脚のせ台を元の位置に戻す。

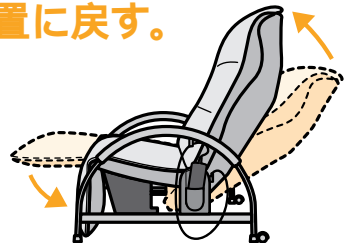


脚のせ台をレバーで上げているときは、必ずレバーで戻す。

3. 操作器を操作器ポケットに収納する。

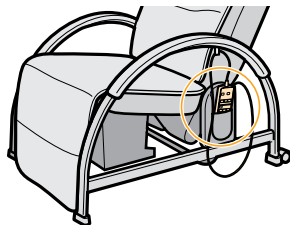


4. 背クッションを元の位置に戻す。

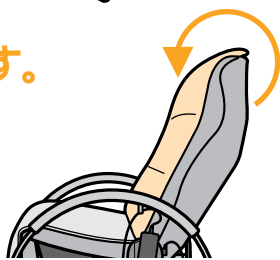


5. 電源を切る。

マッサージ使用中(動作中)に電源を切らないでください。

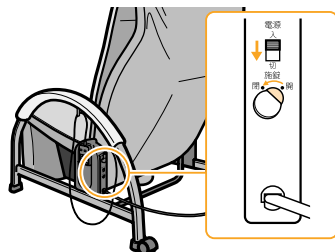

6. 電源プラグを抜く。

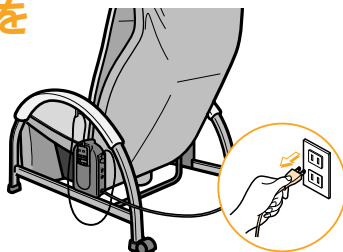

お手入れのしかた

背クッション・ひじカバー

家庭で洗濯される場合は、次の手順でおこなってください。
背クッション、ひじカバーをはずす。(下図参照)
手洗いまたは洗濯機の場合は弱い水流(手洗いコース、ソフトコースなど)で洗う。
軽く脱水する。(脱水機の場合は短時間で)
形を整えてから、日陰に干す。
お手入れ後は、完全に乾燥させてからお使いください。


背クッションのはずしかた

椅子上部のファスナーをはずす。



ひじカバーのはずしかた

ひじ裏(下)側のファスナーをはずす。

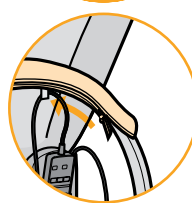

取り付けは上記と逆の手順でおこなってください。
(ひじカバーは、操作器コードひっかけ用の面ファスナー付が左側)

本体の布地部分


石ケン液でブラシ洗浄する。



水を含ませた布でふきとる。



自然乾燥させる。

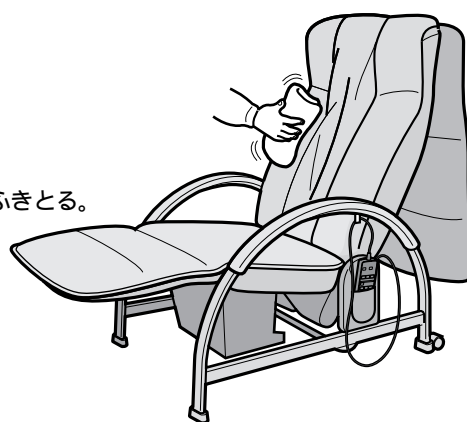

パイププラスチック部

石ケン液を含ませた布をよく絞ってからふく。



仕上げに水を含ませた布をよく絞ってからふく。

Q&A (より上手にお使いいただくために)


- Q マッサージの種類によって、動きにどんな違いがあるの?

- A 大きく分けて「もみ」「たたき」「もみたたき」「背すじ伸ばし」の動きは、こうなります。


もみ(もみ上げ、もみ下げ)

「グイッ」と押し、「クッ」と締め「スッ」と引きます。
また、微妙なリズムの変化によって、コリのポイントをしっかりとみほぐします。
首は「もみ上げ」、肩は「もみ下げ」、背～腰は「もみ上げ」がおすすです。

プロのマッサージ曲線

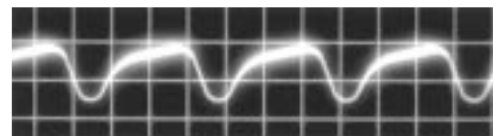

アーバンのマッサージ曲線

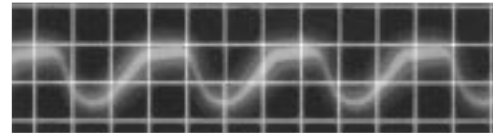

たたき


「トントン」とこぶしのような感覚で、心地よくコリや疲れをほぐします。お好み動作なら、強さの調節ができる他、幅の調節もできます。また、背すじ伸ばしとたたきを組み合わせた「たたき背すじ伸ばし」も選ぶことができます。

もみたたき

「グイッ」とくるもみ味と、「トントン」と心地よいこぶし感覚のたたきを、バランスよく折り混ぜた飽きのこないマッサージです。

背すじ伸ばし

もみ玉がローラーとなり、背すじを自動上下してコリの部分を連続してマッサージするとともに、背すじをグイッと伸ばし、背すじの緊張をやわらげます。
お好み動作なら上下12cmの範囲で自動上下する「部分背すじ伸ばし」も可能です。

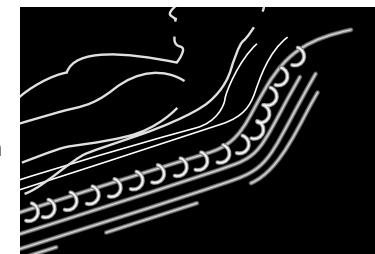

- もみ背すじ伸ばし
もみながら首から腰まで、または好きな場所で自動上下します。
- たたき背すじ伸ばし
たたきながら首から腰まで、または好きな場所で自動上下します。
- もみたたき背すじ伸ばし
もむようにたたきながら首から腰まで、または好きな場所で自動上下します。

- Q マッサージ中に自動コースとお好み動作を切り替えてもだいじょうぶ?

- A だいじょうぶです。

ただし、入切ボタンを押してから約15分でタイマーが切れるためお好み動作から自動コースに切替えた場合、コースの途中で終了してしまうことがあります。


- Q 上手にマッサージするにはどうすればよいの?

- A 次の手順でマッサージしてください。

効率的に筋肉をほぐし血行を促進するために、下記の手順がよいといわれています。

上手なマッサージの手順


- ① 体をなじませるため、はじめは「背すじ伸ばし」
- ② 次にコリの部分を中心に周辺をもみやたたきでマッサージ

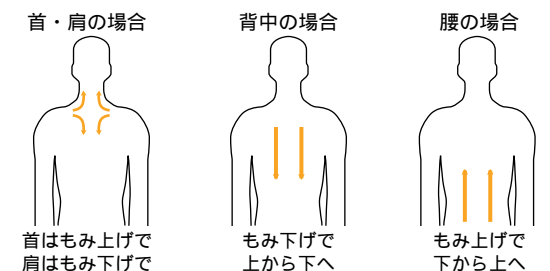

- ③ 仕上げには「背すじ伸ばし」で、もみほぐした後の筋肉の緊張をやわらげます
(自動コースは上の手順に従ってプログラムしてあります。)

また、次のような範囲でもみ玉が動作しますので、身長やこっている部分に合わせて調節してください。

マッサージの出来る範囲

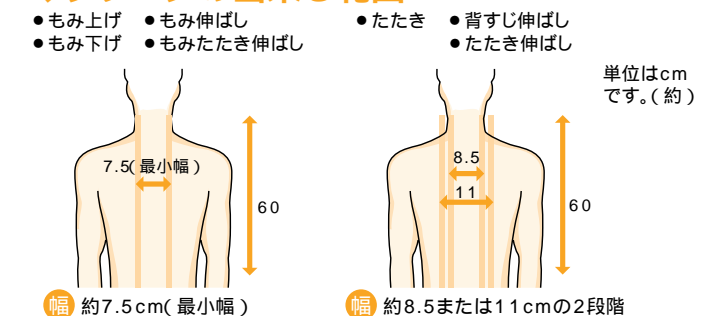

- Q より強くマッサージする方法はありますか?

- A 次のことを試してください。

- ① 背クッションを椅子のうしろにはね上げておく。
- ② 背もたれを倒す。(もみ玉に自分の体重が、より深く、強くかかるようになります)
- ③ 深く腰かけ、背中をしっかりと背もたれに密着させる。


弱くしたいときは、毛布やクッション等を背もたれにかけて調節してください。

Q&A (より上手にお使いいただくために)

Q もみ玉は左右で、もむ強さが異なるの？

A 異なって感じる場合があります。


- より自然な感覚でマッサージを行なうために交互たたき機構を採用している関係で、構造上やむおえずもみ玉の位置がずれて動作することがあります。そのため左右で強さが異なって感じる場合がありますが、故障ではありません。ご了承ください。

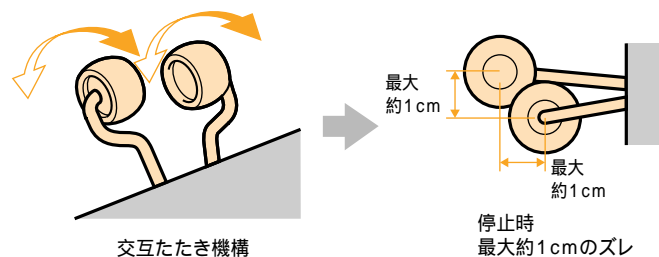

Q フットマッサージャー(別売)などは、同時に使ってもいいの？

A 同時に使ってもだいじょうぶです。


- 脚振動マッサージだけでは刺激がもの足りない方や、足うらのマッサージがしたいときに利用ください。

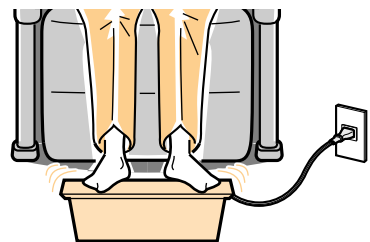

Q 楽な姿勢でくつろぐためには？

A 背もたれをお好みの角度に調整してください。


- 背もたれは、約123°～175°の範囲で無段階で調整できます。操作器のリクライニングボタンでお好みの角度に合わせてください。(P6)
- また、脚も背もたれと連動して同時に動きますので、とても便利です。

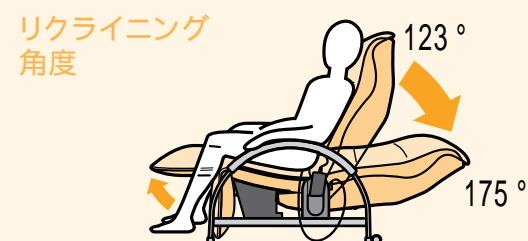

Q 脚だけなげ出せるの？

A 椅子右側のレバーで脚のせ台のみ出すことができます。


- レバーで出した脚のせ台は、ロックがかかっているため、リクライニングでもどすことはできません。必ずレバーでもどしてください。
- また、電動でリクライニングする場合も、レバーは自動的に動きますのでご注意ください。

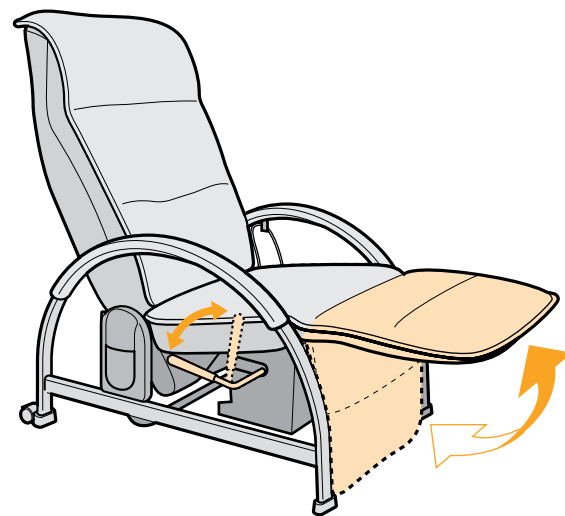

Q ホットカーペットを椅子の下に敷いてもいいですか？

A 火災のおそれがあるので、おやめください。

- ホットカーペットの発熱体を傷め、そこから火災になるおそれがあります。

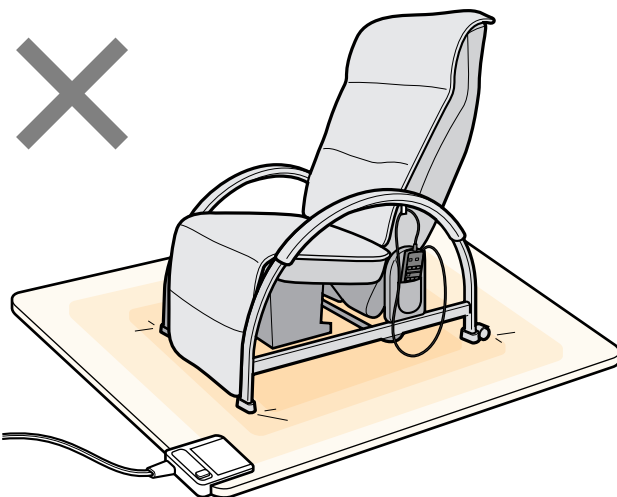

Q 別の病気で通院してるけど、使ってもだいじょうぶ？

A 通院先の医師と相談のうえ、使用してください。

- マッサージは「触圧刺激」といって、筋肉に圧力をかけてほぐし、血行を促進する行為です。病気によっては、悪化を招く可能性もありますので、必ず医師に相談してください。(P1～P2の安全上のご注意をご覧ください。)

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因
動作時の音 <ul style="list-style-type: none"> たたき動作時の動作音 (上部では音が大きくなります) 上下動作時のカタカタ音 もみ動作時のもみ玉と布のすれる音(キュッキュッ音) 歯車のジージー音 もみ玉(押し)から(引き)に変わる際の音(カクン音) 	構造上やむをえず発生するもので機能等に影響ありません
もみ玉が途中で止まる	▶ もみ玉が上下するとき、壁や障害物に当たっている P5参照 ▶ もみ玉に無理な力がかかっている ▶ 体を浮かせ気味にしてみる
もみ玉の位置が肩まで来ない	▶ 肩位置合わせボタンが設定されていない P7参照
左右のもみ玉の高さが異なる (左右の強さが異なる)	交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません 
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが抜けている 椅子の電源スイッチが「切」になっている 操作器の入切ボタンを押していない タイマーが働き、停止した状態になっている P5参照 P7参照 P7参照 コードが断線している
破損してしまった	
電源コード、プラグが異常に熱い	

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●
この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

⚠ 警告

●絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作しけがをするおそれがあります。

定格・仕様

使用電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	150W
型式認可番号	▽91-56780
医療器具許可番号	25BZ5002
もみ速さ	50Hz...約23回/分 60Hz...約28回/分
もみ幅	肩腰部...約7.5cm
たたき速さ	50Hz...約430回/分(片側) 60Hz...約500回/分(片側)
上下移動速さ	50Hz...約4.4秒で1往復 60Hz...約3.7秒で1往復

背すじ伸ばし幅	約8.5または約11cm
たたき幅	約12cmの範囲で自動反復
背すじ伸ばし	約60cm
もみ玉上下移動範囲	約60cm
肩位置合わせ	5段階
タイマー	約15分
脚振動	50Hz...約2700回/分 60Hz...約3200回/分 タイマー...約30分

大 き さ	<ul style="list-style-type: none"> リクライニングしていないとき (脚のせ台収納) 高さ105×幅66×奥行95cm リクライニングしたとき (脚のせ台は水平) 高さ52×幅66×奥行160cm
リクライニング角度	約123～175度
質量(重量)	約37kg
付 属 品	背クッション・ひじカバー
張地/布張り	●背・座部 CZ(ベージュ調)ポリエステル...100%