

National
松下電工

保管用

保証書別添

医療用具承認番号
20800BZZ00414000

ナショナル モミモミ
アーバンソフィア

EP573

取扱説明書



松下電工株式会社 ヘルシー商品事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33 TEL(0749)23 - 1511

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

A&I 快適を科学します

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。





いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味は次の通りです。

 絶対に行わないでください。	 絶対に分解・修理・改造はしないでください。
 必ず指示に従い、行ってください。	 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

警告

医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえご使用ください。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

- ①心臓に障害のある人
- ②ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
- ③悪性腫瘍のある人 ④妊娠中や生理中の人
- ⑤背骨に異常のある人や曲がっている人
- ⑥かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- ⑦骨粗しょう症の人 ⑧安静を必要とする人
- ⑨上記以外に特に身体に異常を感じているとき



リクライニングおよびマッサージをするときは本体の周囲に人やペットがいないことを必ず確認してください。

事故やけがを起こす恐れがあります。



お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。
事故やけがを起こす恐れがあります。



布地が破れた状態(内部機構が露出等)では使用しないでください。すぐに修理を依頼してください。
事故やけがを起こす恐れがあります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



注意

使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。



浴室など湿気の多い場所で使わないでください。
感電および故障の原因になります。



マッサージは1回15分以内に。また同一カ所への使用は5分以内にしてください。
長時間の連続使用は逆効果やけがの恐れがあります。



頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しないでください。
また、もみ玉部に手や足をはさまないでください。
けがをする恐れがあります。(首筋などには、柔らかいタオル等をあててご使用ください。)



素肌では使用しないでください。
けがをする恐れがあります。



もみ玉の位置を確認の上、ゆっくり座ってください。
事故やけがの恐れがあります。



自分で意思表示ができない人に使わせないでください。また、身体の不自由な方だけのご使用はお避けください。
事故やけがの恐れがあります。





交流100V以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になります。




各部の名前とはたらき

椅子

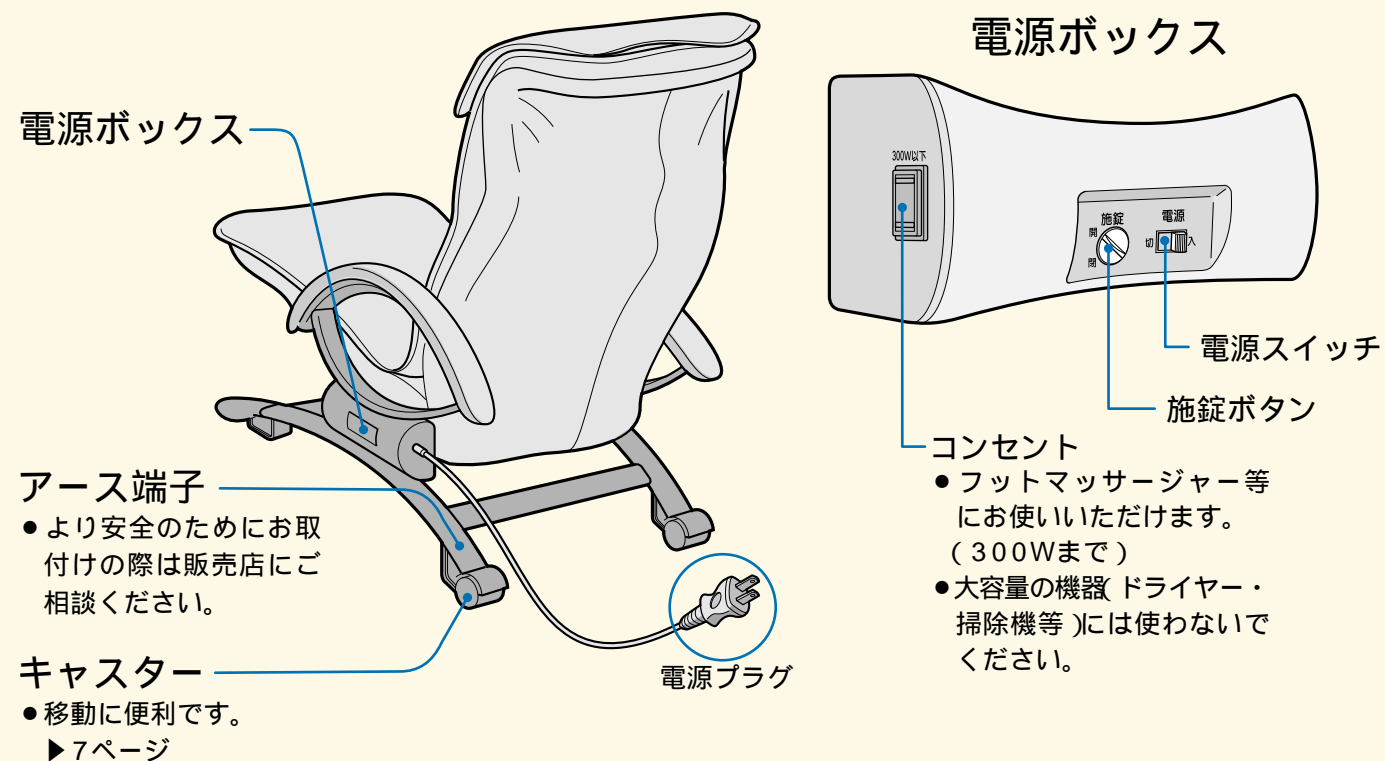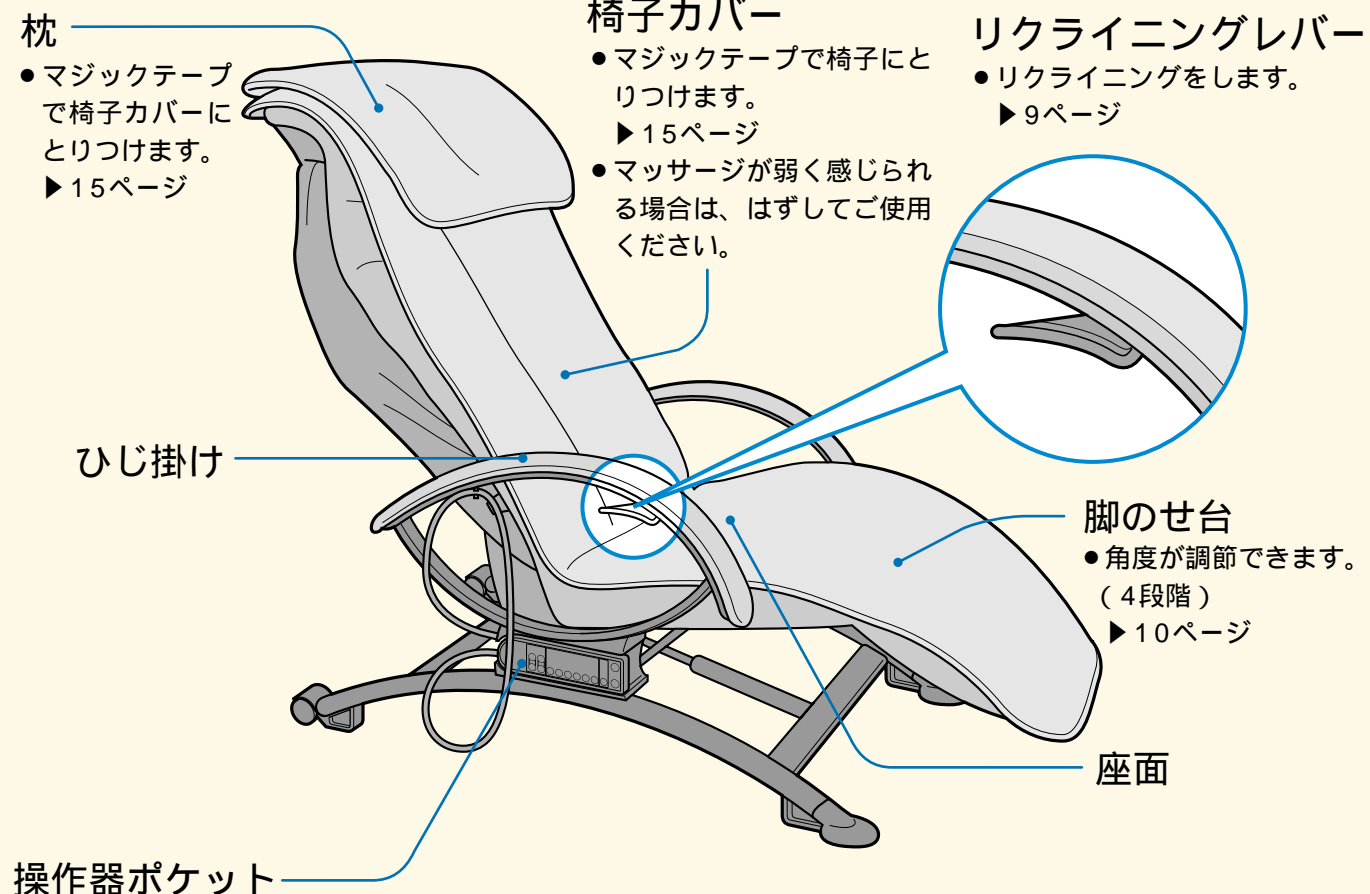

操作器

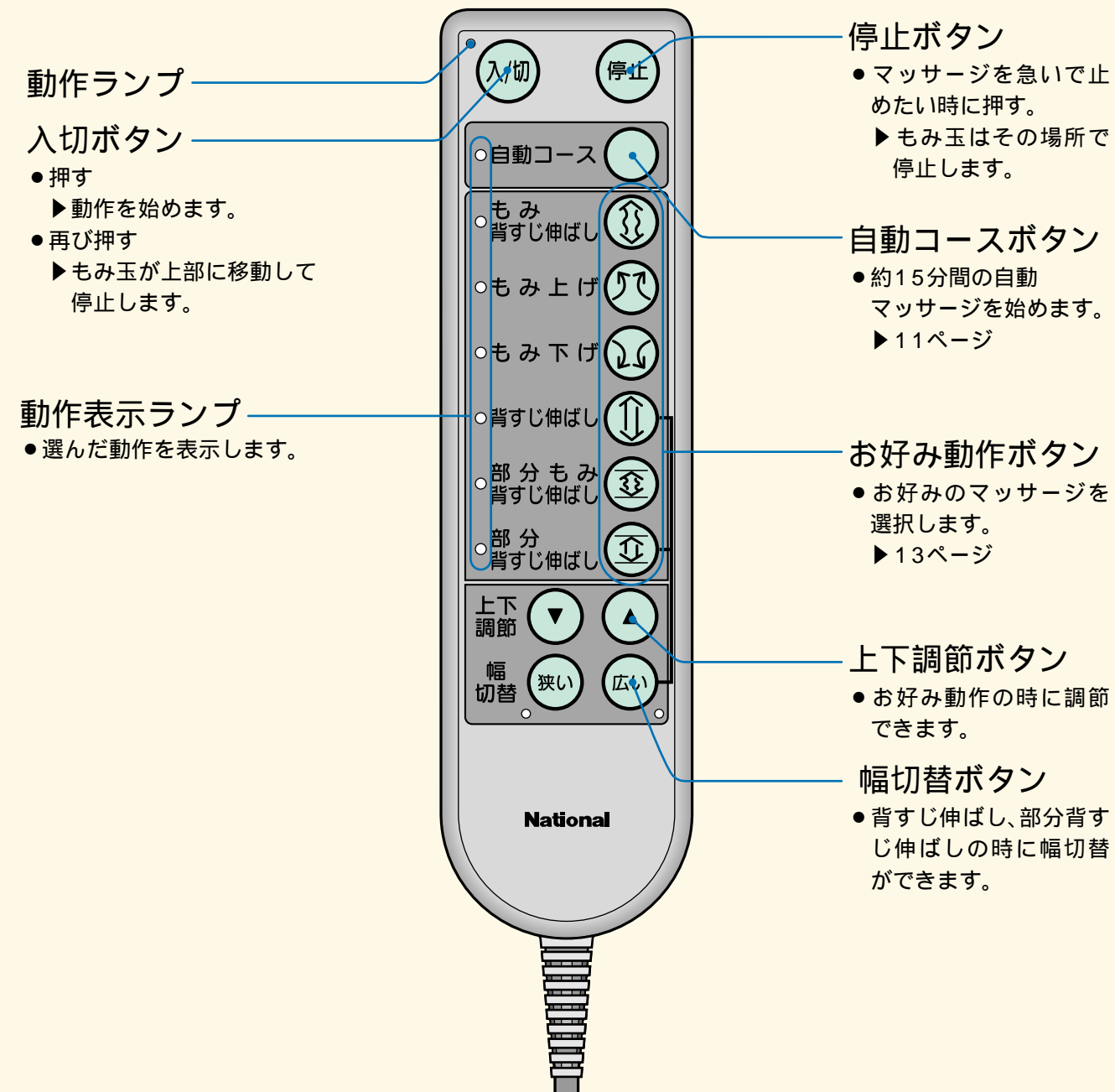

ご使用になる前に


設置のしかた

1 室内でリクライニングができるスペースを確保する。後ろを確認

- 障害物やお子様に注意してください。
- 壁とのスキ間を30cm以上確保してください。
- 電源コード、操作器コードをふまないようにしてください。



2 電源を入れる。 電源プラグをコンセントに差し込む。 施錠ボタンを「開」にする。 電源スイッチを「入」にする。

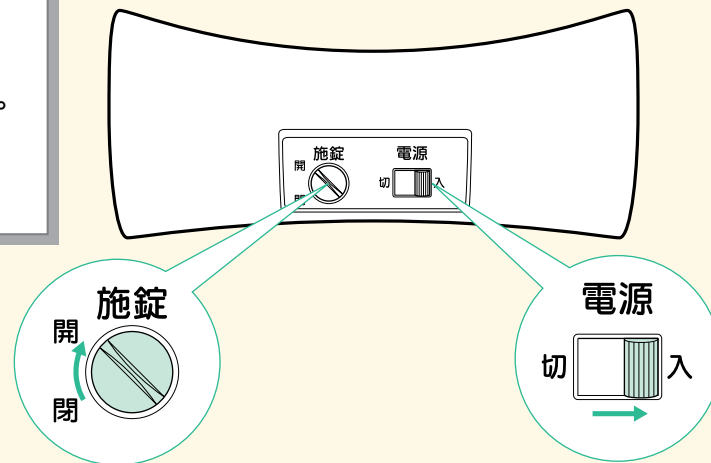

⚠ 注意

- 事故やけがの恐れあり
- もみ玉の位置を確認の上、ゆっくり座る。
- 感電や故障の恐れあり
- 浴室など湿気の多い場所で使わない。
- 火災や感電の恐れあり
- 交流100V以外では使用しない。
 - 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。また重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
- 感電やショート・発火の恐れあり
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
 - 電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させない。
- ショートや発火の恐れあり
- 電源プラグは確実に最後まで差し込む。
- 感電や発火の恐れあり
- 動かない場合や異常を感じたときは、使用を中止し、すぐに電源プラグを抜く。すぐに点検修理を依頼する。

⚠ 警告

- 事故やけがの恐れあり
- 布地が破れた状態(内部機構が露出等)では使用しない。すぐに修理を依頼する。
 - お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせない。

使用場所の注意

- 直射日光が毎日長時間当たる所、ストーブの近く等直接高温になる所はさけてください。布部の変色・変質の恐れがあります。
- 各部に水をかけないでください。
- 床をキズつける恐れがありますのでマット等を敷くことをおすすめします。



移動するとき

- 前面を浮かし、押して移動してください。
- 人をのせたまま移動しないでください。
- 床をキズつけるおそれがありますので、マット等を敷いてゆっくり移動してください。
- 電源コード、操作器コードをふまないようにしてください。
- 脚のせ台を持って移動しないでください。



椅子としての使いかた

リクライニングのしかた


倒すとき

レバーをにぎって

両手でひじ掛けを持ち、体を後方へ倒す

お好みの角度でリクライニングレバーから手を離します。

- 倒れにくい場合はもみ玉を最上部へ移動させてから倒してください。

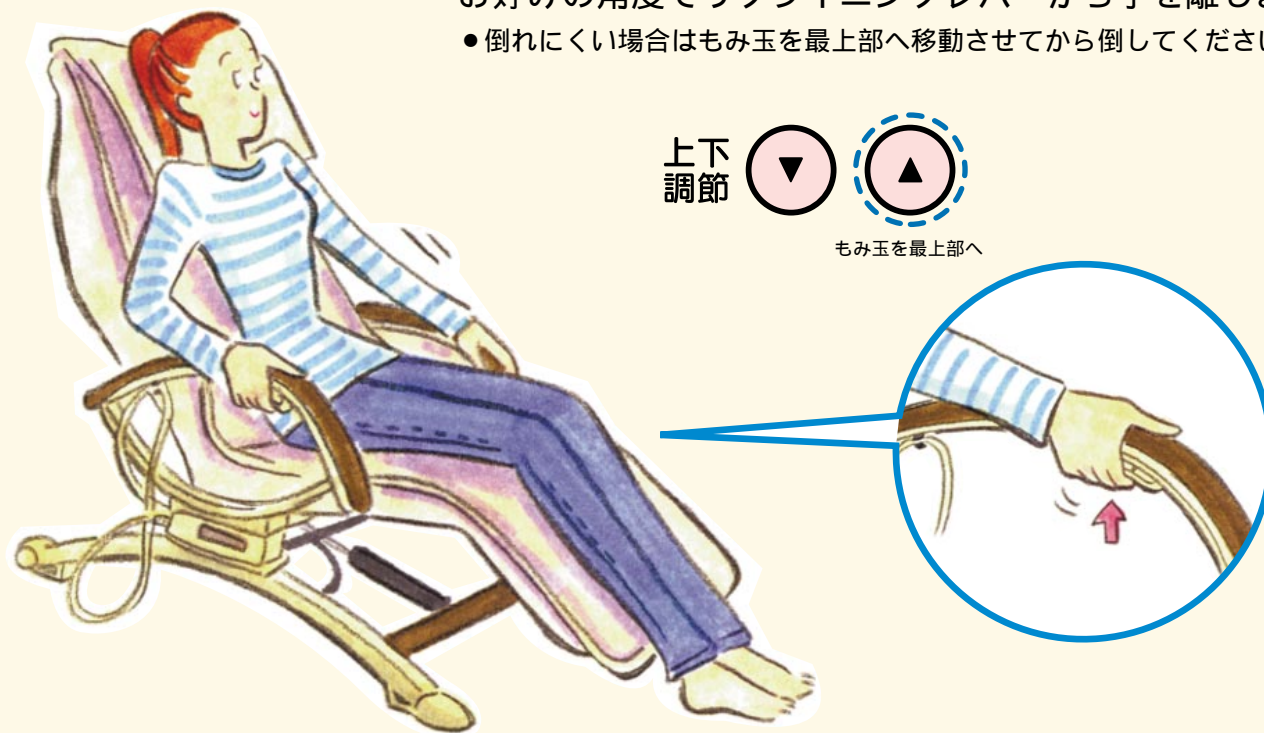


戻すとき

レバーをにぎって

両手でひじ掛けを持ち、起きあがる

- 起きにくい場合はもみ玉を最下部へ移動させてから起きあがってください。

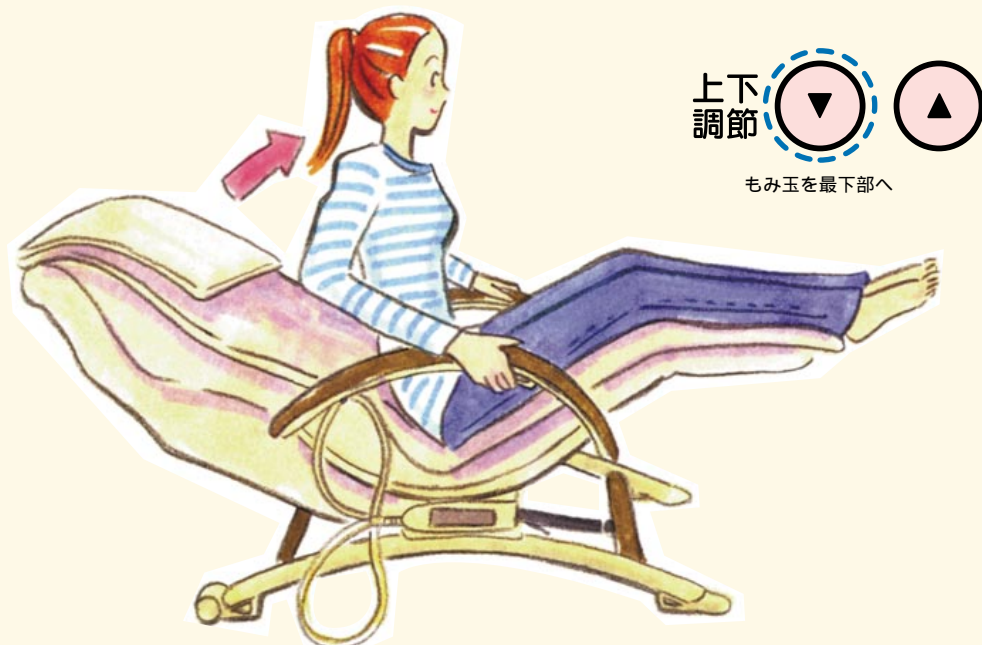

脚のせ台の使いかた

カチャッと音がするまで引き上げる。



水平よりもさらに引き上げると元にもどります。

- 上げすぎたときはもう一度元にもどしてから調節してください。



ハイフットリクライニング

背もたれを最後まで倒すと、足と心臓がほぼ同じ高さになり足の疲れなどに効果的です。



- 脚のせ台は足が水平になる状態でのご使用をおすすめします。

⚠ 警告

事故やけがの恐れあり

- リクライニングおよびマッサージをするときは周囲に人やペットがいないことを必ず確認する。

⚠ 注意

事故やけがの恐れあり


- もみ玉の位置を確認の上、ゆっくり座る。

マッサージをする

自動コースでマッサージ

- 1 入/切を押す**
- 動作ランプが点灯します。
 - 入/切
 - 肩位置で「もみ上げ」動作を始めます。(動作表示ランプ点灯)
 - もみ上げ

- 2 自動コースボタンを押す**
- 動作表示ランプが点灯しプログラムされたマッサージが自動的に始まります。(約15分間)
 - 自動コース
- コース内容終了後、自動的にもみ玉が上部に移動して停止します。
- 再度ご使用のときは操作器の入切ボタンを押してください。

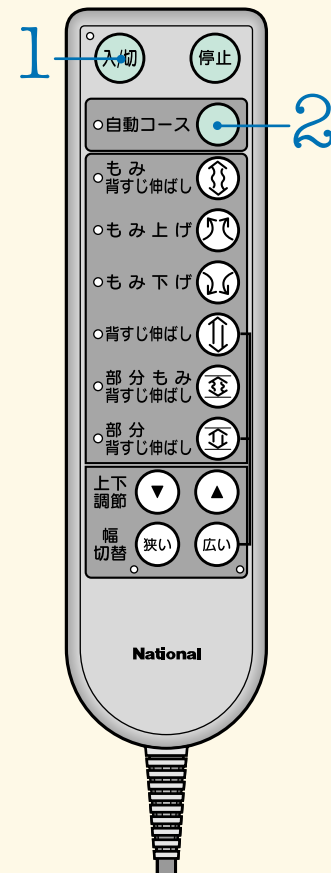

マッサージを途中でやめたいとき

再度 **入/切** を押す

- もみ玉が上部に移動して停止します。

急いで止めたいとき

停止 を押す

- 全ての動作がその場で停止します。
- 再度動かす場合は操作器の入切ボタンを押してください。

警告

事故や体調不良の恐れあり

- 医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえ使用する。
 - ①心臓に障害のある人
 - ②ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
 - ③悪性腫瘍のある人
 - ④妊娠中や生理中の人
 - ⑤背骨に異常のある人や曲がっている人
 - ⑥かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - ⑦骨粗しょう症の人
 - ⑧安静を必要とする人
 - ⑨上記以外に特に身体に異常を感じているとき

事故やけがの恐れあり

- リクライニングおよびマッサージをするときは本体の周囲に人やペットのいないことを必ず確認する。

もみ機構タイマー(内蔵)

- 操作器の入切ボタンを押すと使いすぎを防ぐためのタイマーが作動します。
- 約15分でタイマーが切れ、もみ玉は上部に移動して止まり動作ランプが消えます。
- 再度ご使用のときは、操作器の入切ボタンを押してください。

自動コースの内容

約15分間、首から腰までじっくりもみほぐします。

- 1 背すじ伸ばし・もみ背すじ伸ばし**
 - はじめに背中全体の緊張をときほぐします。
- 2 もみ背すじ伸ばし**
 - 首から肩にかけて再度もみほぐします。
- 3 もみ**
 - 首はもみ上げ、肩はもみ下げでじっくりともんでいきます。
- 4 背すじ伸ばし**
 - 狭い(強め)背すじのばしでしっかりと背すじを伸ばします。
- 5 もみ**
 - 腰を丹念にもみあげます。
- 6 背すじ伸ばし**
 - 腰の筋肉をよく伸ばしてほぐします。
- 7 もみ背すじ伸ばし**
 - マッサージのしあげに腰から首まで少しずつ上方に。
- 8 背すじ伸ばし**
 - 最後にもう一度背すじ全体を伸ばして終了です。

マッサージをする

お好み動作でマッサージ

1 入/切を押す


- 動作ランプが点灯します。
- 「もみ上げ」動作を始めます。(動作表示ランプ点灯)

2 動作を選ぶ

- お好みの動作ボタンを押します。
- 動作ランプで現在の動作をお知らせします。


3 調節する

もみ玉の高さを調節する

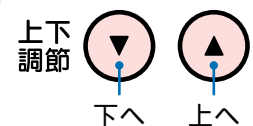


- 押している間もみ玉が移動します。
- 「もみ背すじ伸ばし」背すじ伸ばし」のときは最上位置(最下位置)で自動反転します。

もみ玉の幅を切替える

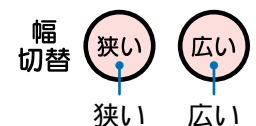

- 背すじ伸ばし、部分背すじ伸ばしのときにのみ切替ができます。
- 狭い・広いの2段階。

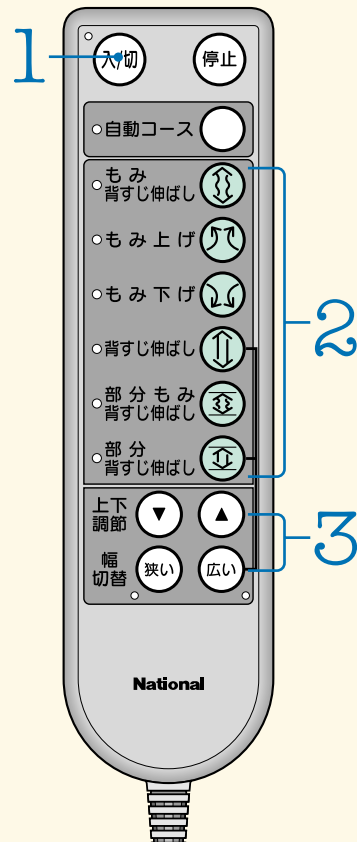

マッサージを途中でやめたいとき

再度 入/切を押す

- もみ玉が上部に移動して停止します。

急いで止めたいとき

停止を押す

- 全ての動作がその場で停止します。

注意

事故やけがの恐れあり

- 自分で意思表示ができない人に使わせない。
- また、身体の不自由な方だけの使用は避ける。

事故や体調不良の恐れあり

- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

けがの恐れあり

- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しない。
- また、もみ玉部に手や足をはさまない。
- (首筋などには、柔らかいタオル等をあてる)

●素肌では使用しない。

逆効果やけがの恐れあり

- マッサージは1回15分以内に。また、同一カ所への使用は5分以内にします。

- ご使用中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉の動きが止まることがあります。そのときは体を浮かし気味にしてご使用ください。
- 万一操作者のランプがすべて点滅してマッサージ機が停止した場合、側面の電源スイッチを一度切り、数秒後に再度「入」にしてから操作者のボタンを押してください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

マッサージ機能について



自動コース.....

もみ背すじ伸ばし...

もみ上げ.....

もみ下げ.....

背すじ伸ばし.....

部分もみ背すじ伸ばし...
部分背すじ伸ばし

- 背もたれを倒すと体の重みが加わってより強いマッサージ効果が得られます。

もみ上げ、もみ下げ、背すじ伸ばし、もみ背すじ伸ばしを効果的に組み合わせ、プログラムしてあります。
約15分間で首から腰までまんべんなくマッサージします。

人間が直立するために疲労する背中の筋肉をじっくりともみほぐしていきます。背中の反り(伸び)の効果も加わって1日の生活で疲れた背筋をリフレッシュします。


筋肉のこりをほぐし血行を促進します。
首すじ腰はもみ上げ、肩はもみ下げで同じ箇所を5~7回、もみ位置を少しずつずらしながらマッサージしますとより効果的です。

背のび(背骨のそり)をしながら背中全体をほぐします。
「もみ」を行う前の体ほぐしに、また「もみ」の後の仕上げに使用されると効果的です。

約12cmの間隔で自動的に上下します。
狭い範囲を集中的にほぐします。


マッサージのできる範囲

もみ上げ
もみ下げ
単位はcm

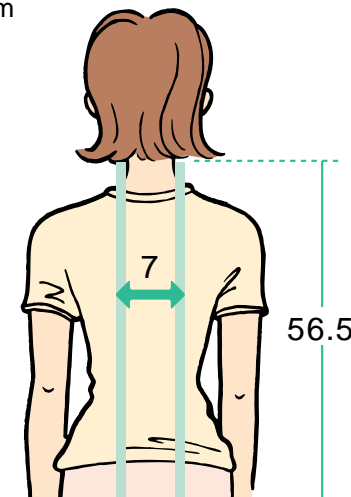

幅調節はできません
●幅は約7cm

背すじ伸ばし
部分 背すじ伸ばし
単位はcm

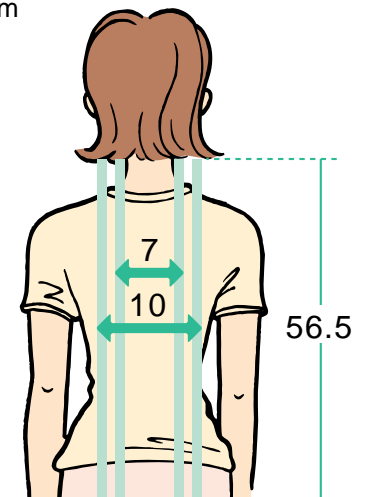

幅調節
●幅は約7cm又は約10cmの2段階

使い終わったら

電源を切る

マッサージ使用時に電源を切らない
●もみ玉が突出したままになる場合があります。



注意

- 事故やけがの恐れあり
- 使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠ボタンを「閉」にする。
- 感電やショート・発火の恐れあり
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。
- 感電や漏電火災の恐れあり
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

お手入れのしかた

布部

- 布地の毛が部分的に倒れて、光沢にムラが出ている場合には、毛の流れ方向に沿ってブラシ等で整えてください。
- 布地の汚れは、石ケン液でブラシ洗浄した後、水を含ませた布でふきとり自然乾燥させてください。

肘部・プラスチック・パイプ部

- 石ケン液を含ませた布をよく絞ってふいてください。

椅子カバー・枕部

- ドライクリーニングまたは手洗い後、形を整えて陰干ししてください。
- アイロンは「中」温でかけてください。



警告

- 発火やけがの恐れあり
- 絶対に分解したり修理・改造は行わない。


注意

- 感電ややけどの恐れあり
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
 - 電源プラグをぬれた手で抜き差ししない。

椅子カバーについて

カバーの付け方

- マジックテープで止めてください。

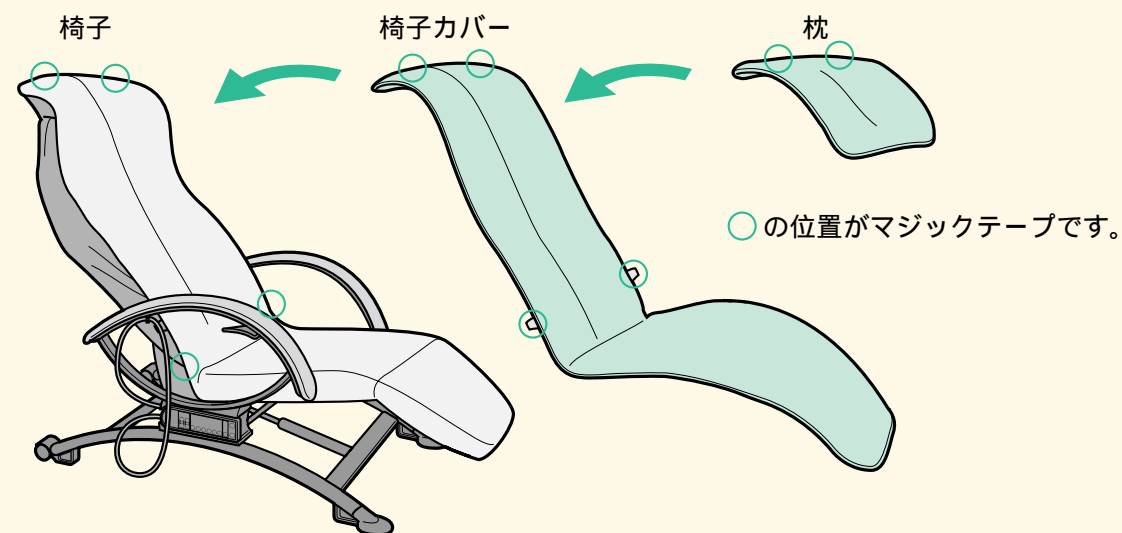

- マッサージをするときは、枕をはずしてからすることをおすすめします。
- マッサージが弱く感じられる場合は、はずしてご使用ください。
- 表裏両面使用できます。(リバーシブル)

別売品のご紹介

専用枕カバー

マジックテープ



- 枕の汚れ防止のために用意しております。
- 枕の裏面と同色(茶色)です。


EP5735-T(茶) 標準価格 1500円(税別)

定格・仕様

使用電源	AC100V 50・60Hz
消費電力	101W
型式認可番号	▽91・37208
医療用具承認番号	20800BZZ00414000
もみ速さ	約23回/分(50Hz) 約28回/分(60Hz)
背すじ伸ばし幅	広い.....約10cm 狭い.....約7cm
上下移動速さ	約40秒(50Hz) 約33秒(60Hz)
もみ玉上下移動距離	約56.5cm
部分背すじ伸ばし	約12cmの距離で自動回復
タイマー	約15分
大きさ	●リクライニングしていない時 (脚のせ台収納) 高さ96×幅63×奥行101cm ●リクライニングした時 (脚のせ台は水平) 高さ60×幅63×奥行145cm
リクライニング角度	約127°～約160度
質量(重量)	約35kg
付属品	椅子カバー(リバーシブル)

張地背・座部=ポリエステル.....100%
椅子カバー・枕=ポリエステル.....100%

こんな異常を感じたら

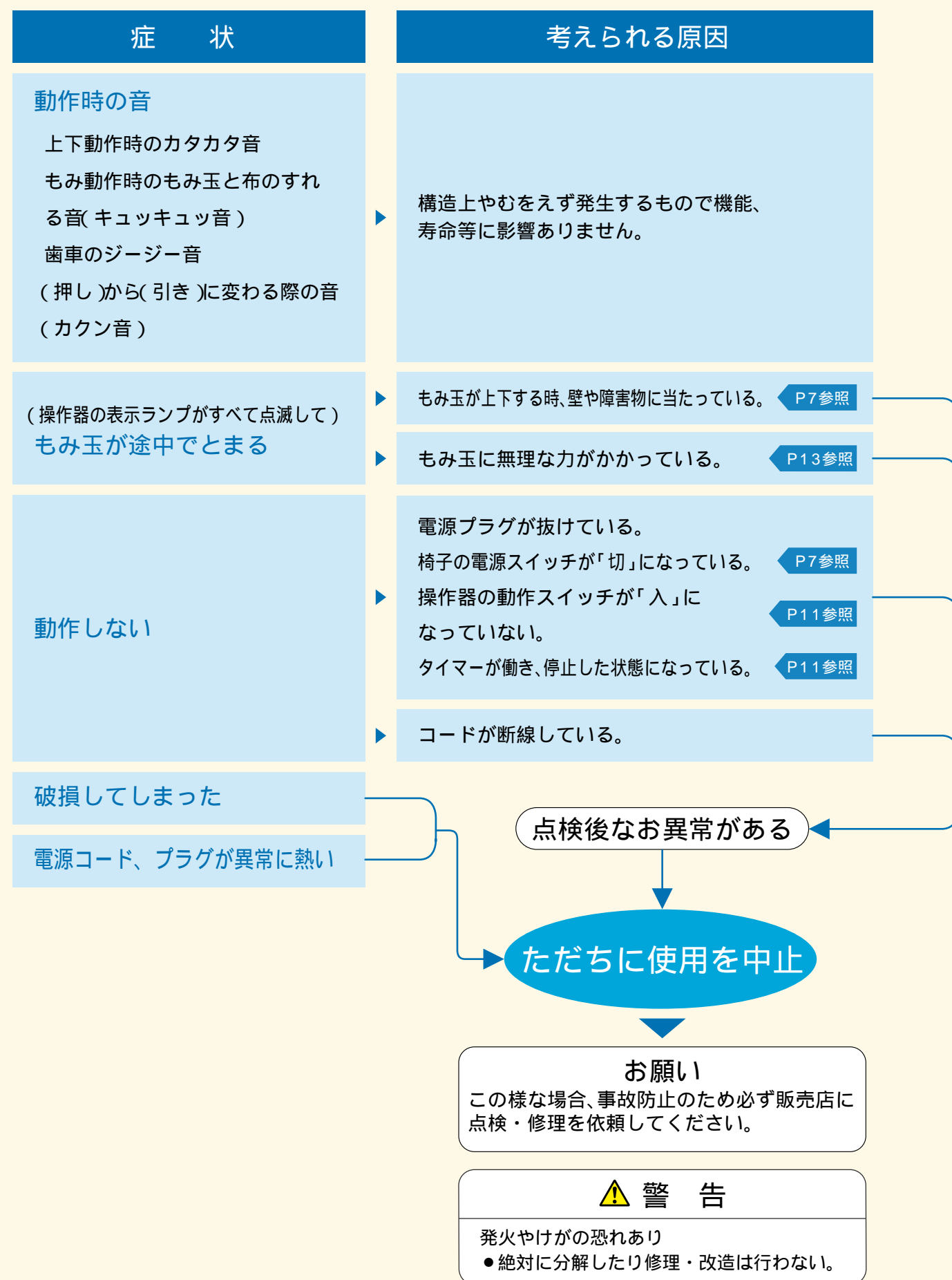

アフターサービスについて

このナショナルモミモミには保証書を別途添付しております。

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入の日より1年間です。

修理を依頼される時

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はご購入の販売店へご依頼ください。

- 保証期間中は
ご購入の販売店にご相談ください。ただし営業用としてお使いのときは保証期間は3ヵ月にさせていただきます。
保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。
修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店にご依頼になれない場合は
お近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこのナショナルモミモミの補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。
性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

ご購入の販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。