

アフターサービスについて

このナショナル<ザ・モミモミ>には保証書を別途添付しております。

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間はご購入の日より1年間です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はご購入の販売店へご依頼ください。

- 保証期間中は
ご購入の販売店にご相談ください。ただし営業用としてお使いのときは保証期間は3ヶ月にさせていただきます。
保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。
修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店にご依頼になれない場合は
お近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこのナショナル<ザ・モミモミ>の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。
性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

ご購入の販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

[〒522-8520]滋賀県彦根市岡町33

TEL (0749)23 - 1511

S.No11

National
松下電工



保管用

保証書別添

医療用具承認番号
20900BZZ00369000

ナショナル ザ・モミモミ EP592^{AZ^A} G^A GZ^A B05^A T^A G03^A 取扱説明書

- ご購入ありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。
- アフターサービスのご依頼は
品番 EP592AZ^A(青柄) EP592G^A(グリーン) EP592GZ^A(グリーン柄)とお申し付けください。
EP592B05^A(黒) EP592T^A(茶) EP592G03^A(グリーン)

快適を科学します

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



警 告



必ず守る

- 医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえご使用ください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
(1)心臓に障害のある人 (2)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
(3)悪性腫瘍のある人 (4)妊娠中や生理中の人 (5)背骨に異常のある人や曲がっている人
(6)かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 (7)骨粗しょう症の人
(8)安静を必要とする人 (9)上記以外に特に身体に異常を感じているとき
- マッサージ使用中やリクライニング・脚のせ台を操作するときは必ず周囲に人やペット
がいないことをご確認ください。
事故やけがを起こす恐れがあります。



禁止

- お子様に使わせたり、本体の上で遊ばせないでください。
事故やけがを起こす恐れがあります。
- 布地が破れた状態(内部機構が露出等)では使用しないでください。
すぐに修理を依頼してください。
事故やけがを起こす恐れがあります。



分解禁止

- 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



注 意



禁止

- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- 浴室など湿気の多い場所で使わないでください。
感電及び故障の原因になります。
- マッサージは1回15分以内に。また同一カ所への使用は5分以内にしてください。
長時間の連続使用は逆効果やけがの恐れがあります。
- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しないでください。
また、もみ玉部に手や足をはさまないでください。
けがをする恐れがあります。(首筋などには、柔らかいタオル等をあててご使用ください。)
- 素肌では使用しないでください。
けがをする恐れがあります。
- 自分で意思表示ができない人に使わせないでください。
また、身体の不自由な方だけのご使用は避けください。
事故やけがの恐れがあります。
- もみ玉の位置を確認の上、ゆっくり座ってください。
事故やけがの恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったりしないでください。
また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。
火災や感電の原因になります。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
ショートや発火の恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用
しないでください。
感電やショート・発火の原因になります。
- 電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。
感電やショート・発火の恐れがあります。
- 動かない場合や、異常を感じたときは、使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いてください。
すぐに点検修理を依頼してください。
感電や発火の恐れがあります。



必ず守る

- 使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠ボタンを「閉」にしてください。
子供のいたずらによる事故やけがの恐れがあります。



アース線接続

- 安全のためにアースを確実に取り付けてください。
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
(アースの取り付けは3ページを参照してください。)



電源プラグ
を抜く

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電ややけどをする恐れがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いて
ください。
感電やショート・発火の恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

本 体

背クッション


- 普通の椅子としてお使いになれます（ファスナーで着脱できます）
- 刺激が強すぎる方は背クッションをご使用ください

リクライニングレバー


- 背もたれの角度調節ができる

脚のせ台

- 脚ウェーブ振動つき

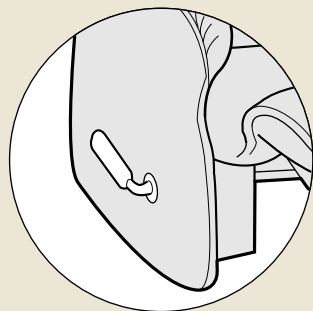


- 側面のレバーで出し入れできる

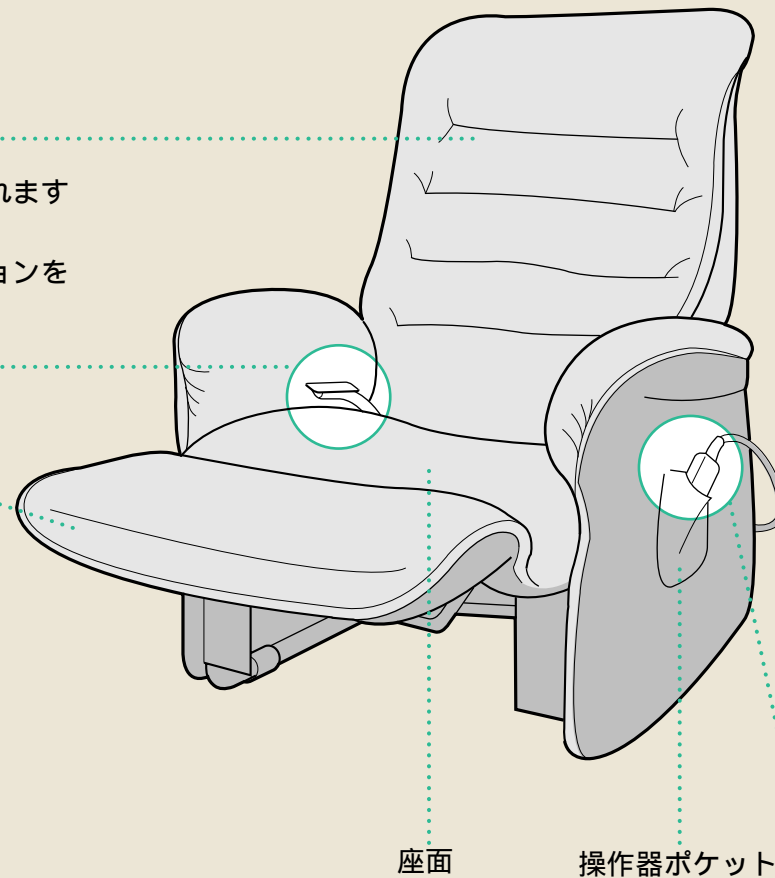

座面

操作器ポケット

電源スイッチ

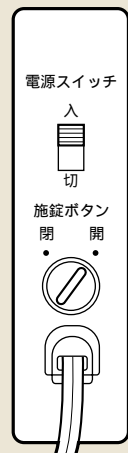

電源プラグ

- 移動に便利です

アース端子



- 安全のためにアースを確実に取り付けてください。

- アース線の接続について
 - アース線を椅子本体のアース端子（ねじ）に接続します。（アース線は付属していません。）
 - コンセントにアース端子がついている場合は、アース端子にアース線を接続します。
 - コンセントにアース端子がない場合やご不明な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。（アース工事は電気工事士による第三種接地工事が必要です。）
 - 水道管やガス管には、絶対に接続しないでください。

操作器

動作スイッチ

動作表示部

センサー部


- 自動コースの入/切を感知する

スライドカバー

- 下端へずらすと自動コース
上端へずらすとお好み動作

動作表示ランプ

- お好み動作の表示

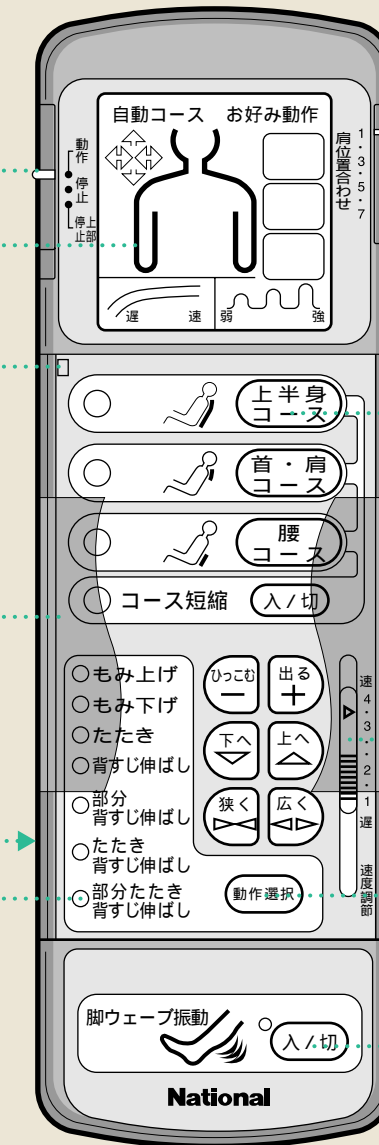

肩位置合わせスイッチ

- 背の高い人は「1」数字が大きくなるにつれて、もみ玉の位置が低くなる（P.8）

自動コース選択ボタン

- 「上半身コース」「首・肩コース」「腰コース」の3つのコース（P.7）
- コース短縮ボタン付

速度調節スイッチ

- お好み動作の速度調節（P.10）

動作選択ボタン

- 押すごとに動作が変わる（P.9）

脚ウェーブ振動ボタン

- 動作スイッチと関係なく単独で入/切（P.12）

動作表示部


移動方向表示

- もみ玉の移動方向を表示
上へ 下へ
広く 狭く

もみ玉位置表示

速度表示

- 速度に合わせて表示

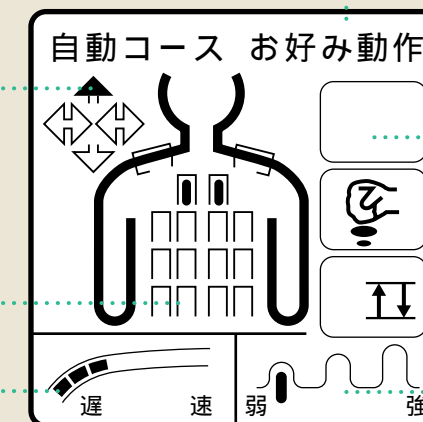

コース表示

- 自動コース、お好み動作を表示

動作表示

- もみ上げ
- もみ下げ
- たたき
- 背すじ伸ばし
- 部分背すじ伸ばし

強弱表示

- もみ玉の出た状態を表示

（例：部分たたき背すじ伸ばし）の場合

- 動作表示は、次の動作を知らせるために、もみ玉の動作より一瞬早く表示します


マッサージのまえに

1 リクライニングができるスペースを確保する

うしろを確認

- 障害物やお子様に注意してください
- 壁とのスキ間は40cm以上確保してください

2 電源を入れる

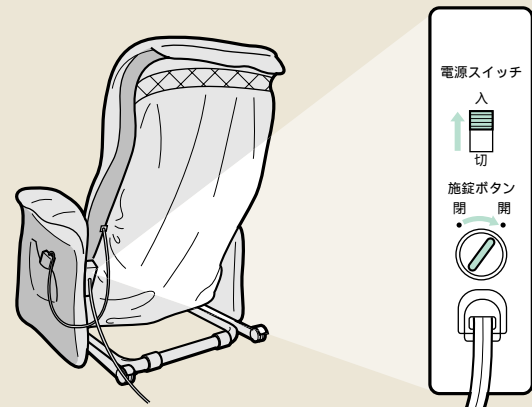

- 電源スイッチ「入」と施錠ボタン「開」の状態を確認してください

⚠ 事故やけがの恐れあり

- 布地が破れた状態(内部機構が露出等)では使用しない。すぐに修理を依頼する。
- もみ玉の位置を確認の上、ゆっくり座る。

⚠ 感電やショート・発火の恐れあり

- 浴室など湿気の多い場所で使わない。
- 交流100V以外では使用しない。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込む。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
- 電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させない
- 動かない場合や、異常を感じたときは、使用を中止し、すぐに電源プラグを抜く。すぐに点検修理を依頼する。

「自動コース」が「お好み動作」を選ぶ

自動コースの場合

- 背すじ伸ばし・もみ・たたきを自動的に効率よく折りまぜます
- 「上半身」「首・肩」「腰」の3つのコースが選べます
- さらに「コース短縮」なら1つのコースを短時間でお試しいただけます




スライドカバー
下げる

次頁へ

お好み動作の場合

- もっともコリのある部分をお好みの動作で重点的にマッサージでき、効果的にコリをほぐします
- 必ずスライドカバーを上端(カチッと音がする)まで移動させてください

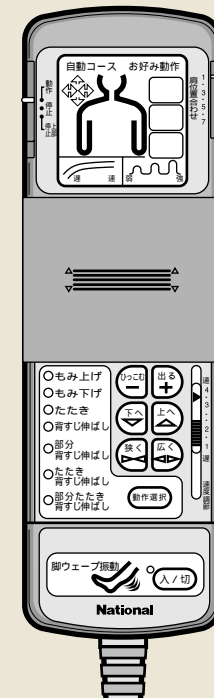


スライドカバーを
カチッと音がするまで
上げる


P9へ

- マッサージ中にスライドカバーを移動させると「自動コース」と、「お好み動作」が切替わります
- ご使用中、無理な力がかかった場合、安全のためにもみ玉の動きが止まる場合があります。そのときは体を浮かし気味にしてご使用ください。万一もみ機が停止した場合(全ランプ点滅)は電源スイッチを入れ直してください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。



自動コースでマッサージ

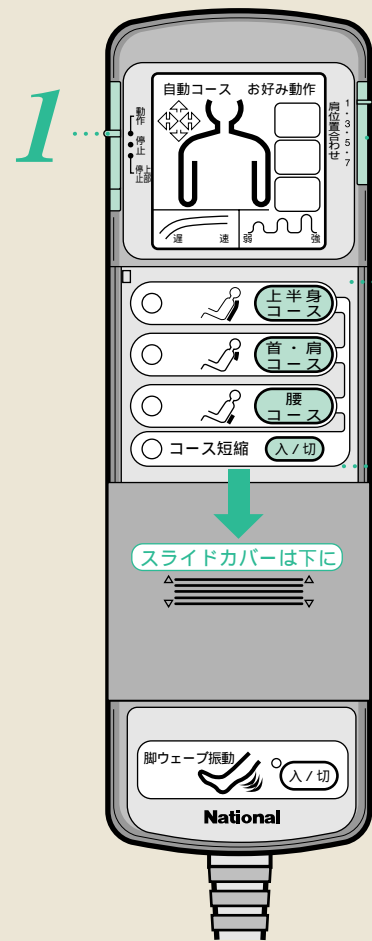

1 動作にする

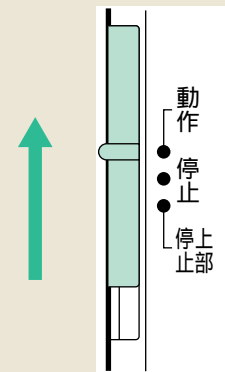


2 もみ玉の肩位置を合わせる

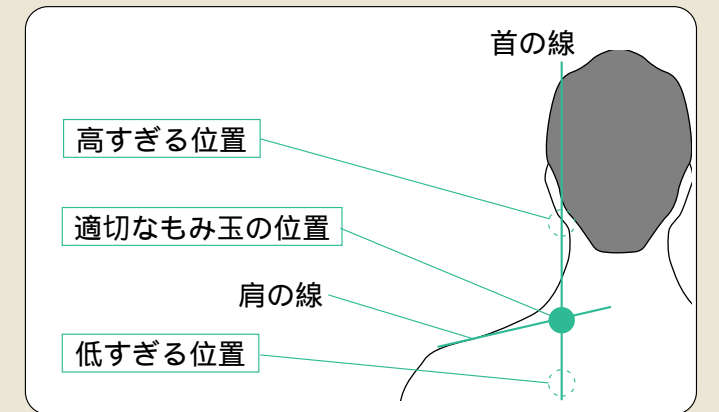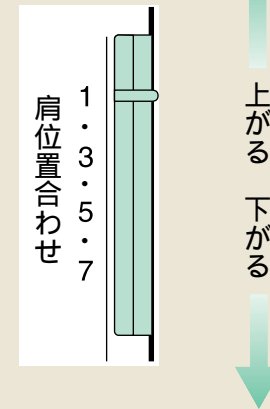

- もみ玉が肩（首のつけ根）に当たるように
- マッサージ開始時、1～7の中で自分に合った位置を選ぶ
- 上下約10cmの範囲で調節できます
- 肩位置が合わないときは、体をずらして調節してください
- マッサージ途中でも肩位置合わせの変更ができます


3 コースを選ぶ

- 選んだコースの動作表示ランプ点灯
- 選ばない場合は、上半身コースを開始します

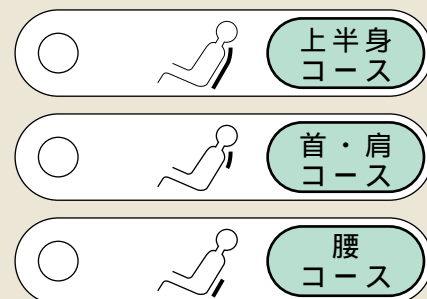


- 途中で別のコースボタンを押すと変更できます

お急ぎの場合

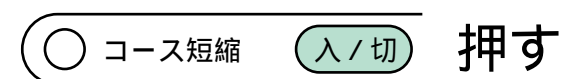

- 約6分間に縮まり、再度押すと解除される


コースの内容

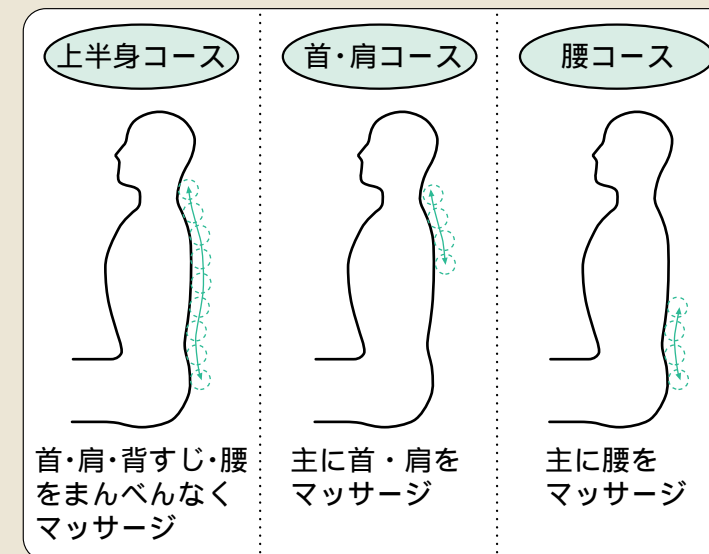

コース終了後、もみ玉は上部停止位置に移動して終了

マッサージを途中でやめたいとき


上部停止に

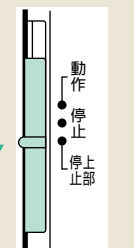

- もみ玉は上部停止位置に移動して停止

急いで止めたいとき

停止に

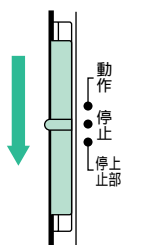

- もみ玉はその場で停止する

⚠ 事故やけがの恐れあり


- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しない。また、もみ玉部に手や足をさはさない。（首筋などには、柔らかいタオル等をあてる）
- 素肌では使用しない。
- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な方だけの使用は避ける。
- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
- マッサージは1回15分以内に。また同一カ所への使用は5分以内にする。
- 医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- (1) 心臓に障害のある人
- (2) ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
- (3) 悪性腫瘍のある人
- (4) 妊娠中や生理中の人
- (5) 背骨に異常のある人や曲がっている人
- (6) かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- (7) 骨粗しょう症の人
- (8) 安静を必要とする人
- (9) 上記以外に特に身体に異常を感じているとき

もみ部タイマー

操作器の動作スイッチを入れると使いすぎを防ぐためのタイマーが作動します



約15分でタイマーが切れ、もみ玉は上部停止位置まで移動して止まり動作表示が消えます。再度ご使用のときは、自動コース選択ボタンのいずれかを押してください（但し自動コースのマッサージ中に15分経過しても自動コースが終るまではタイマーが切れません）

お好み動作でマッサージ

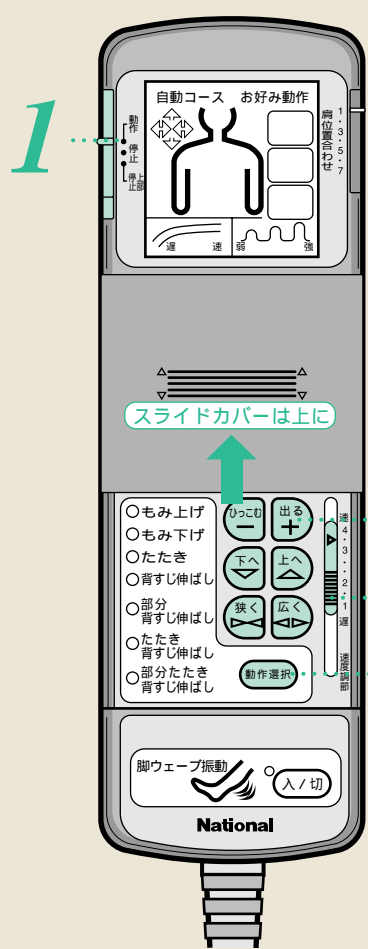

1 動作にする 2 動作を選ぶ


●好みの動作ランプがつくまで押す

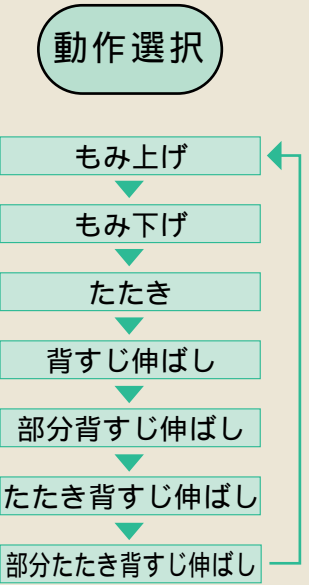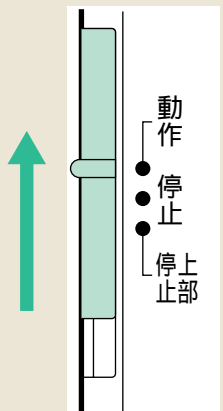

4
3
2

上手なマッサージの手順


●体をなじませる為、はじめは「背すじ伸ばし」をし、コリの部分を中心に周辺をもみほぐす

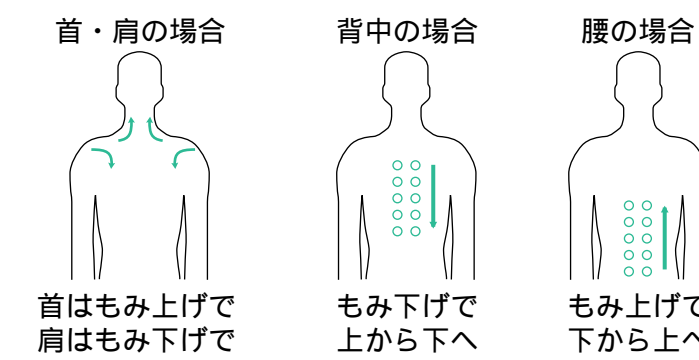

●仕上げには「背すじ伸ばし」で、もみほぐした後の筋肉の緊張をやわらげます

●押さない場合「もみ上げ」の動作を行います
●「(部分)背すじ伸ばし」「(部分)たたき背すじ伸ばし」の場合、動作開始時にもみ玉の幅が約10cmまで自動的に狭くなります


3 速度を調整する

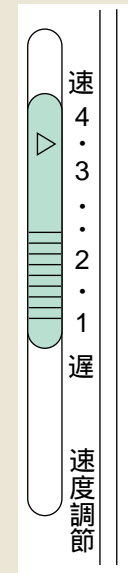

4 もみ玉の強さを調節する


●押しつづけると一定レベルまで変化する

弱まる 強まる

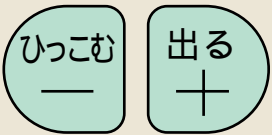


もみ玉の位置を調節する

●押している間もみ玉が移動する
ただし背すじ伸ばし、たたき背すじ伸ばしのときは自動反転します
●首、肩部でもみ玉の幅が10cm以上のときに下へさげていくと背中部で自動的にもみながら狭くなります

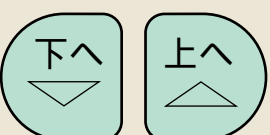


●押している間、もみ玉の間隔が変わる

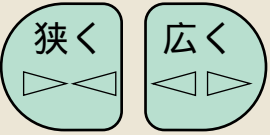

マッサージを途中でやめたいとき

上部停止に

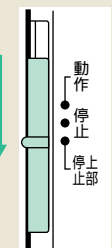

●もみ玉は上部停止位置に移動して停止

急いで止めたいとき

停止に



●もみ玉はその場で停止する

⚠ 事故やけがの恐れあり

- 頭・ひじ・ひざ・腹部には使用しない。また、もみ玉部に手や足をはさまない。(首筋などには、柔らかいタオル等をあてる)
- 素肌では使用しない。
- 自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な方だけの使用は避ける。
- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
- マッサージは1回15分以内に。また同一カ所への使用は5分以内にする。
- 医師の治療を受けているときや下記の人には必ず医師と相談のうえご使用ください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
 - (1)心臓に障害のある人
 - (2)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
 - (3)悪性腫瘍のある人
 - (4)妊娠中や生理中の人
 - (5)背骨に異常のある人や曲がっている人
 - (6)かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - (7)骨粗しょう症の人
 - (8)安静を必要とする人
 - (9)上記以外に特に身体に異常を感じているとき

●構造上、左右のもみ玉の位置にずれが生じ、左右のもみ強さが異なって感じられることがあります

お好み動作マッサージ

椅子のつかいかた

リクライニング



無段階に(マッサージ中でも)調節できます

倒すとき

- もたれながら
レバーを引く

戻すとき

- 背中を浮かせて
レバーを引く

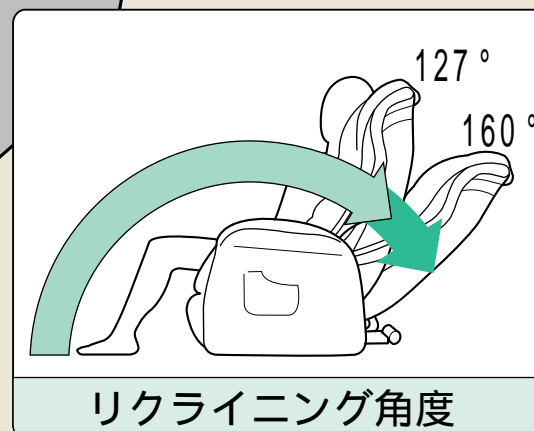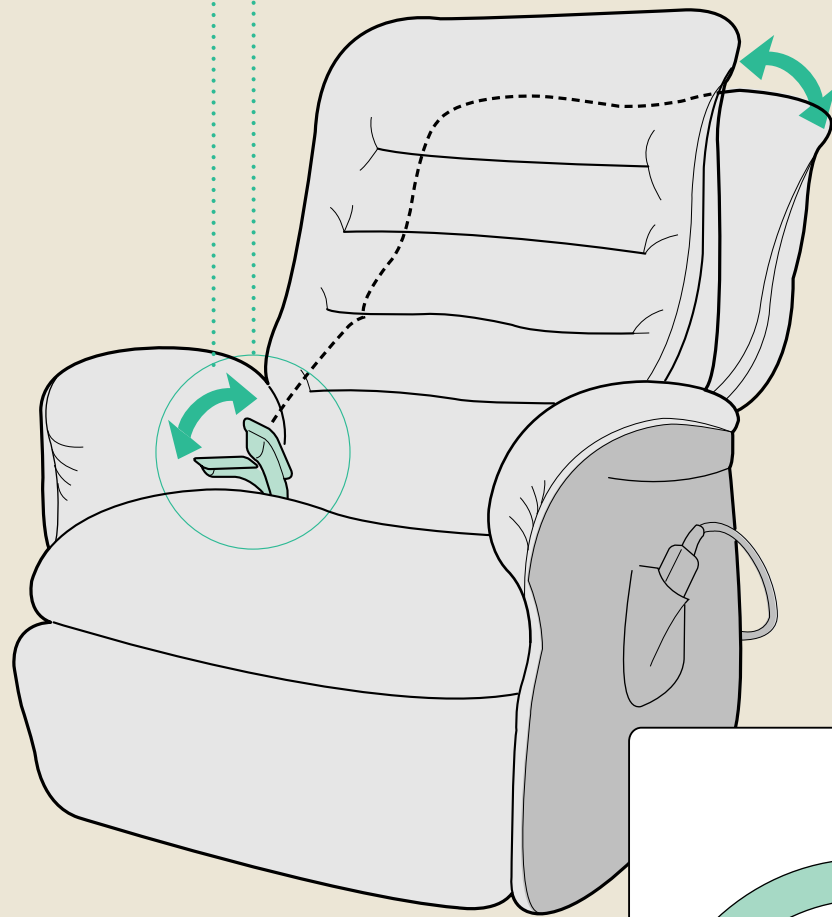

- リクライニングするときは、壁などの障害物やお子様に注意してください


脚のせ台

出すとき

- レバーを後方に引く

収納するとき

- レバーを前方に戻す

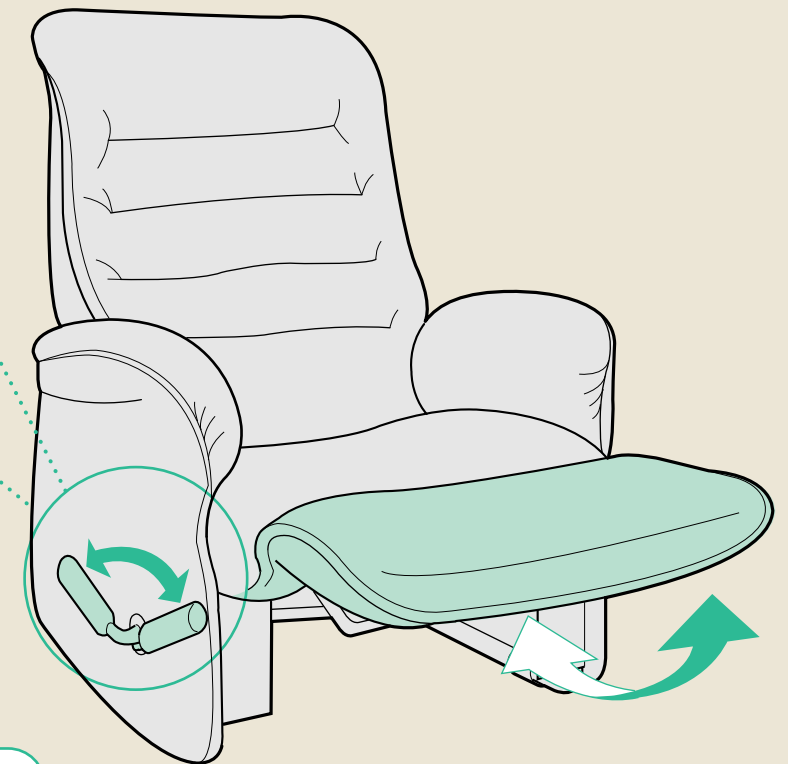

⚠ 事故やけがの恐れあり

- お子様には使わせない。
- 脚のせ台収納時は下部にお子様やペットがいないことを確認して操作する。

脚ウェーブ振動マッサージをするとき

- 動作スイッチに関係なく入/切 脚ウェーブ振動だけの使用も)できます



脚のせ台を出してから
押す


- 約30分で自動的に終了します

止めたいときは再度押す

電源を切る

マッサージ使用時に電源を切らない

- もみ玉が突出したままになる場合があります

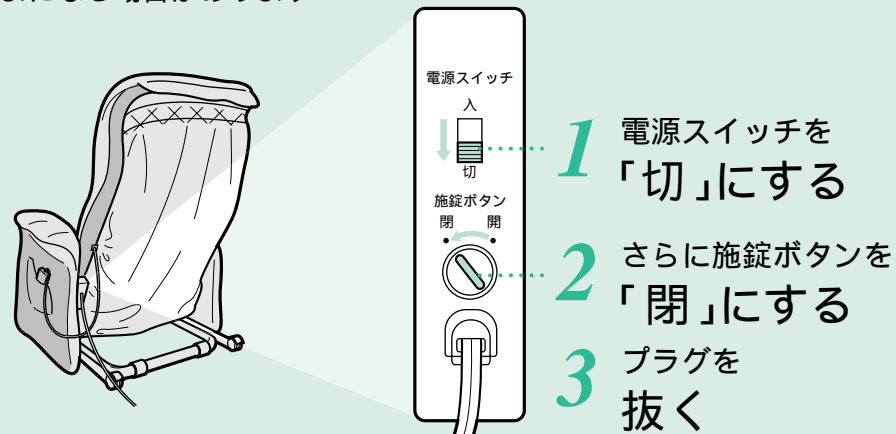

⚠ 事故やけがの恐れあり

- 使用後は電源スイッチを必ず「切」にし、施錠ボタンを「閉」にする。

⚠ 感電やショート・発火の恐れあり

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

お手入れのしかた


布部

- 布地の毛が部分的に倒れて、光沢にムラが出ている場合には、毛の流れ方向に沿ってブラシ等で整えてください。
- 布地の汚れは、石ケン液でブラシ洗浄した後、水を含ませた布でふきとり自然乾燥させる。



プラスチック・パイプ部

- 石ケン液を含ませた布をよく絞ってふく

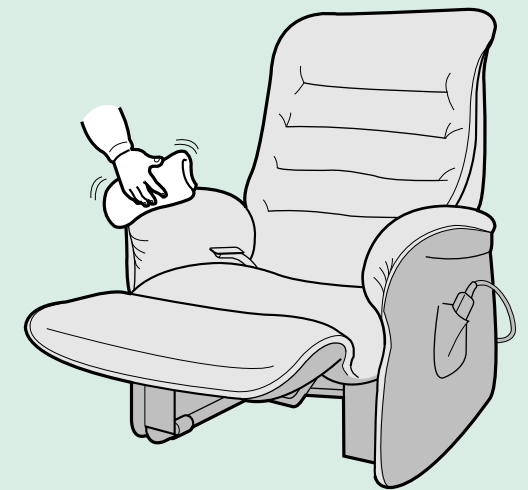


⚠ 感電やショート・発火の恐れあり

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
- 絶対に分解したり修理・改造は行わない。


収納場所

- 汚れやほこりをとった後、湿気の少ない所に（カビやシミの原因）
- 直射日光が長時間当たる所、ストーブの近くで高温になる所はさける（布の変色、変質の恐れ）

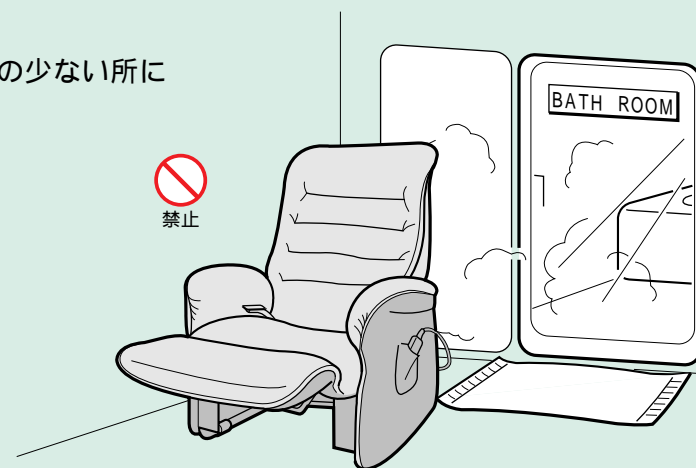

移動するとき

- 前面を浮かし、押して移動
- 人をのせたまま移動しないで
- 床をキズつけるおそれがありますので、マット等を敷いてゆっくり移動してください

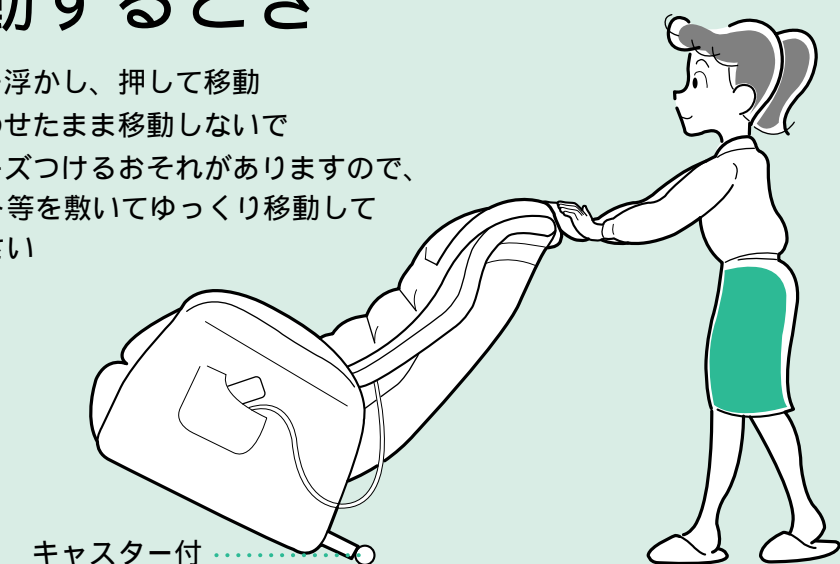

自動コースの基本動作

○ ○ ○

もみ

⋮

たたき

○ ○ ○


もみ / たたき

↑ ↓

背すじのばし
(たたき背すじのばし)


■上半身コース (コース短縮の場合:)

所要時間 約14分 短縮7分

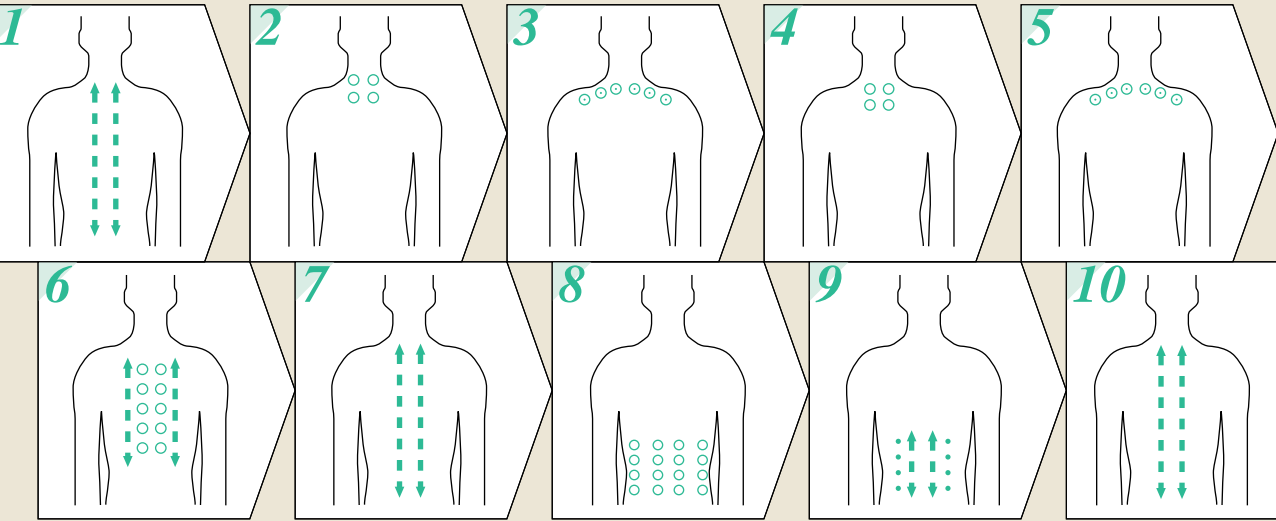


■首・肩コース (コース短縮の場合:)

所要時間 約14分 短縮7分

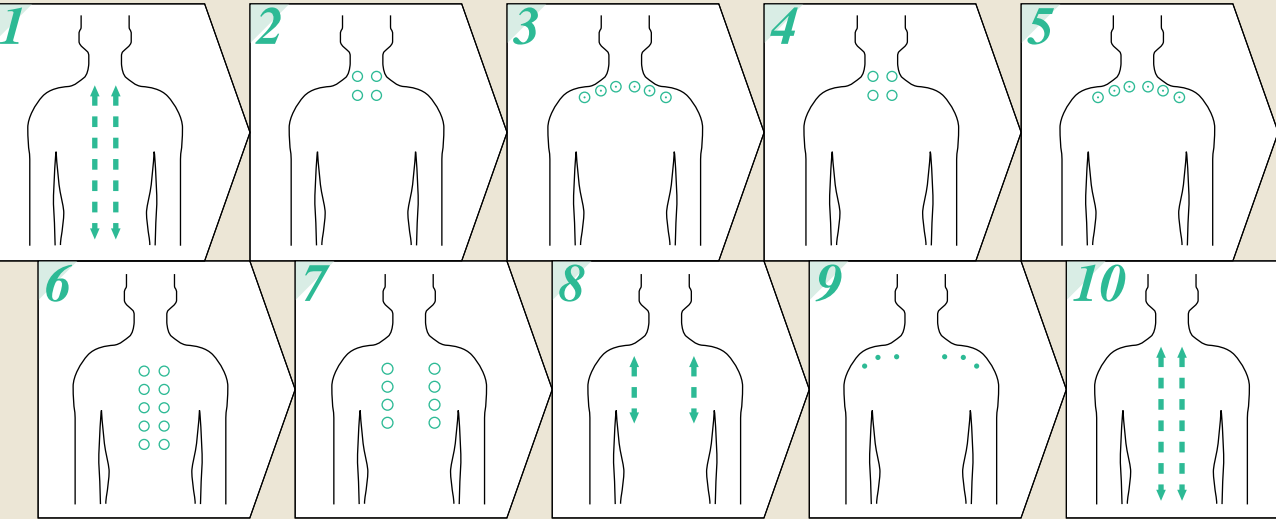

■腰コース (コース短縮の場合:)

所要時間 約13分 短縮6分

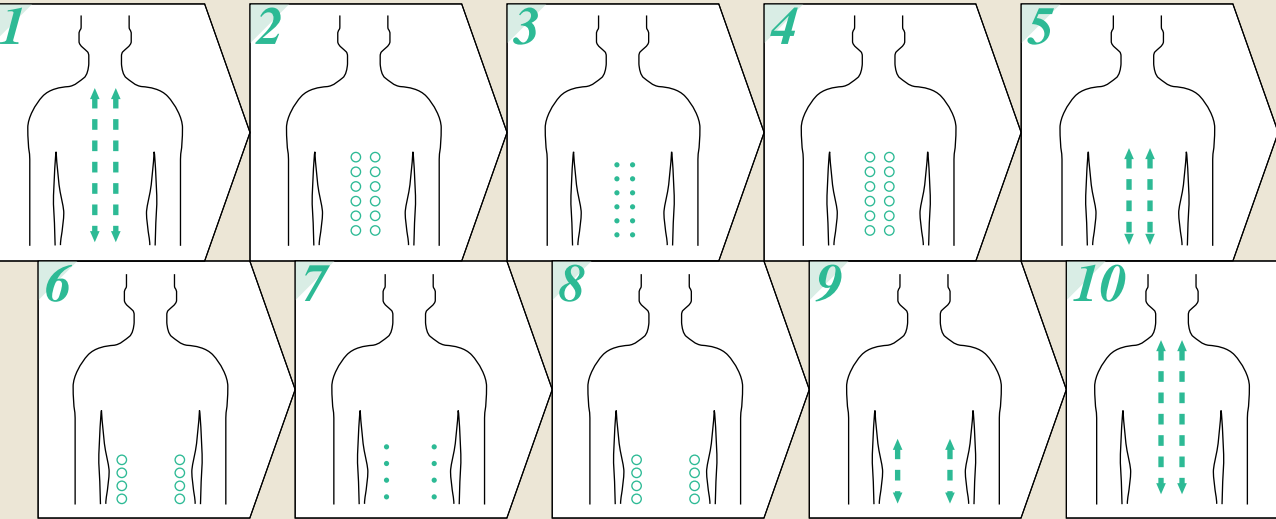

上記の図は本来の動作を分かりやすく解説するため、いくぶん省略してあります。

マッサージのできる範囲

- もみ上げ


■もみ下げ

■たたき
- 背すじ伸ばし


■部分 背すじ伸ばし

■たたき 背すじ伸ばし

■部分たたき 背すじ伸ばし

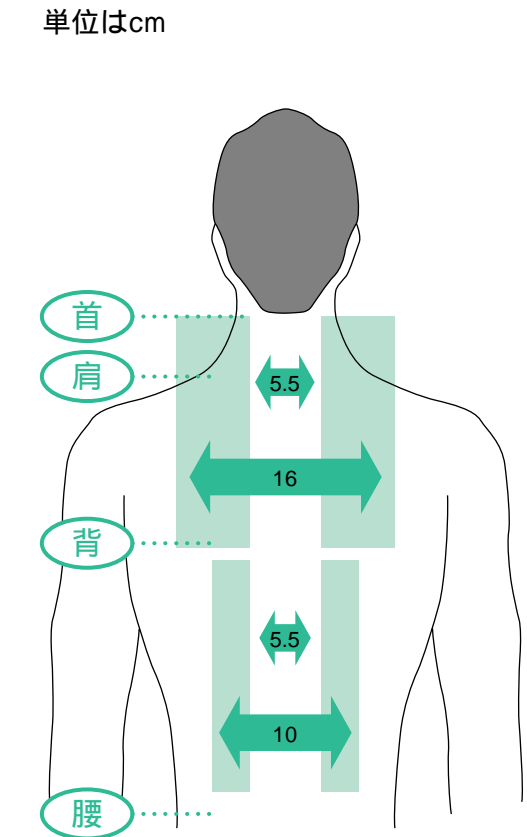

- 幅調節
- 首肩～背 幅約5.5～16cm
 - 背～腰 幅約5.5～10cm
- 強弱調節
- 弱～強 約3
 - もみ玉が身体方向にせり出します

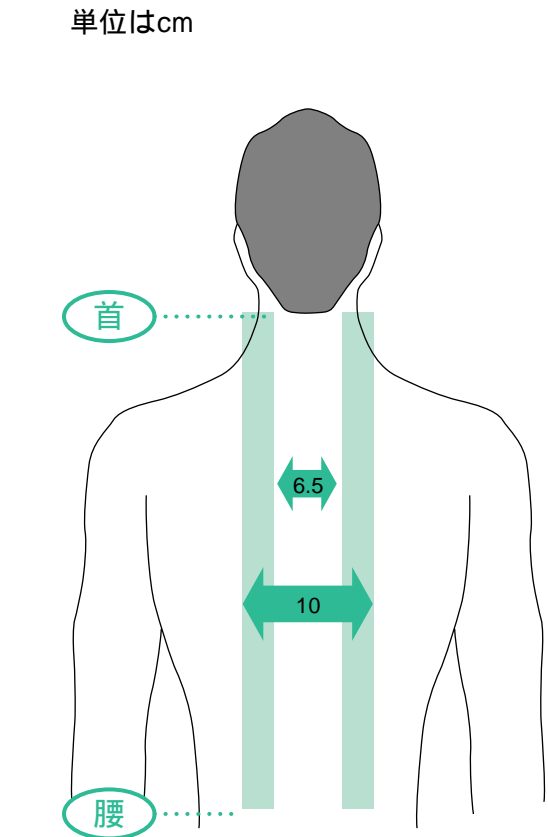

- 幅調節
- 首～腰 幅約6.5～10cm
- 強弱調節
- もみ玉は弱の位置に自動的にセットされますので調節はできません

症 状	考えられる原因
動作時の音 <ul style="list-style-type: none">たたき動作時の動作音（上部では音が大きくなります）強弱調節時の音上下動作時のカタカタ音もみ動作時のもみ玉と布のすれる音（キュッキュッ音）歯車のジージー音もみ玉（押し）から（引き）に変わる際の音（カクン音）	構造上やむをえず発生するもので機能等に影響ありません
もみ玉が途中でとまる	<ul style="list-style-type: none">もみ機が上下する時、壁や障害物に当たっている P5参照もみ玉に無理な力がかかっている ▶ 体を浮かせ気味にしてみる
背すじ伸ばし動作にすぐ入らない	<ul style="list-style-type: none">もみ玉が最小幅まで狭まってから背すじ伸ばし動作に入る間の時間がかかります
お好み動作のマッサージに切替わらない	<ul style="list-style-type: none">操作器のスライドカバーが上端まで移動されていない P6参照
もみ玉の位置が肩まで来ない	<ul style="list-style-type: none">肩位置合わせスイッチが設定されていない P8参照
左右のもみ玉の高さが異なる	<ul style="list-style-type: none">交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません
動作しない	<ul style="list-style-type: none">電源プラグが抜けている P5参照椅子の電源スイッチが「切」になっている P5参照操作器の動作スイッチが「停止」「上部停止」になっている P8参照タイマーが働き、停止した状態になっている P8参照人体保護のために安全装置が働き、停止した状態になっている P6参照コードが断線している
破損してしまった	
電源コード、プラグが異常に熱い	

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

お願い

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください

⚠ 発火やけがの恐れあり

● 分解や修理・改造は行わない


張地 / 布張り ● 背・座部・肘掛け部
AZ(青柄)ポリエステル100%
GX(グリーン)パイル: アクリル100% ベース: レーヨン100%
TX(茶)パイル: アクリル100% ベース: ポリエステル100%
G0X(グリーン)ポリエステル100%
GZ(グリーン柄)パイル: アクリル97% レーヨン3%
ベース: ポリエステル61% コットン21% アクリル18%
● 裏カバー= ポリエステル100%
革張り ● 牛革(一部人工皮革)

別売品のご紹介

専用カバー

● 付属の椅子カバーが破れたりひどく汚れたときのために用意しております

EP5905-W(白)レース調 標準価格5,500円(税別)

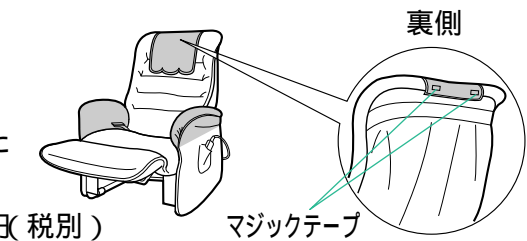

使用電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	105W
型式認可番号	第91-42612-1号
医療用具承認番号	20900BZZ00369000
もみ速さ	約13~37回/分
もみ幅	肩 部...約5.5~16cm 腰 部...約5.5~10cm
たたき速さ	約250~700回/分(片側)
上下移動速さ	約25~60秒で1往復
背すじ伸ばし幅	約6.5~10cm
部分(たたき)背すじ伸ばし	約12cmの範囲で自動反復
もみ玉上下移動範囲	約56.5cm
強弱調節	もみ玉突出量約3cm(無段階)
肩位置合わせ	7段階
タイマー	約16分
脚ウェーブ振動	約2400回/分~3000回/分 タイマー.....約30分
大 き さ	● リクライニングしていない時 (脚のせ台収納) 高さ106×幅85×奥行96cm ● リクライニングした時 (脚のせ台は水平) 高さ72×幅85×奥行155cm
リクライニング角度	約127~160度(無段階に角度調整できます)
質 量 (重 量)	約42kg
付 属 品	● 背クッション