

Panasonic®

保証書付き

水洗い
できません

取扱説明書

RF美容器 家庭用

品番 **EH-SR70**



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP.30をご参照)

Panasonic Beauty WEB も
チェック！

<http://panasonic.jp/beauty/purchase/>

ホームページでの掲載内容、URLは予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

EH9210SR701 F1017-0
Printed in Japan

RF^{*1}×超音波のリフト^{*2}テクノロジーで、
肌にハリを与えてすっきりと引きしめ、
美しいフェイスラインへ。

*1 Radio Frequency(ラジオ波)とも
呼ばれる高周波のことです。
(周波数:約1 MHz)

*2 引き上げるように動かす
ことです。



1 電源を入れ、温感
RFレベルを選ぶ

2 専用ジェルをつける

3 予熱完了
(約1分後)

使いかたの
流れ

●イラストは、
レベル「低」の
場合の例です。



点滅




予熱中



点灯

1 MHz超音波

1秒間に約100万回の
微細な振動の超音波

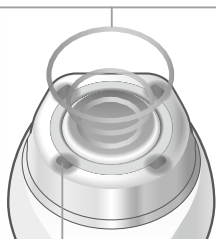

4極集中RF

RFエネルギーを集中して
高める電極を4点配置

4 肌に
あてて
動かす



もくじ

安全上のご注意	P.4
お使いになる前に	P.10
各部のなまえ	P.11
準備する	P.12
RF美容器を使う	P.14
使い終わったら	P.20
海外で使うとき	P.23
よくあるお問い合わせ	P.24
修理を依頼される前に	P.26
廃棄するときのお願い	P.27
別売品	P.28
定格・仕様	P.28
保証とアフターサービス	P.29
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。



危険

トラブルを防ぐために



- 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しない

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器

(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作、事故や体調不良の原因)

警告

安全上の
ご注意

肌や身体へのトラブルを防ぐために



● 下記の人には使用しない

- ・ 心臓疾患の人
- ・ 顔面の神経障害のある人
- ・ 糖尿病の人
- ・ 出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の人
- ・ 高血圧の人
- ・ 歯の治療中の人
- ・ 網膜はく離のある人、あった人
- ・ 強度の近視の人(−6D以上)
- ・ 骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
- ・ 幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない人
- ・ 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある人
- ・ 目の手術をおこなった人
→レーシック手術を受けた人は、かかりつけの医師にご相談のうえご使用ください

(事故や体調不良、失明の原因)

- ・ アレルギー体質の人
- ・ 敏感肌の人
- ・ 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人

(肌や身体へのトラブルの原因)

- ・ 生理中、妊娠中および産後1か月の人
(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因)

- ・ 温度の感覚が自覚できない人
(やけど・感電・けがの原因)

● 下記の場合や、部位には使用しない

- ・ 体調がすぐれない場合
- ・ 飲酒や薬を服用中の場合、疲労の激しい場合
- ・ 肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位
- ・ 皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- ・ 当日の脱毛や除毛処理をした部位
- ・ 整形手術をした部位
- ・ 額・唇・眼球・まぶた・耳・首

(肌や身体へのトラブル、失明の原因)



部に
使用しない

安全上のご注意 つづき

⚠ 警告

肌や身体へのトラブルを防ぐために



- 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する

- ・ 今までに重い病気をした人
- ・ 急性疾患の人
- ・ 有熱性疾患の人
- ・ 感染症疾患の人
- ・ 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- ・ エステ、クリニックなどで、ダウンタイム(回復に要する時間)が必要な施術、および肌に強い赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた人

- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する
(事故や肌・身体のトラブルの原因)

本体は



- 引火性のものの近くで使用しない

アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、除光液など
(火災ややけどの原因)

- 火中投入・加熱しない

高温での充電・使用・放置しない

(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(誤飲による事故やけがの原因)

- 改造・修理はしない

(火災・感電・けがの原因)

→ 修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない
(火災・感電・けがの原因)



異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

本体、アダプター・コードが

・ 変形したり異常に熱い ・ こげ臭いにおいがする ・ 使用中に異常な音がする

→ すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

警告

電源は



- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- 本体・ACアダプターは水につけたり、水洗いしない
- 浴室や湿気の多い所で使用したり、保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない
(感電や火災の原因)



- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- コードを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など

(感電やショートによる火災などの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 専用のACアダプター以外は使用しない
専用のACアダプターを他の商品に使用しない
(やけどやショートによる火災などの原因)



- 必ず交流100-240 Vで使用する
 - アダプターや器具用プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
 - 掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)
 - 電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
- アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

電源は



- 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 収納時にコードをアダプターに巻きつけない
(コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)



- アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや器具用プラグを持って抜く
(感電やけがの原因)
- 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

次のこともご注意ください



- プローブ面、RF端子を金属にあてない
(やけどの原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)
- 同じ箇所に過度に使用しない
(肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状悪化の原因)



- ご使用前にプローブ面に割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する
(肌を傷つける原因)
- ほお、フェイスラインのお手入れのみに使用する
(パッチテストを行う腕は除く)
(肌を傷つけたり、炎症などの原因)



廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

危険



- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で使用・放置しない
- チューブを絶対にはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

安全上の
ご注意

警告



- 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
→ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください



- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの
きれいな水で十分洗う
(目に障害を与える原因)
→ すぐに医師の治療を受けてください

注意



- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などの
きれいな水で洗い流す
(皮膚がかぶれたりする原因)

お使いになる前に

使用頻度について

- 1日1回10分。
1日以上あけて、週3回まででお使いください。
- 過度な使用は、かえって肌に良くありません。

肌について

使用前に、専用ジェル(またはジェルの代わりに使う化粧品)のパッチテスト(皮膚試験)を必ず行ってください。

[→P.12]

- 肌トラブルを事前にチェックするための簡易なテストです。

素肌(メイク落とし・洗顔をした状態)で、お使いください。

肌の様子を見ながら、お使いください。

- 肌にトラブルがあった場合は、使用を中止して医師にご相談ください。
- 肌のトラブルはストレス・体質・内臓疾患・化粧品などの原因も考えられますので、専門医にご相談ください。

温感RFレベルについて

温感RFレベルが高いほど、プローブ面が温くなります。肌の調子やお好みに合わせて、選んでください。

- 使いはじめや、肌に違和感を感じた場合は、レベル「低」でお使いになることをおすすめします。

センサーについて

プローブ面が肌に正しくあたっているか、センサーで検知しています。


- オーバーケア防止センサー：プローブ面をあて続けている
 - 密着センサー：プローブ面が肌に密着していない
- ことをお知らせしています。

[→P.19]


アクセサリについて

イヤリングなど、顔・首周辺のアクセサリは、はずしてお使いください。

各部のなまえ

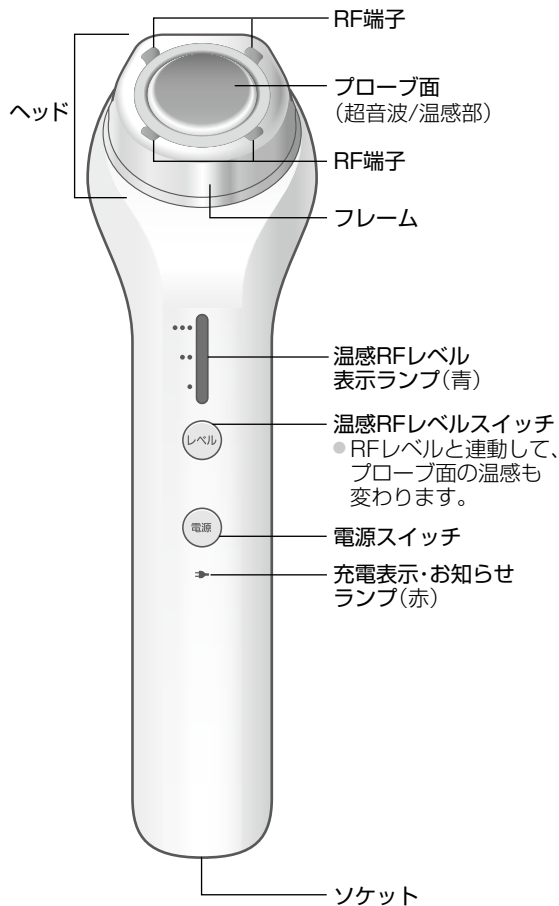


ACアダプター

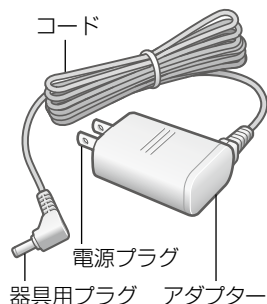


確認

スタンド

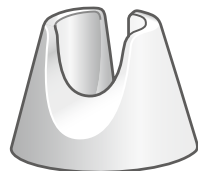

付属品


専用ジェル(ジェル)

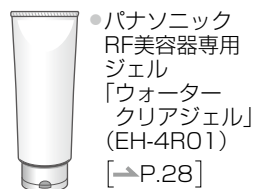

準備する

パッチテスト(皮膚試験)をする

専用ジェル(またはジェルの代わりに使う化粧品)とこの商品を組み合わせて使うことで、肌に合わないことがないかの相性チェックをお願いします。
肌のトラブルを防ぐために、必ずテストを行ってください。

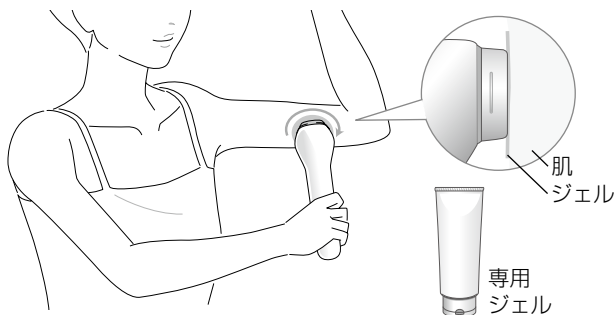


- 1 パッチテストを行う部位(腕の内側)を石けんで洗い、タオルなどでふき取る
- 2 専用ジェル(または化粧品)をつける
 - ヘッドの大きさ程度にうすく塗る。
- 3 電源を入れて塗布部にあてる
 - ① 電源を入れる
 - ② 予熱が完了したらプローブ面を押しあて、ゆっくり円を描くように動かす(約10秒)[→P.17～18]
 - ヘッドが振動します。
 - ③ いったん肌から離し、再び約10秒動かす
 - 終わったら、塗布部は自然乾燥させる。
- 4 48時間放置する
 - 塗布部は、ぬらしたり、こすったりしないでください。

48時間内に、肌にトラブルがあったとき

専用ジェル(またはその化粧品)での使用を中止してください。

充電する

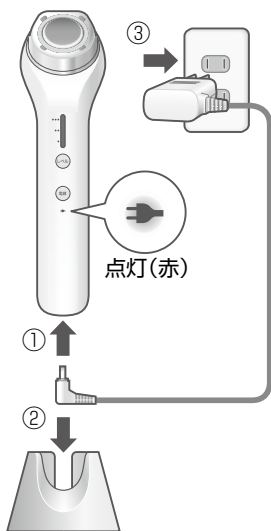

1 ACアダプターをつなぐ

- ①本体に器具用プラグを差し込む
- ②本体をスタンドに置く
- ③アダプターをコンセントに差し込む

● 点灯(赤)を確認する。

(約2時間で充電完了)

● が消灯します

2 アダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜く

(安全および省エネのため)

- 2時間以上充電しても、本体に支障は生じません。

充電の完了を確認するとき

器具用プラグを抜き差しする。

→充電が完了していたら、 が点灯し、約5秒後に消灯します。

充電の時期

- が点滅(1秒間に1回)したら、電池の残量が少なくなっています。充電してください。
- 1回のフル充電で、約3回(1回10分使用)使えます。ただし、使用環境によって、使用時間が短くなる場合があります。


お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ が点灯しないことがあります。(そのまま充電すると、点灯します)
- 充電推奨温度(15℃～35℃)外では、充電時間が長くなったり、充電されない場合があります。[→ P.26]
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

RF美容器を使う

素肌(メイク落とし・洗顔をした状態)で、お使いください。


電源を入れ、温感RFレベル(レベル)を選ぶ(予熱スタート)

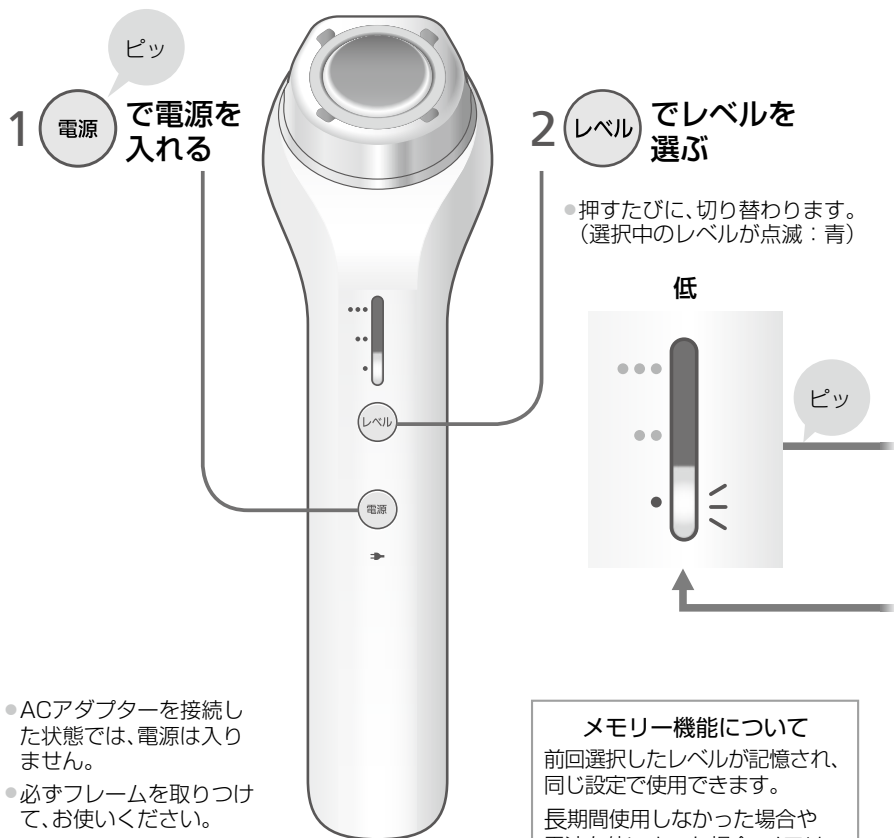

メモリー機能について
前回選択したレベルが記憶され、同じ設定で使用できます。
長期間使用しなかった場合や電池を使い果たした場合、メモリーはリセットされます。

● 使用推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では温まらない場合があります。

- 温感RFレベルが高いほど、
プローブ面が温かくなります。

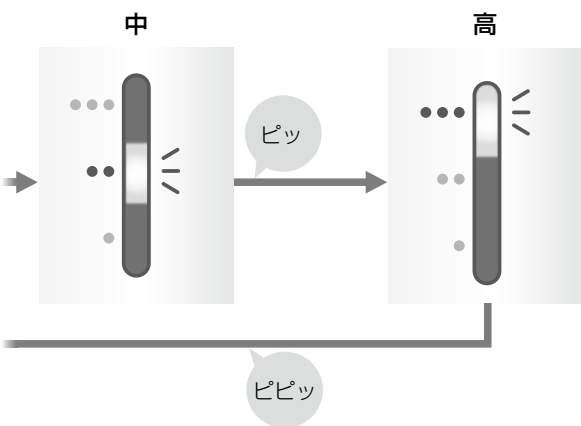

RF美容器を使う つづき

予熱中に 専用ジェルをつける

RFや超音波を伝えやすい専用ジェルをおすすめします。

1 適量のジェルを 手にのせる

適量(目安)
さくらんぼ 1 粒程度
(約2~3 g)

2 お手入れ部分(部)に ジェルをのぼす



日頃お使いの化粧品も使えます


- RFや超音波を肌に伝えるために、ジェルまたは化粧品を必ずお使いください。
- 本体をすべらせやすくするような化粧品をお使いください。
- 油分が多い化粧品は、RFや超音波が伝わりにくい場合があります。



- 使用中にすべりが悪くなってきたら、お肌の負担にならないよう、化粧品をつけ足してお使いください。

予熱完了(約1分後)

電源を入れてから約1分後に、予熱が完了します。(点滅→点灯) ピッ

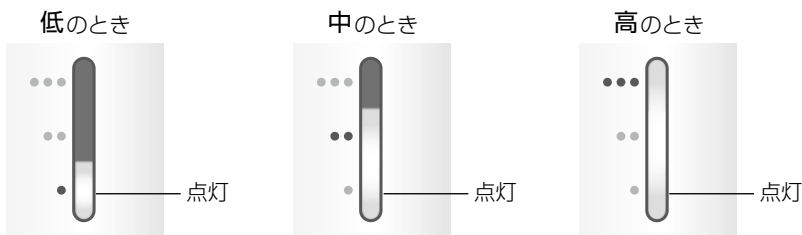


お知らせ

- 点滅中でも肌にあててお使いいただけます。肌にあてると、ランプが点灯に変わります。
- 肌にあてない状態で約1分たつと、自動的に電源が切れます。

ピー

予熱完了後にレベルを切り替えるとき

レベルを押すたびに、切り替わります。

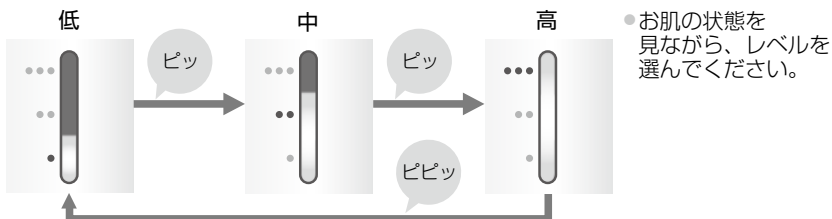

RF美容器を使う つづき

予熱完了後

肌にあてて動かす


肌にあててから、約10分後に、自動的に電源が切れます。

●途中でやめる場合は、電源を切ってください。

あてかた



- プローブ面とフレーム全体が肌に密着するようにあててください。
- プローブ面がフレームと同じ高さになるくらいの強さで押しあててください。(ヘッドが振動します)
- しっかりと押しあてないと、ヘッドが振動せず、RFや超音波の効果が得られません。

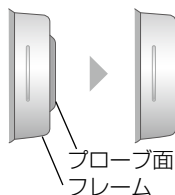

動かしかた

ピピピッ*


フェイスライン



口もと～こめかみ

約8分

ほおを下から上へ引き上げるように動かす
(①～⑫をくり返す)

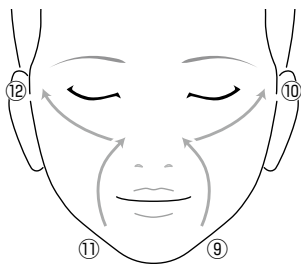

1つの矢印あたり約5秒

終わったら、ジェルを洗い落とす

お知らせ

- ヘッドが振動しているときに音（カタカタ音）がしますが、異常ではありません。




使
い
か
た

ピー

口もと 約2分

自動
電源
オフ

口もとをほうれい線に沿って、
引き上げるように動かす
(13～18をくり返す)

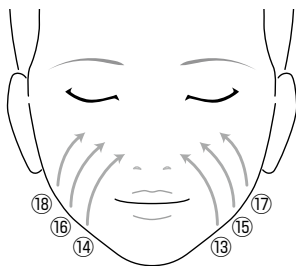

*自動電源オフ2分前をお知らせ

- ジェルを洗い落とした後、日頃お使いの基礎化粧品でケアしてください。
- 専用ジェルでなく、日頃お使いの化粧品を使った場合は、洗い流す必要はありません。

「ピピッピピッ」と鳴って、
振動が止まったら

ピピッ
ピピッ

次のいずれかをお知らせしていますので、プローブ面をあて直してください。

オーバーケア防止センサー
プローブ面をあて続けている
(約15秒)

密着センサー
プローブ面が肌に密着して
いない(約15秒)

上の状態が続くと、
電源が切れます。
(約1分後)


ピピッ
ピピッ
ピー



使い終わったら

- 使用後は、必ず本体とフレームをお手入れしてください。
- 電源が切れていることを確認してください。


フレームをはずす

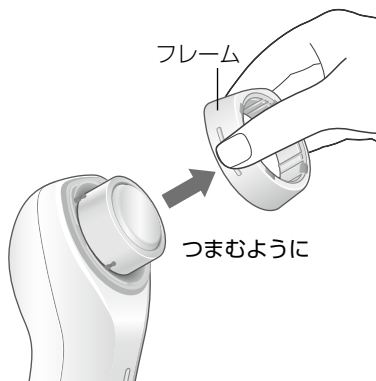

- フレームにジェルが付いてはすしにくい場合は、ジェルをふき取ってからはずす。

お手入れする



ティッシュなどで、ジェル・化粧品をふき取る

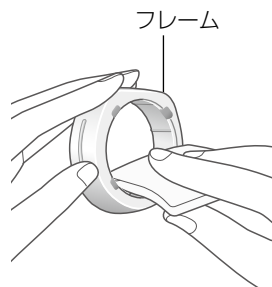

汚れが気になるとき.....

固形石けんをとかした水に浸した布をよくしぼり、ふく

- ジェルがすき間に入ったときは、ティッシュや綿棒などを使ってふき取る。

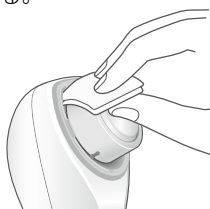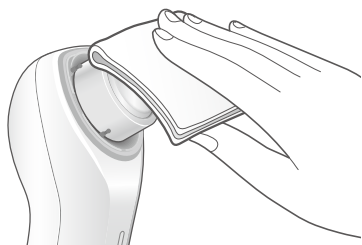


お願い


- 水洗いはできません。
- アルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使わないでください。
(故障や部品の割れ、変色などの原因)
- 付着したジェルや化粧品は、確実に落としてください。
(乾燥して固まる原因)

使い終わったら つづき

フレームをつける

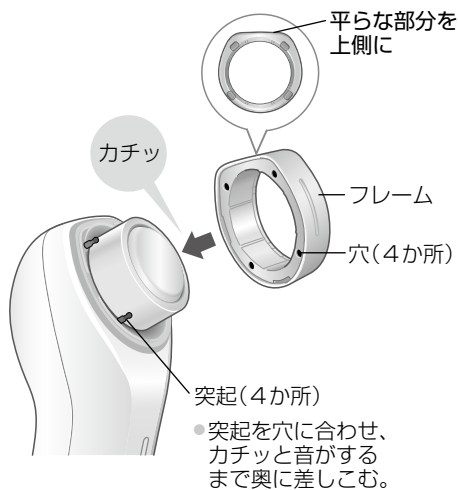

保管する

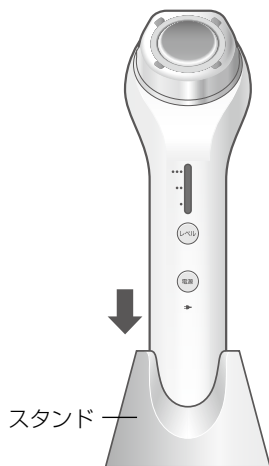

海外で使うとき

この製品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
●プラグアダプターでは、電圧の変換はできません。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2		C-2	
プラグの形状	 	●日本国内もこのタイプです。	 	
タイプ	B-3	BF(S-3)	O	
プラグの形状	 	 	  	アース

世界の電圧とプラグ

地域	国 / 地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3, BF, O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2, B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2, C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2, O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2, C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2, C-2, O

地域	国 / 地域	電 圧	プラグ
アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	110/230	B-3, BF
	タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, O
	台湾	110/220	A-2, O
	中華人民共和国	110/220	A-2, C-2, B-3, BF, O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
中南米	香港特別行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	240	C-2, B-3, BF
	アルゼンチン	220/225	C-2, BF, O
	プエルトリコ	120	A-2
中東・アフリカ	ブラジル	127/220	A-2, C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
	エジプト	220	C-2, B-3, BF
	クウェート	240	C-2, B-3, BF
	トルコ	220/230	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

使
い
か
た

必
要
な
と
き

よくあるお問い合わせ

Q

RFや超音波って、なに？

A

RF：Radio Frequency(ラジオ波)とも呼ばれる高周波のことです。
超音波：20 000 Hz以上の、人間には聞こえない音のことです。

Q

超音波が出ているかどうか、わからない。

A

超音波は約1秒おきに発生・停止をくり返していますが、肌にあてても感じることはできません。次の方法で確認してください。


1 プローブ面に、水を数滴たらす

- プローブ面は、水平にする。
- ジェルでの確認ではわかりづらいため、水をおすすめします。
- プローブ面以外に水をかけないでください。



2 電源を入れる

3 プローブ面を指で軽く押し続ける
(プローブ面がフレームと同じ高さになるくらいまで)

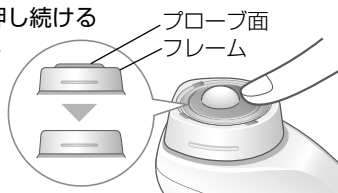

4 確認する

- 正常な場合、水滴が振動します。
(約1秒ごとに振動をくり返します)

振動を確認



Q

手やボディにも使っているの？

A

ほお、フェイスラインの美容目的のみにお使いください。



Q

1日に何回使っても、大丈夫？






A

- 1日1回までです。
1日以上あけて、週3回まででお使いください。
- 過度な使用は、かえって肌に良くありません。

ジェル・化粧品	Q	どうしてジェルや化粧品をつけるの？
	A	RFや超音波を肌に伝えるためです。 (プローブ面と肌の間に空気があると、RFや超音波が伝わりません)
	Q	他のジェルや乳液などを代用しても、大丈夫？
	A	専用ジェルをおすすめしますが、美容液や乳液、ジェル・ゲルタイプはお使いいただけます。[→ P.16]
電池	Q	使用後に使う基礎化粧品は、どんなものがいいの？
	A	日頃お使いのものを、使用後の肌の状態に合わせてお使いください。
	Q	電池はどのくらいもつの？
	A	3年程度(ただし、保証は1年)です。 ●フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。 (電池寿命は、使用・保管などの状態により大きく変化します)
こんなときは	Q	電池は交換できるの？
	A	お買い上げの販売店にご相談ください。 (ご自分で交換すると、故障の原因)
	Q	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫？
	A	リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。
	Q	ジェルがしみたり、肌にトラブルが起きたら？
	A	肌の状態が治るまで、使わないでください。(専門医にご相談ください) ●肌が敏感になっている可能性があります。 ●体調・ストレス・体質・内臓疾患によっても、トラブルが起こることがあります。
	Q	歯に痛みを感じたら？
	A	虫歯の歯がしみる場合があります。 虫歯が治るまでの間、使わないでください。 (専門医にご相談ください)

修理を依頼される前に

まず、ご確認ください。

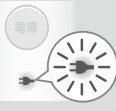こんなときは		ここを確かめてください
電源	 <p>電源を押しても動かない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電できていますか？ [→ P.13] ● ACアダプターは、抜いていますか？ [→ P.14]
	<p>充電しても数分しか使えない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 購入後、3年以上たっていないですか？ → 電池の寿命です。販売店にご連絡ください。 (故障の原因となるため、お客様では交換できません)
ランプ	 <p>使用中に点滅して動かなくなった</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体内部の保護機能がはたらき、異常停止しました。 → 一度電源を切り、再度電源を入れてください。くり返し起こる場合は販売店にご相談ください。
	 <p>使用中に消灯した</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 肌にあててから約10分後に、自動的に電源が切れます。 ● 予熱完了後、肌にあてない状態で約1分たつと、自動的に電源が切れます。 ● センサーがはたらきました。肌へのあてかたを確認してください。[→ P.18～19]
	 <p>充電時、つかない・消える</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電が完了すると、消えます。[→ P.13] ● アダプターや器具用プラグは、根元まで確実に差し込んでいますか？
	 <p>充電時、1秒間に2回点滅する</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電異常です。充電推奨温度(15℃～35℃)内で充電していますか？ → くり返し起こる場合は販売店にご相談ください。
温度	<p>本体が温かい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用中・充電中は多少温かくなりますが、異常ではありません。

以上の内容を確認しても直らないときは

電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプターを販売店へご持参ください。[→ P.29]

廃棄するときのお願い

この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭用ゴミとしては捨てないでください)

本製品の使用電池

- ・名称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- ・公称電圧：DC3.7 V ・数量：1 本




電池の取り出しかた

ドライバーを使い、次の手順で分解してください。

- ACアダプターは本体から抜き、充電残量がある場合は、電池を使いきっておいてください。

- ① 定格シールをはがす
- ②～④ の手順で分解する
- ⑤ 電池を取り出す

- 取り出した電池は⊕⊖端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁してください。

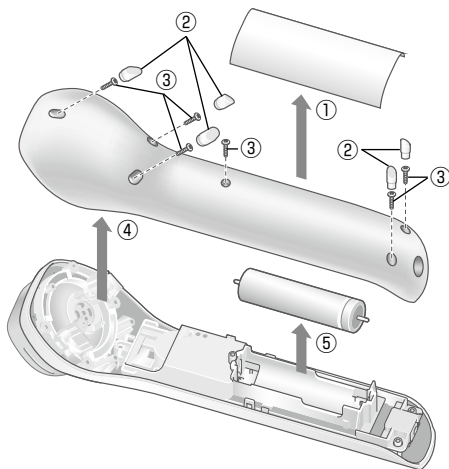

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、故障する原因になります。

別売品



ウォータークリアジェル
(EH-4R01)

メーカー希望小売価格：
2,200円(税抜)

- 掲載品の品番・仕様・価格は、2017年8月現在のもので、予告なく変更になることがあるのでご了承ください。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト
「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

定格・仕様

電源方式	充電式
定格電圧	AC 100-240 V 50-60 Hz
定格容量	20 VA
充電時間	約2時間(室温15℃～35℃)
使用電池	リチウムイオン電池
質量	本体 約260 g
消費電力	約10 W (充電時)

愛情点検

長年ご使用のRF美容器の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか？

- ・コードやアダプターが異常に熱い。
- ・本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。
- ・使用中に異常な音が出る。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
アダプターを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.26)
でご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、専用ジェルは消耗品ですので、
保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このRF美容器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話

()

—

お買い上げ日

年

月

日

●製品名 RF美容器

●品 番 EH-SR70

●故障の状況 できるだけ具体的に

必要と
とき

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。
また、個人情報をご提供いただく場合、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキューナナ
受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ
0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合

03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(バケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

0417

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2017

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

RF美容器 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-SR70		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、専用ジェルは除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>見 本</div> ご住所 お名前 電 話 () - 様		
※ 販 売 店	住所・販売店名 電 話 () -		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。