


Panasonic®

取扱説明書

音波振動ハブラシ ドルツ

家庭用

品番 EW-DL58
EW-DL38

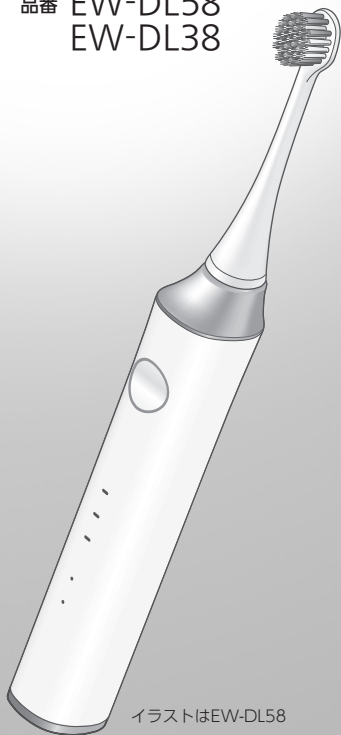

イラストはEW-DL58



水洗いOK*

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

この取扱説明書はWEBからも確認できます。

ダウンロード ↓



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をしてください。
(詳しくはP.27をご参照)

※充電器は除きます。

お好みの
ブラシとモード

を組み合わせ、
目的に合わせた
オーラルケアを！

EW-DL58

日常使い

スペシャルケア

歯周ポケット
ケア



極細毛ブラシ
(コンパクト) + NORMAL

▶ P.18

歯面ケア
(歯垢除去、
ステイン*ケア)



クリーン&ホワイト
ブラシ + NORMAL

▶ P.18

歯周ポケット
ケア



極細毛
ポイント磨き
ブラシ + NORMAL

▶ P.19

歯ぐきケア



極細毛ブラシ
(コンパクト) + GUMCARE

▶ P.19

EW-DL38

日常使い

歯周ポケット
ケア



極細毛ブラシ
(コンパクト) + NORMAL

▶ P.18

歯面ケア
(歯垢除去、
ステイン*ケア)



クリーン&ホワイト
ブラシ + NORMAL

▶ P.18

* SOFTモードについては、P.16をご参照ください。

■ジェットウォッシャーもチェック

ジェット水流は、歯ブラシでは届きにくい汚れを、
すみずみまでケアします

<https://panasonic.jp/teeth/jetwasher.html>


掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることが
あります。ご了承ください。



歯間の食べかすを
弾き出す



歯周ポケット内の
汚れまで洗い流す

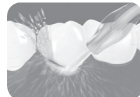

心地よい刺激が
歯ぐきを効果的にケア



もくじ

安全上のご注意	4
お使いになる前に	9
各部のなまえ	10
機能紹介	12
充電のしかた	13
基本の使いかた	15
磨きかたのポイント	18
使い終わったら	20
よくあるお問い合わせ	22
別売品	23
修理を依頼される前に	24
廃棄するとき	26
海外で使うとき	27
定格・仕様	27
保証とアフターサービス	28
保証書 裏表紙	

はじめに

使いかた

こんなときは

必要なとき


本書内の **i** マークは、「お知らせ」や
「お願い」事項を示します。


安全上のご注意 必ずお守りください


▶▶▶次ページにつづく

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる場合があります。


警告

電源について



- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない（感電やけがの原因）
- 充電器（本体ガイドは除く）は水につけたり、水洗いしない
- 充電器は風呂・シャワー室で使用しない
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねて使用する、重いものを載せる、挟み込む など

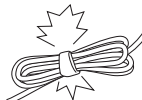

- 電源プラグにピンやゴミを付着させない（感電やショートによる火災などの原因）
- 専用の充電器以外は使用しない
また、専用の充電器を他の商品に使用しない（やけどやショートによる火災などの原因）



- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない（たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因）



- 交流100-240 Vで使用する
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む（火災や感電の原因）
- 充電器を掃除するときは、電源プラグをコンセントから抜く（感電やけがの原因）
- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する（湿気などで絶縁不良になり、火災の原因）
→ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



警告

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

本体、充電器が

- ・変形したり、異常に熱い
- ・こげ臭いにおいがする
- ・充電、使用中に異常な音がる

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

本製品は



- 火への投入・加熱をしない
高温での充電・使用・放置・保管をしない
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理はしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 廃棄時以外は分解しない
(火災・感電・けがの原因)

トラブルを防ぐために



- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やけがの原因)

注意

歯や歯ぐきを傷めないために



- やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤は使用しない
- 歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてない
- 本体・ブラシのプラスチック部分を歯にあてない
- 自分で操作ができない方には使用させない
- 口腔内の感覚が弱い方は使用しない
(けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因)



- 歯周病の疑いがある人・歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医に相談のうえ、使用する
(けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因)

本製品は



- お口のお手入れ以外には、使用しない
(けがの原因)
- ブラシは家族や他人と共用しない
(感染や炎症の原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

次のことも注意する




- 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)

- 収納時に電源コードを充電器に巻きつけない
(電源コードに負荷がかかり断線し、
ショートによる火災などの原因)



- 充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに電源プラグを持って抜く
(感電やショートによる火災などの原因)

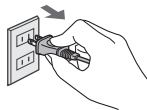

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

⚠ 危険



- 他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で使用・放置をしない
- チューブをはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

⚠ 警告



- 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
→ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に
ご相談ください。



- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水
などのきれいな水で十分洗う
(目に障害を与える原因)
→ すぐに医師の治療を受けてください。

⚠ 注意



- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、
水道水などのきれいな水で洗い流す
(皮膚がかぶれたりする原因)

お使いになる前に

この製品は

ヨコ約31 000ブラシストローク/分で音波振動*する電動ハブラシです。

*音波領域内での振動

歯ぐきの出血について

健康な歯ぐきでも、これまでになかった刺激を与えたことで、使いはじめに出血する場合があります。1～2週間で出血は止まりますが、2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常(歯周病など)があることも考えられますので、使用を中止し歯科医に相談してください。


各部のなまえ

<EW-DL58>


極細毛ブラシ(コンパクト) (P.18,19)	クリーン&ホワイトブラシ (P.18)	極細毛ポイント磨き ブラシ (P.19)
毛先が 細い毛	両端が長い エッジ形状	
識別リング (すべてのブラシに付属)		

<EW-DL38>



極細毛ブラシ(コンパクト) (P.18)	クリーン&ホワイトブラシ (P.18)
毛先が 細い毛	両端が長い エッジ形状
識別リング (すべてのブラシに付属)	

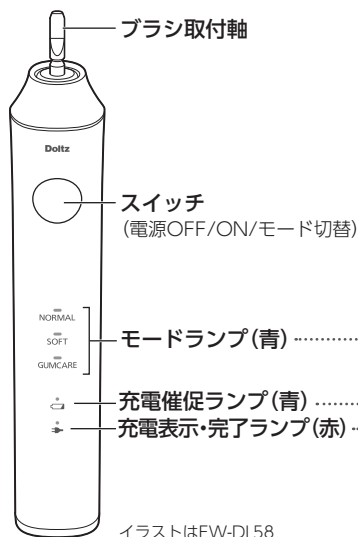


<EW-DL58>

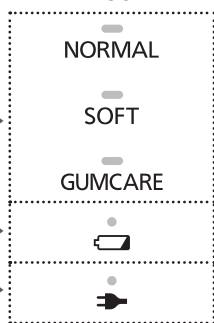


ブラシスタンド

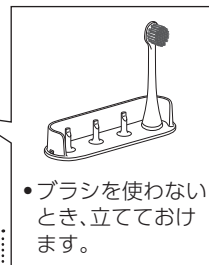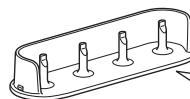

<EW-DL38>

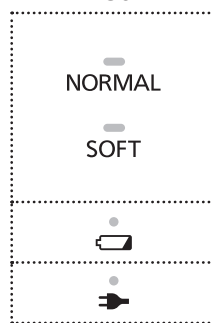

充電器

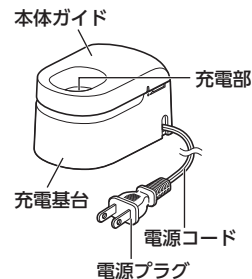

ブラシの交換時期について

ブラシは消耗品です。
ブラシが変形していなくても、衛生上、約3か月を目安に新しいブラシと交換してください。
また、3か月以内でも、毛先が広がった場合は交換してください。

機能紹介

押しつけ防止センサー

歯や歯ぐきを傷つけない磨きかたにつながるよう、ブラシを押しつけすぎると、「ピピピ」と音でお知らせします。

- この機能が働くモードはNORMAL と SOFTのみです。
- センサーのON/OFFの設定を切り替えることができます。
充電中にスイッチを2回(5秒以内)押ししてください。(初期設定ON)


■設定完了音

ON→OFFのとき:「ピーー」(長音)

OFF→ONのとき:「ピー」(短音)

30秒お知らせタイマー

約30秒ごとに、1回一時停止して再び動き出すことで、磨き時間の目安をお知らせします。

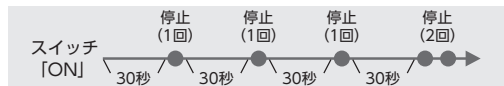

約2分ごとに、2回一時停止して再び動き出します。

- この機能はNORMALモード/SOFTモードのみです。

ソフトスタート

高速振動に慣れるために、スイッチを「ON」にしてから約2秒かけて振動を強くします。

モード記憶

最後に使用したモードが記憶されます。

- スイッチを「ON」にすると、前回使用したモードで使用できます。


充電のしかた

▶▶▶次ページにつづく

準備 充電器を水平で安定したところに置く

1
.....

本体を正面に向け、充電部にまっすぐ差し込む

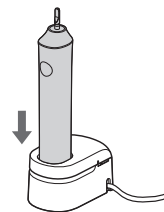

- 本体が傾いたり、充電部に本体底面が接触していないと充電できません。

■充電時期の目安について

充電時期の目安を音とランプでお知らせします。

- 充電残量が少ない状態でスイッチを「OFF」にすると、「ピー、ピー」という音と同時に充電催促ランプが点滅します。
- 充電催促ランプは約5秒後に消灯します。

充電催促時



点滅(1回/秒)



- 充電推奨温度は5℃～35℃です。
推奨温度外では、充電しない場合があります。


はじめに

使いかた

充電のしかた (つづき)


2

電源プラグをコンセントに差し込む

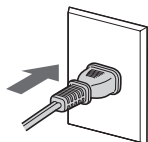

約17時間で
充電完了

(電池の残量により、
充電時間は変化します)

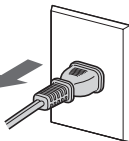

3

➡ (充電表示・完了ランプ) が消灯したら
電源プラグをコンセントから抜く
(安全および省エネのため)

■充電中のランプ表示

充電中	充電完了時	充電異常時
点灯	消灯	速く点滅 (2回/秒)

■充電完了確認方法

充電完了状態で本体を充電器から抜き差しすると、➡ (充電表示・完了ランプ) が点灯し、5秒後に消灯します。

- 17時間以上充電しても本体に支障はありません。

■フル充電したときに使える時間

モード	時間
NORMAL SOFT GUMCARE*	約90分

(周囲の温度や使用条件により
異なります)

※EW-DL58のみ

- i**
- ➡ (充電表示・完了ランプ) が速く点滅 (2回/秒) するときは、充電異常、または本体が正しく充電器に差し込まれていないことが考えられます。充電推奨温度の範囲内であることを確認し、本体を正しく充電器に差し込んでください。
 - 初めてお使いのときや半年以上使われていなかったときは、充電時間が変化する場合があります。また、充電を開始して数分間、➡ (充電表示・完了ランプ) が点灯しないことがありますが、そのまま充電を続けると点灯します。

基本の使いかた


▶▶▶次ページにつづく

準備 目的に合わせて、ブラシを選ぶ (P.2~3)

1

ブラシを本体に取りつける

数mm程度すぎますが
空きますが、正常な
状態です。

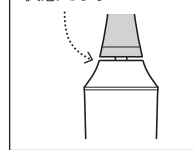


ブラシの正面と
本体の正面を
合わせる



① ブラシの向きに注意して 確実に取りつける

- ブラシはひねりながら取りつけないでください。(ブラシや本体が破損する原因)
- ブラシ取付軸は力を加えると動きますが、ブラシの振動に必要なもので正常な状態です。

② ブラシに歯磨き剤を少量つける

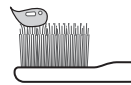

- 使用推奨温度は5℃~35℃です。推奨温度外では動かない場合があります。
- 整髪料やハンドクリームなどが、本体に付着しないようにしてください。(外観を損なう原因)

使いかた

基本の使いかた (つづき)


2

歯磨き剤などの飛び散りを防ぐため
お口の中にブラシを入れてから、スイッチを「ON」にする



■お好みのモードに切り替える


- スイッチを「ON」にすると、前回使用したモードからスタートします。
- モードを切り替えたいときは、5秒以内にスイッチを押してください。(選択されたモードランプ(青)が点灯します)

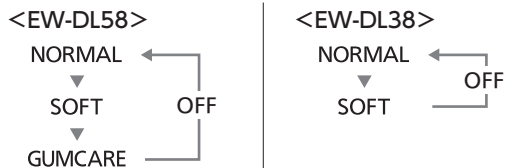

5秒以内に押して切り替え

3

軽く歯にあてて動かす

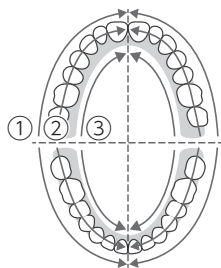

■磨き順序の例

お口の中を上下、左右で4分割にし、1か所を以下の順に、約30秒かけて磨きます。

- ① 歯の表側
- ② 噛み合わせ面
- ③ 歯の裏側

残り3か所も同じように繰り返します。

- 約2分間でお口の中をむらなく均等に磨くことができます。

30秒お知らせタイマー機能 ▶ P.12

4

唾液などの飛び散りを防ぐため
お口の中にブラシを入れたまま、
スイッチを「OFF」にする



- 1つのモードで、5秒以上動かしたあとにスイッチを押すと「OFF」になります。5秒以内にスイッチを押すと、モードが切り替わります。(P.16)

ドルツアプリ(無料)を使うと、おすすめの方法が確認できます。
※本製品は、アプリとの連動はできませんが、アプリの一部機能のみ利用できます。

詳しくはホームページをご覧ください。

https://panasonic.jp/teeth/howto/doltz_app.html



- ① • NORMALモードで磨き感が強すぎるときは、SOFTモードをご使用ください。
- GUMCAREモードは歯ぐきケア用のモードです。歯磨き後に使用してください。

- 使いはじめは、音波振動により、くすぐったさなど違和感を覚える場合がありますが、数回の使用で慣れます。
- ブラシを歯や歯ぐきに押しつけすぎると、「ピピピ」と音でお知らせします。(P.12)

磨きかたのポイント

目的やケアしたい部分に応じて、あてかたや動かしかたを変えましょう。

EW-DL58 EW-DL38

日常使いに

歯周ポケットケア

極細毛ブラシ(コンパクト)



歯周ポケットや歯と歯ぐきの境目などを中心に磨きたいとき

- 歯面や噛み合わせ面も磨けます。

おすすめモード
NORMAL

歯面ケア

クリーン&ホワイトブラシ



歯面や噛み合わせ面の歯垢やステインを除去したいとき

- 歯周ポケットには適していません。
- すべてのステインが取りきれないわけではありません。



おすすめモード
NORMAL

■あてかた/動かしかた

ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあて、ゆっくりと動かす。

歯面/
噛み合わせ面

●90°にあてる。

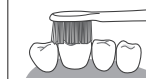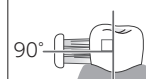


前歯の裏側/
歯並びの悪いところ



- タテにあてる。
- 角度に沿ってあてる。

歯周ポケット/
歯と歯ぐきの境目

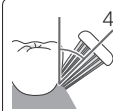

- 極細毛ブラシで磨く。
- 45°にあてる。
- 毛先が歯周ポケットに入り込むように軽く押しあて、ゆっくりと動かす。

EW-DL58

スペシャルケアに

歯周ポケットケア

極細毛ポイント磨きブラシ



歯間などの歯周ポケットの汚れを集中的にケアしたいとき

奥歯の奥や歯並びの悪いところを磨きたいとき

おすすめモード
NORMAL

歯ぐきケア

極細毛ブラシ(コンパクト)



歯ぐきをケアするとき

- 歯磨き剤は使用しないでください。

おすすめモード
GUMCARE

■あてかた/動かしかた



ブラシの先端が歯ぐきに軽く触れる程度にあて、ゆっくりと動かす。

奥歯の奥



- 奥歯の奥の歯と歯ぐきの境目に軽くあてる。

歯並びの悪いところ

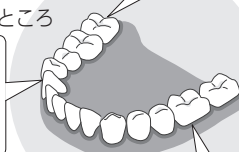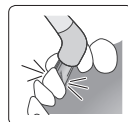

歯周ポケット/
歯と歯ぐきの境目



- 45°にあてる。
- 歯と歯ぐきの境目に沿ってゆっくりと動かす。

■あてかた/動かしかた

ブラシの先端が歯ぐきに軽く触れる程度にあて、ゆっくりと動かす。



●45°にあてる。

- 特に気になるところは、念入りにあてる。(1か所約10~20秒目安)
- 歯磨き後に、1日1回約2分間の使用をおすすめします。

使いかた

使い終わったら

使い終わったら、清潔に保つよう掃除をしてください。

- 洗剤を使用する場合は台所用中性洗剤を使用してください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
(故障や部品の割れ・変色などの原因)



ブラシと本体の掃除をするときは、ブラシを取りはずす
ブラシ取付軸に対し、まっすぐ引き抜く。

ブラシ

水洗いする



ブラシの内側や底面部の
汚れは十分に洗い流す。

- ブラシの毛を強く引っ張らない、無理に広げない。
- 80℃以上のお湯は使用しない。
(ブラシが破損する原因)

- 識別リングのはずしかた・取りつけかたは (P.22)

本体

水洗いする



防水ゴム


- 防水ゴムは、傷つけたり、固いものでこすらない。
また、本体を水の中に放置しない。
(内部に水が入る原因)
- 40℃以上のお湯は使用しない。
(本体が破損する原因)

掃除後は

ブラシ・本体についた水分をふき取る
ぬれたまま充電しない。(汚れの原因)


▶▶次ページにつづく

充電器の掃除をするときは・・・
電源プラグをコンセントから抜く
本体ガイドをスライドさせて取りはずす

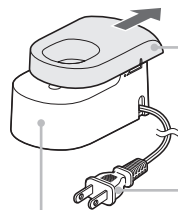

充電基台

汚れを乾いた布でふき取る

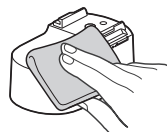


本体ガイド

水洗いし、水分をふき取る
• 本体ガイド以外は水で洗わない。




電源プラグ

金属部の間をからぶきする
• 6か月に一度は行う。

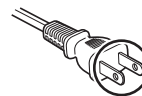


ブラシスタンド

水洗いし、水分をふき取る

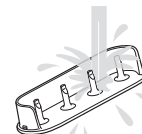

■本体ガイドの取り付けかた

- ① 縦線の位置を目安にかぶせる
- ② カチッと音がするまでスライドさせる

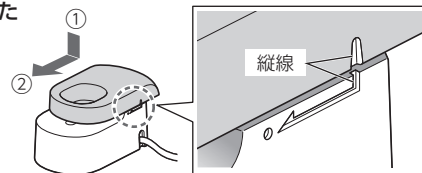

使いかた

使い終わったら (つづき)

識別リングについて

- 識別リングがない状態で使用しても性能に影響はありません。
- 別売替ブラシには、色つきの識別リングが同梱されています。
1台の本体を家族で使う場合など、複数のブラシを区別できます。




識別リング

- 識別リングは強く引っ張らないでください。(破損の原因)

〈はずしかた〉
親指でなで上げる



〈取りつけかた〉
ブラシの凹部(みぞ)に識別リングの
内側をかぶせるようにはめ込む

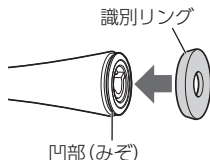

よくあるお問い合わせ

使用中	Q	30秒に1回停止するのはなぜ？
	A	約30秒ごとに磨き時間の目安をお知らせします。 (30秒お知らせタイマー機能 → P.12,17)
電池	Q	長期間使わなくても、大丈夫？
	A	電池が劣化する場合がありますため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。
	Q	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫？
A	リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。	

別売品

お求めの際には「本体品番 (EW-DL58・EW-DL38)」と「替ブラシの品番」をご確認のうえ、お買い求めください。

- 付属ブラシ以外も、お口の状態や目的に合わせて替ブラシを選べます。

別売替ブラシ

製品名	品番	本数 ^{*1}
極細毛ブラシ (コンパクト)	EW0800-W	2本
グリーン&ホワイトブラシ	EW0820-W	2本
極細毛ポイント磨きブラシ ^{*2}	EW0861-W	2本
こども用薄ヘッドブラシ ^{*3}	EW0840-W	2本

※1 付属品は1本です。

※2 EW-DL58に付属しています。

※3 この商品には付属していません。

WEBで確認 /

「替ブラシ交換品互換一覧」が
WEBから確認できます。



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



充電器などは、お買い上げの販売店にご相談ください。




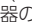

使
い
か
た

こ
ん
な
と
き
は

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をしてください

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理を依頼される場合は、保証書・本体・充電器を販売店へお持ちください。
(詳しくはP.28)

こんなとき		考えられる原因と処置
充電	 <p>ランプが点灯しない</p> <p>充電表示・完了ランプ</p>	<p>購入直後、またはしばらく使用していなかった →充電を開始して数分間、点灯しないことがあります。しばらくそのまま充電を続けると点灯に変わります。しばらくしても点灯に変わらない場合は、販売店に修理を依頼してください。</p> <p>本体が、充電器の正しい位置に差し込まれていない →本体ガイドが、正しく取り付けられているか確認してください。(P.21) →本体の底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ差し込み、が点灯したことを確認してください。(P.13~14)</p>
	 <p>ランプが速く点滅する(2回/秒)</p>	<p>充電時の温度が低すぎる、もしくは高すぎる →充電推奨温度の5℃~35℃で充電してください。充電推奨温度で充電しても点滅する場合は、販売店に修理を依頼してください。</p>
	<p>フル充電しても数分しか使えない</p>	<p>本体が、充電器の正しい位置に差し込まれていない →本体ガイドが、正しく取り付けられているか確認してください。(P.21) →本体の底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ差し込み、が点灯したことを確認してください。(P.13~14)</p> <p>充電時間が短い →フル充電には約17時間かかります。(P.14)</p>
	 <p>ランプが点滅せずに止まる</p> <p>充電催促ランプ</p>	<p>電池の寿命(約3年) →交換してください。(電池の寿命と交換 → P.25) お買い上げの販売店にご相談ください。</p>

こんなとき	考えられる原因と処置
使用中	<p>スイッチを押すと振動が徐々に大きくなる</p> <p>▶ ソフトスタート機能が働いている (P.12) →そのまま使用してください。</p>
	<p>ブラシ取付軸が動く</p> <p>▶ 正常な状態です (P.15)</p>
	<p>「ビビビ」と音が鳴る</p> <p>▶ 押しつけ防止センサーが働いている (P.12) →少し口を開けて軽く歯にあててください。うるさいと感じる場合などは、センサーをOFFにできます。(P.12)</p>
	<p>押しつけ防止センサーが切り替えられない</p> <p>▶ 電池残量が少ない →電池残量が少ないと設定できない場合があります。しばらく充電してから再度設定してください。</p>
	<p>動かない</p> <p>▶ 電池の寿命(約3年) →交換してください。(電池の寿命と交換 → 下記) お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>▶ 使用時の温度が低すぎる、もしくは高すぎる →使用推奨温度の5℃~35℃で使用してください。</p>

電池の寿命と交換

- 寿命** 3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)
- 交換** ご自分ではできません。(防水機能が維持できず、故障の原因)お買い上げの販売店にご相談ください。

＼ WEBで確認 /
電池の交換・費用は、WEBから確認できます。



廃棄するとき

リチウムイオン電池リサイクルにご協力を

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭ゴミとしては捨てないでください)

本製品の使用電池

名称	円筒密閉型リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
公称電圧	DC3.6 V
数量	1本




Li-ion 20

電池の取り出しかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 1 スイッチを「ON」にして、電池を使い切る
- 2 ドライバーを使い、①～④の手順で分解し、電池を取り出す
- 3 電池の⊕⊖端子にテープを貼って絶縁する
(端子のショートを防ぐため)

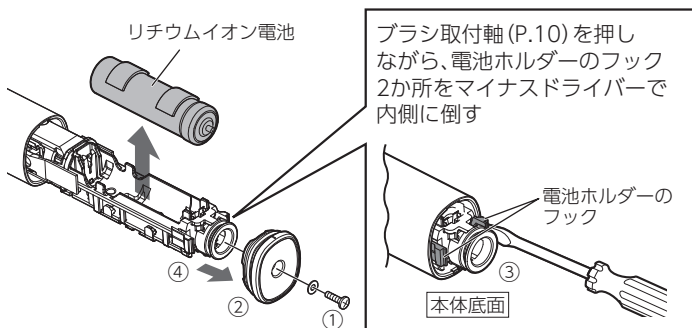

海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。(変圧器は不要です)

海外のプラグタイプについて参考情報をWEBに掲載しています。



ダウンロード ↓

定格・仕様

電源方式	充電式	
充電時間	約 17時間 (室温5℃～35℃)	
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	
定格消費電力	1 W	
使用電池	リチウムイオン (Li-ion) 電池 (DC3.6 V 680 mAh)	
大きさ	本体	約 幅2.7×奥行3×高さ21.6 cm (ブラシ含む)
	充電器	約 幅4.7×奥行7.7×高さ4.3 cm
質量	本体	約 95 g (ブラシ含む)
	充電器	約 145 g

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、登録をお願いいたします。

こんなときは

必要なとき

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	-	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.24~25)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	音波振動ハブラシ ドルツ
●品番	EW-DL58・EW-DL38
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間(ただし、ブラシは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この音波振動ハブラシの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル  パナは ロクキョウナ
0120-878-697 受付時間
 9:00～18:00 月～土曜日
 (祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号をご利用いただけない場合 ■FAXフリーダイヤル
06-6907-1187  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル  パナは イイヨ
0120-878-554

■上記電話番号をご利用いただけない場合 **03-6633-6700**


<https://panasonic.jp/support/repair.html>



・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。[0422]
 (パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
 ・ご利用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
 ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについてはP.29をご覧ください。

愛情点検 長年ご使用の音波振動ハブラシの点検を!

	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードや電源プラグが異常に熱い。 本体・充電器が変形していたり、こげ臭いにおいがする。 使用中に異常な音や振動がする。 	事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。
		ご使用中止	

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部
 〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
 © Panasonic Corporation 2022

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でまたの場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不相当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 ただし、車載を目的とした機器を除く
 (ホ) 一般家庭用として使用された場合や指定外の動作環境
 (ヘ) 本書のご記入
 (ト) 本書にお記入のない場合、
 (チ) 持込修理の場合の送料等はお客様のご負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。



- 修理メモ**
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
 - ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
 - ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
 - ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

音波振動ハブラシ ドルツ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-DL58・EW-DL38			
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、消耗品は除く)			
※ お買い上げ日	見 本		日	
※ お客様			ご住所	様
お名前			電話 () -	
※ 販売店	住所・販売店名			
	電話 () -			

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。