

# Panasonic®


## 取扱説明書

## ジェットウォッシャー ドルツ

家庭用

品番 EW-DJ75

保証書付き

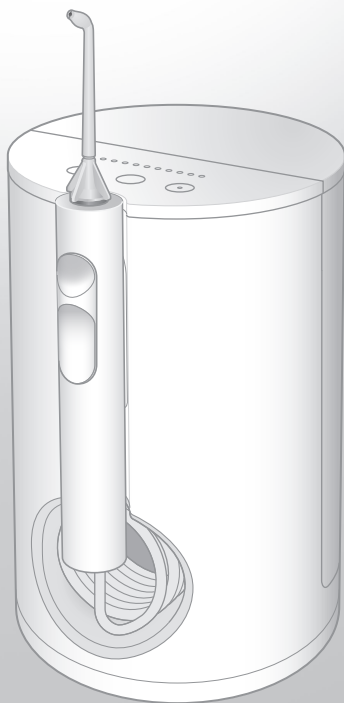

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト  
「**CLUB Panasonic**」で  
「商品登録」をしてください。  
(詳しくはP.20をご参照)

歯ブラシではケアしにくい部分の汚れを

## 水流とポイント磨きノズル・ 舌磨きノズルで すみずみまでケア

◆ ポイント  
磨き

◆ 舌磨き



◆ 歯間洗浄

◆ 歯周ポケット洗浄



目的に合わせた  
ケアを (P.13~14)

歯ブラシでは届きにくい  
「歯と歯の間」や「歯周ポケット」  
に入り込んだプラーク（歯垢）を  
強力な水流で洗い流し、さらに  
舌表面の汚れまでケアします。

## もくじ

安全上のご注意	4	はじめに
使用上のお願い	7	
お使いになる前に	7	
各部のなまえ	8	

使いかた	10	使いかた
ケアのポイント	13	
使い終わったら	15	

修理を依頼される前に	18	こんなときは
別売品	19	


定格・仕様	20	必要なとき
保証とアフターサービス	21	
保証書	裏表紙	


本書内の **i** マークは、「お知らせ」や  
「お願い」事項を示します。

# 安全上のご注意 必ずお守りください


▶▶▶次ページにつづく


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。


安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる場合があります。

## 警告


### 電源について

-  ●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない  
(感電やけがの原因)
- 本体は水につけたり、水洗いしない
- 本体は風呂・シャワー室で使用しない
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねて使用する、重いものを載せる、挟み込む など

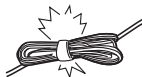

- 電源プラグにピンやゴミを付着させない  
(感電やショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない  
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)


-  ●交流100-240 Vで使用する
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)
- 掃除の際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
(感電やけがの原因)
- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)  
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。




火災、感電、やけど、  
けがなどを防ぐために



### 異常・故障時には


-  ●直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く  
(火災・感電・けがの原因)
- <異常・故障例>  
本体が
  - ・変形したり、異常に熱い
  - ・こげ臭いにおいがする
  - ・使用中に異常な音がする→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 本製品は

-  ●改造・分解・修理しない  
(発火や異常動作によるけがの原因)  
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 落としたり、ぶつけたりしない  
(感電や発火の原因)



### トラブルを防ぐために

-  ●乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない  
(取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やけがの原因)

## 安全上のご注意 (つづき)

### ⚠ 注意

けがなどを防ぐために



#### 歯や歯ぐき、舌を傷めないために

- 自分で操作ができない方には使用させない
- 口腔内の感覚が弱い方は使用しない  
(けがをしたり、歯や歯ぐき、舌を傷める原因)
- 歯周病の疑いがある人・歯や口腔内に気になる症状がある人は歯科医に相談のうえ、使用する
- 舌磨きノズルを使うときは次の点を守る
  - ・ 子供には使用させない
  - ・ 強くこすらない・奥に入れすぎない
  - ・ 舌に炎症(赤くなるなど)が発生した場合は使用を中止し、3日経っても炎症が続く場合は医師に相談する  
(けがをしたり、歯や歯ぐき、舌を傷める原因)

#### 本製品は

- 口腔洗浄以外の目的に使用しない  
(目や鼻、耳、のどなどに水流をあてると、けがの原因)
- タンクに40℃を超える温水を入れない  
(やけどの原因)
- ノズルは家族や他人と共用しない  
(感染や炎症の原因)

#### 次のことも注意する


- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない  
(電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)
- 使用時以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く  
(電源コードに負荷がかかり断線し、やけど、感電、ショートによる火災などの原因)
- 使用後はタンクとノズルの掃除をし、乾燥させる  
(カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因)

## 使用上のお願ひ

水道水かぬるま湯以外(塩・洗口剤・薬品など)はタンクに入れないでください  
(故障の原因)



ドライヤーやファンヒーターなどの熱で本体を乾燥しないでください  
(部品の变形・故障の原因)

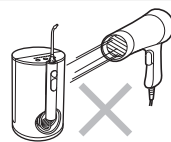

ご使用後は、湿気の少ないところで保管してください  
(故障の原因)

## お使いになる前に


この製品は

歯磨きと併用してお使いください。  
歯面に付着している歯垢は、水流だけでは除去しにくいので、必ず歯磨きが必要です。  
歯磨き後に水流で口の中を洗浄することをおすすめします。

#### 歯ぐきの出血について

健康な歯ぐきでも、これまでになかった刺激を与えたことで、使いはじめて出血する場合があります。1~2週間で出血は止まりますが、2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常(歯周病など)があることも考えられますので、使用を中止し歯科医に相談してください。


# 各部のなまえ

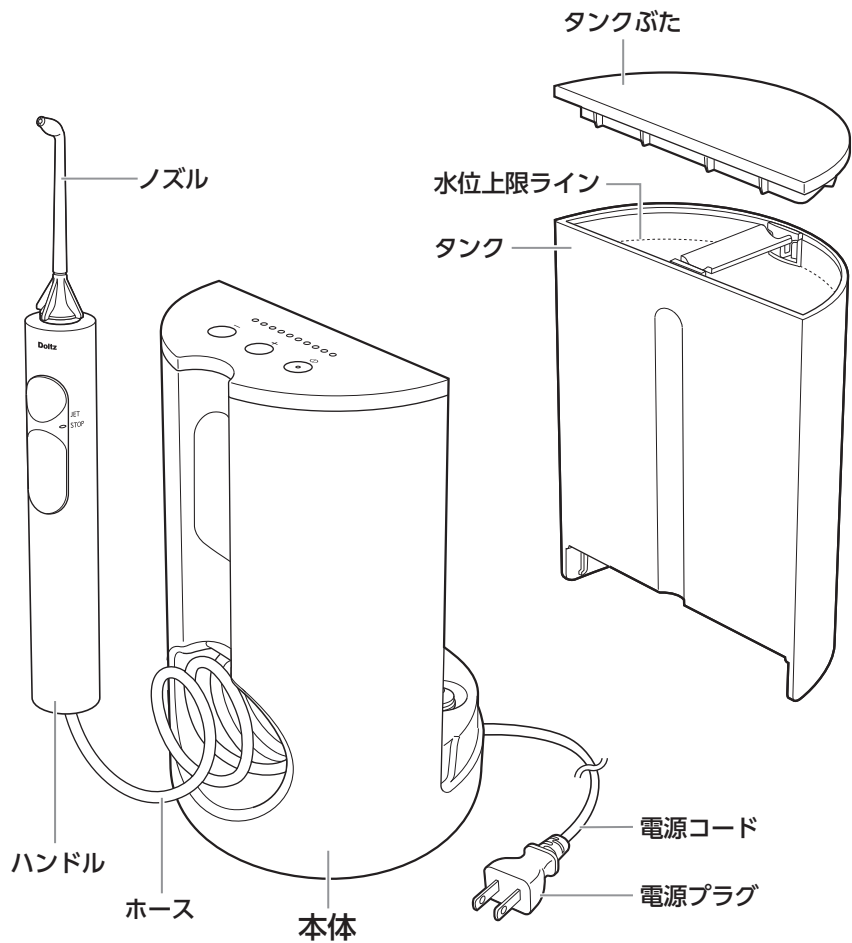

本体内部(ホースなど)、タンクに性能(水流)テストを行った際の蒸留水が付着している場合があります。


## 付属品

### ノズルスタンド

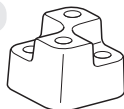

## 本体操作部

### 水圧レベル表示LED (10段階)

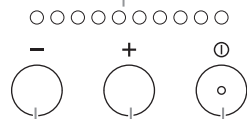


### 水圧調節スイッチ

### 電源スイッチ

## ハンドル操作部

### 止水吐水切替スイッチ


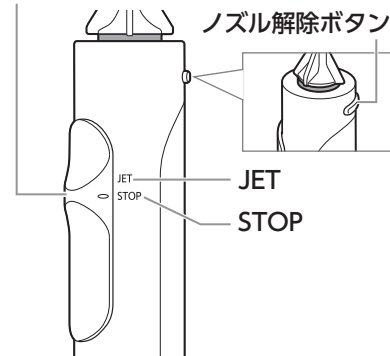


## ノズル (3本)

### 超音波水流ノズル

### ポイント磨きノズル

### 舌磨きノズル

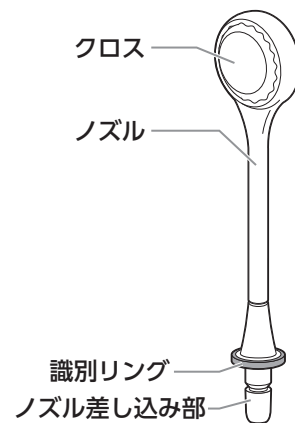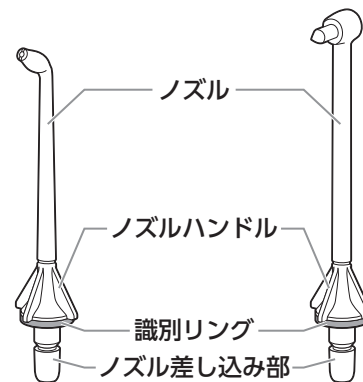


• ノズルは消耗品です。

## ■識別リングがはずれたら

ノズルと識別リング(どちら向きでも可)が斜めにならないように合わせて取りつける。


• 識別リングがない状態で使用しても性能に影響はありません。

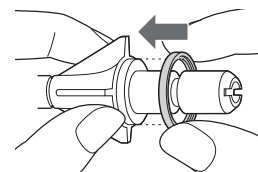

**準備** 本体を水平で安定したところに置く


1

電源プラグをコンセントに差し込み、給水する

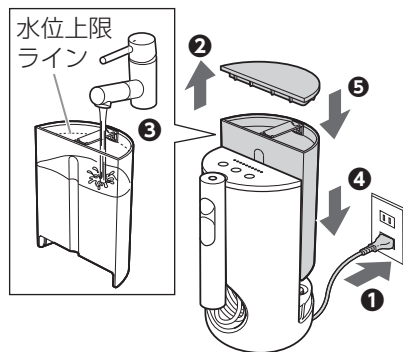

①電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源コードは左右どちらからでも出せます。

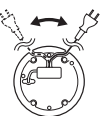

②タンクぶたを開ける


③タンクを取りはずし水を入れる  
・水位上限ラインを超えて水を入れないでください。

④タンクを本体にしっかり取りつける

⑤タンクぶたを閉める

2

ノズルを取りつけ、電源を入れる

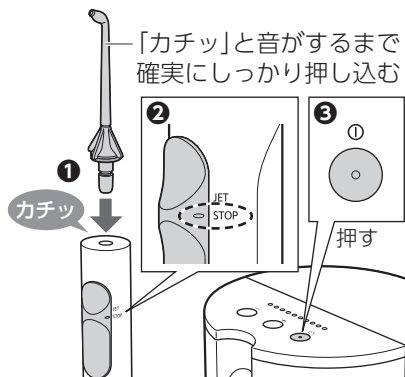

①ノズルを取りつける

- 目的に合わせて、ノズルを選んでください。(P.13～14)


②止水吐水切替スイッチが「STOP」になっていることを確認する

③電源スイッチ「○」を押し、電源を入れる

- 水圧レベル表示LEDが点灯します。
- 電源を入れてから約10分経つと電源が切れます。(切り忘れ防止機能)


3

水圧調節スイッチを押して、水圧レベルを選ぶ

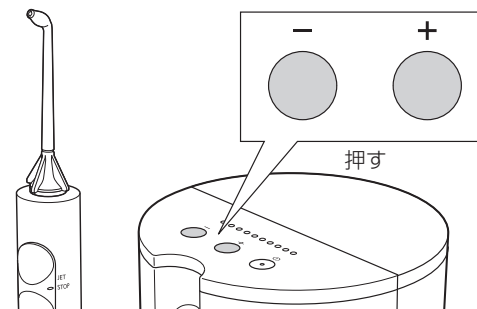

①ノズルを洗面ボウルに向けて  
止水吐水切替スイッチを「JET」にし、水を出す

止水吐水切替スイッチ

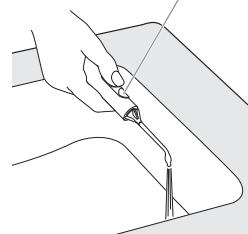

②水圧調節スイッチの「-」「+」を押し、お好みの水圧に調節する

- 「-」または「+」スイッチを長押しすると連続で水圧が変化します。



③止水吐水切替スイッチを「STOP」にし、いったん水を止める

■水圧レベル記憶機能について  
2回目以降は、前回選択した水圧レベルが記憶されます。

- i** 常に新しい水道水または、ぬるま湯を使用してください。
- 水が冷たく感じた場合は、40℃以下のぬるま湯を使用してください。
  - 本体内の水を抜き取る時以外、タンクに水が入っていない状態で電源スイッチ「○」を押して電源を入れないでください。(故障の原因)
  - 使用推奨温度は5℃～40℃です。推奨温度外では動かない場合があります。

- 1分以上水を止めるときは、電源スイッチ「○」を押して電源を切ってください。「STOP」のまま放置しないでください。(故障の原因)
- 使いはじめは、水圧レベル1からお使いください。



## 4

### お口の中を水流で洗う



Point /

洗面ボウルの上に  
顔を出す

①お口の中にノズルを入れる

②軽く口を閉じる

③止水吐水切替スイッチを  
「JET」にする


- 一時的に水を止めたいときは、止水吐水切替スイッチを「STOP」にしてください。
- 使用中でも水压調節スイッチを押すと、水压レベルを切り替えることができます。

■満水で使える時間の目安

約180秒間

(超音波水流ノズル、  
水压レベル10設定時)

■ノズルの向きを  
調節したいとき  
ノズルハンドルを  
回すことで、  
水流の方向を  
調節できます。

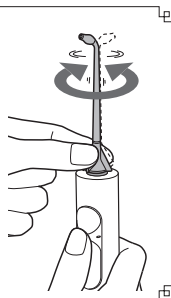

- i
- ノズルの先端を、歯や歯ぐきにあてないでください。(ポイント磨きノズル除く)
  - 刺激が強いと感じるときは、吐水切替スイッチを「STOP」にし、水压レベル1からご使用ください。

# ケアのポイント

▶▶▶次ページにつづく



## 超音波水流ノズル

水流でお手入れしたいとき

歯ぐきの状態が  
気になる部分は、  
弱い水压レベルで  
ご使用ください



### 歯間洗浄



- 歯と歯の間に水流をあてる。
- 歯の表側と裏側の両方からあてる。

### 歯周ポケット洗浄




- 歯と歯ぐきの間を狙って水流をあてる。
- 歯ぐきに沿ってゆっくり動かす。
- 歯の表側・裏側・奥歯の奥も洗浄する。

### 歯ぐきケア



- 歯ぐきに刺激を与える。

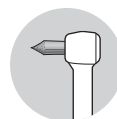

## ポイント磨きノズル

ブラシと水流で  
きれいにしたいとき

ブラシの毛先が歯に軽く触れる  
程度にあてる。

### 歯並びの悪いところ



- 歯ブラシでは届きにくい磨き残しの多いところに毛先をあてる。
- 歯間を中心に小刻みに動かす。

## 矯正器具まわり



### 超音波水流ノズル



- 矯正器具やブリッジのまわりに水流をあてる。



### ポイント磨きノズル



- 歯と矯正器具のすきまに差し込む。
- 毛先を小刻みに動かす。


## ケアのポイント (つづき)



### 舌磨きノズル

舌表面の汚れをクロスと水流できれいにしたいとき

#### 舌磨き

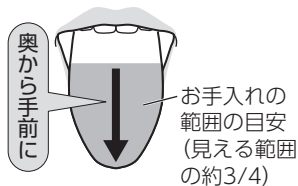

- 水圧レベル10を選ぶ。  
(舌の汚れを洗い流すため)
- 水を出しながら、舌磨きノズルを舌に軽くあて、奥から手前にゆっくりと一方向に数回動かす。
- 舌のお手入れは、1日1回までです。
- 強くこすると舌の表面を傷つけることがあります。
- 舌の奥深くまで入れないでください。
- 舌を前方に突き出しながら磨くと嘔吐(おうと)反射\*が起これにくくなります。  
※吐き気をもよおすこと

#### ■舌表面にクロスが引っかかったとき

ごくまれに舌表面にクロスが引っかかる場合があります。  
→クロスを少し奥に戻してはずしてください。

**i** ● 舌磨きノズルはクロスに水が残るため、使用後ノズルから水が垂れることがあります。水抜きのと、はずしてください。(P.16)

## 使い終わったら (毎回の掃除)


▶▶▶ 次ページにつづく

使い終わったら、清潔に保つよう掃除をしてください。

● 本体は水洗いできません。

1

水の飛び散りを防ぐために、  
お口の中にノズルを入れたまま、  
水を止める

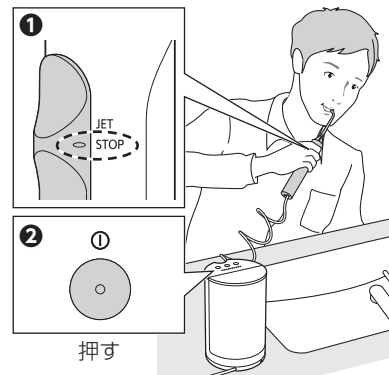


① 止水吐水切替スイッチを  
「STOP」にして水を止める

② 電源スイッチ「①」を押し、  
電源を切る

● 水圧レベル表示LEDが点滅し、  
30秒後に消灯します。

2

水を捨てる

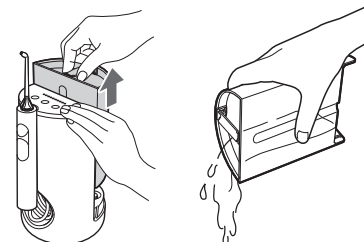

① タンクを取りはずし、水を捨てる

- タンクを取りはずすときは、本体を手で押さえてください。
- 必ず毎回捨ててください。

② タンクを洗う


- タンク内部の汚れは水筒用の柄のついたスポンジなどで水洗いしてください。(80℃以上の温水は使用しないでください)
- タンクのみ食器洗浄機で洗うことができます。  
ノズル、ノズルスタンド、タンクぶたは食器洗浄機で洗えません。

使いかた



## 3


清潔に保つために、  
本体に残っている  
水を抜き取る

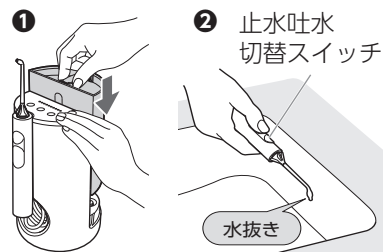

- ①タンクを取りつけ  
電源スイッチ「①」を押し、  
電源を入れる
- ②ノズルを洗面ボウルに向け  
止水吐水切替スイッチを  
「JET」にし、本体に残っている  
水を抜き取る
- ③水が出なくなったら止水吐水  
切替スイッチを「STOP」にし  
電源スイッチ「①」を押し、  
電源を切る



## 4

電源プラグを  
コンセントから抜く

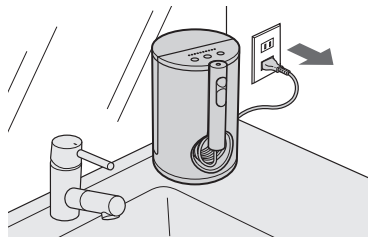

## 5


ハンドルとノズルを  
水洗いする

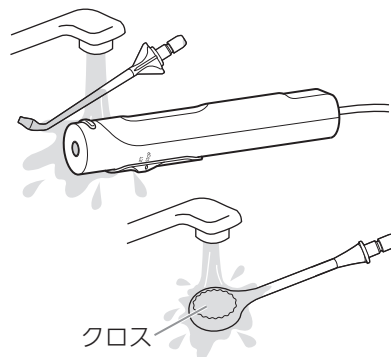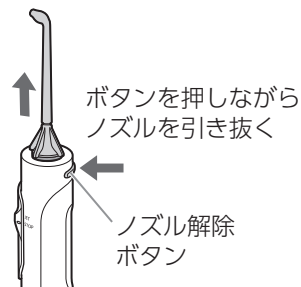

- 舌磨きノズルのクロスは、  
水で洗い流してください。
- 水切り時、洗面台などにぶつけない  
でください。


## 6

乾燥後、保管する

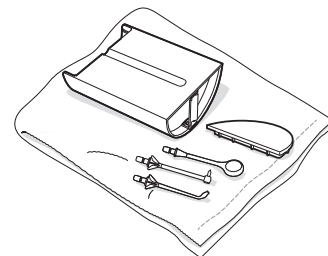

- ①水分をタオルなどでふき取り、  
風通しのよい日陰で乾燥させる
- ②保管する

- ハンドルとタンクは本体に装着し、  
ノズルはノズルスタンドに立てて  
ください。
- ノズルを2本以上立てるときは、  
ノズルどうしがあたらないように  
立ててください。

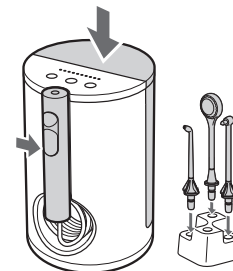


- i** 掃除のときは、シンナーやベンジン、アルコールなどを使用しないでください。(故障や部品の割れ・変色などの原因)
- 洗剤を使用する場合は、食器用中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによくすすいでください。

- ノズル、ノズルスタンド、タンクぶた、ハンドルは50℃以上の温水で洗わないでください。
- 舌磨きノズルのクロスは、先のとがったものや爪などでこすらないでください。

## 使い終わったら (気になるとき)

### ■本体の汚れは

固形せっけんをとかした水に  
浸した布をよくしぼり、  
ふき取る。(水で洗わない)

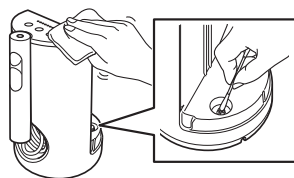

•布でふき取れない  
ところは  
綿棒でふき取って  
ください。

## 修理を依頼される前に

下記の確認と処置をしてください

こんなとき	考えられる原因と処置
使用中 水が出ない 水の勢いが弱い	<p>▶ ノズルがつまっている、 ノズルの出口が変形している (P.20) →交換してください。</p> <p>電源を入れた状態で、止水吐水切替スイッチを「STOP」のままにした →次の手順を行ってください。</p> <p>①タンクに水を 半量程度入れる ②電源「①」を入れ、 水圧「+」をレベル 10に設定する ③「JET」にする ④タンクを数回 抜き差しする ⑤タンクを取りつけ、 水の勢いが戻る まで数秒待つ ※戻らない場合は ④⑤を繰り返す</p> <p>•水の勢いが戻ったら、 通常通りお使い いただけます。</p>
	<p>▶ ノズルが変形している →交換してください。</p>
	<p>▶ 切り忘れ防止機能がはたらいた →異常ではありません。(P.10)</p>
使用中ノズルがはずれる	
電源が自動的に切れた	



こんなとき	考えられる原因と処置
使用中 水圧レベルが 記憶されない	<p>▶ 電源スイッチ「①」を押して電源を切らずに 電源プラグをコンセントから抜いた →電源プラグをコンセントから抜く前に電源 スイッチ「①」を押して電源を切ってください。</p>
使用中 電源スイッチ「①」を押して 電源を切ったのに、水圧レベル 表示LEDが点滅している	<p>▶ 異常ではありません →30秒後消灯します。(P.15)</p>
使用中 止水吐水切替スイッチを「STOP」 にしたとき、動作音がしなかった り音に変化する*	<p>▶ 異常ではありません →そのままお使いください。 ※特に低温環境下で発生する場合が あります。</p>
使用中 ノズルの取り付けが固い	<p>▶ →ノズル差し込み部に水をつけてください。</p>

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。  
修理を依頼される場合は、保証書・本体を販売店へお持ちください。(詳しくはP.21)

## 別売品

▶▶▶次ページにつづく

お求めの際には「本体品番(EW-DJ75)」と「替ノズル品番」をご確認のうえ、  
お買い求めください。

- 別売替ノズルには、色つきの識別リングが同梱されています。  
1台の本体を家族で使う場合など、複数のノズルを区別できます。

製品名	品番	本数
超音波水流ノズル	EW0983-X(クリア)	2本
ポイント磨きノズル	EW0984-W(白)	2本
舌磨きノズル	EW0985-W(白)	2本

＼WEBで確認／

「替ブラシ交換品互換一覧」が  
WEBから確認できます。



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで  
お買い求めいただけるものもあります。  
詳しくはパナソニックの家電製品直販  
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの  
ショッピングサイト  
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



タンクやノズルスタンドなどは、お買い上げの販売店にご相談ください。

使  
い  
か  
た

こ  
ん  
な  
と  
き  
は

## 別売品 (つづき)

### ノズル交換について

#### ■超音波水流ノズル

- 交換の目安: 約6か月 (衛生上)  
6か月以内でも、ノズルの先端が変形したら交換してください。

#### ■ポイント磨きノズル

- 交換の目安: 約3か月  
3か月以内でも、毛先が広がったら交換してください。

#### ■舌磨きノズル

- 交換の目安: 約6か月  
6か月以内でも、クロスが変色したら交換してください。




## 定格・仕様

定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz
定格消費電力	13 W (使用時)
定格時間	10分
タンク容量	約600 mL (超音波水流ノズル、水圧レベル10設定時 約180秒使用可能) (ポイント磨きノズル、水圧レベル10設定時 約130秒使用可能) (舌磨きノズル、水圧レベル10設定時 約75秒使用可能)
大きさ	約 高さ30 (ノズル非装着時20) × 幅12.5 × 奥行14 cm
ホースの長さ	素材寸法 約110 cm
質量	約998 g (舌磨きノズル含む)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>

本体底面に表示してあるQRコードから登録していただくと、品番登録と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

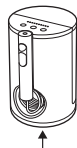

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ  
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.18)  
でご確認のあと、直らないときは、  
まず電源プラグを抜いて、お買い  
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	ジェットウォッシャー ドルツ
●品 番	EW-DJ75
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、  
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間 (ただし、ノズルは消耗品ですので、  
保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このジェットウォッシャー ドルツの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.22)にご連絡ください。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

こんなときは

必要なとき

サポート総合窓口  
<https://panasonic.jp/support/>



## 理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
0120-878-697

パナは ロクキューナナ

受付時間  
9:00～18:00 月～土曜日  
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル  
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



## 修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.21をご覧ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用のジェットウォッシャーの点検を!



こんな  
症状はあり  
ませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。
- ・使用中に異常な音がある。



ご使用  
中止

事故防止のため、  
コンセントから  
電源プラグを  
抜いて、必ず  
販売店に点検を  
ご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
ただし、車載を目的とした機器を除く  
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合や指定外の動作環境  
(ヘ) 本書のご  
(ト) 本書にお  
あるいは  
(チ) 持込修理の  
お客様の負担となります。出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見 本

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## ジェットウォッシャー ドルツ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EW-DJ75		
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (ただし、消耗品は除く)		
※ お買い上げ日	<b>見 本</b>		日
※ お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電 話 (                      )	—	
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電 話 (                      ) —		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手順をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。