

仕様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	44/51 W (プラグを接続しただけでの消費電力；約0.4 W)
酸素発生方式	膜分離式（酸素富化膜）
酸 素 濃 度	約30 %（20 °C/通常気圧）
空 気 流 量	約2 L/分（20 °C/通常気圧）
連続使用時間	10・20・30分 タイマー付
吸 入 方 法	ヘッドセット式
運 転 音	約41 dB/約43 dB
外 形 寸 法	幅144 mm×奥行235 mm×高さ318 mm
質 量	3.8 kg
コードの長さ	2 m
付 属 品	O ₂ ヘッドセット……………1セット チューブセット ……………1セット

抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
バイオ除菌フィルター	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801に基づく	薬液に浸漬	ハニカム状樹脂
HEPAフィルター	(財)日本食品分析センター	フィルム密着法	グラビア印刷方式	シート状不織布

愛情点検

●長年ご使用の酸素エアチャージャーの点検を！

	このような 症状はあり ませんか	●スイッチを入れても時々運転しないことがある。 ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。
---	------------------------	---	--

便利メモ

(おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名		お 買 い 上 げ 日	年 月 日
	☎ () —		
お 客 様 ご 相 談 窓 口		品 番	MS-X1
	☎ () —		

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) 2003

S4QCJ5300
S0203-3083

National

酸素エアチャージャー


取扱説明書

National

酸素エアチャージャー（家庭用）

取扱説明書

品 番 MS-X1

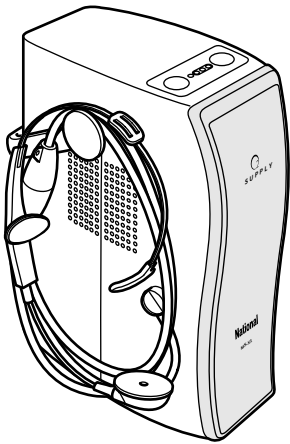

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは酸素エアチャージャーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

酸素で元気チャージ

吸気口から取り入れたお部屋の空気(酸素濃度約21%)を酸素富化膜の働きで約30%の高濃度酸素にして供給します。

こんなとき、カラダは
酸素を欲しがっています。

●スポーツで
疲れたときに



●長時間の
受験勉強に



●仕事帰りで
クタクタなときに



●作業の疲れが
取れないときに



【約30%の高濃度酸素の一般的効果】


心身ともに
リフレッシュ

集中力
回復

すっきり
爽快


※人によっては、高濃度酸素の効能があらわれにくい場合があります。

約30%の高濃度酸素は、
ナショナルの酸素富化膜
の技術から。

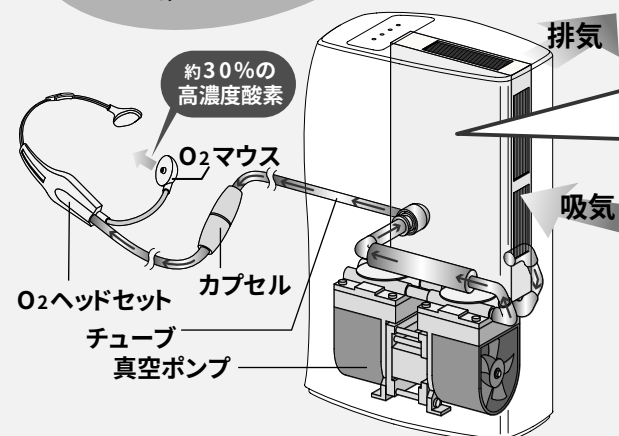

酸素富化膜

分子が膜に溶ける
速度の差を利用し
て、空気中に含まれ
る酸素分子と窒素
分子を分離し、約
30%の高濃度酸
素を含んだ空気をつ
くれます。

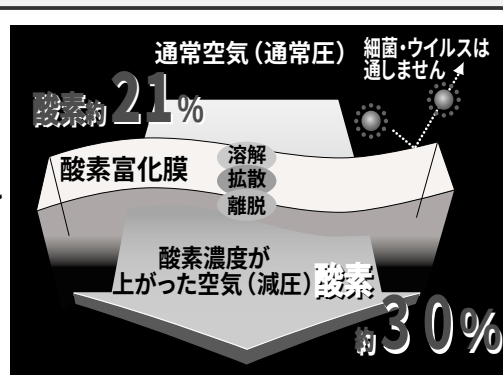

もくじ

安全上のご注意.....4

知っておいていただきたいこと6

・各部のなまえ.....6

・準備7

・保管のしかた.....7

使いかた8

・本体の使用場所について8

お手入れのしかた10

消耗品12

故障かな!?と思ったら13

保証とアフターサービス14

仕様裏表紙

はじめに

使いかた

こんなときは

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

**子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない**
チューブが首に絡んで窒息をする恐れがあります。

**絶対に分解したり修理・改造しない**
発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。
●修理は販売店にご相談ください。

**本体を水につけたり、水をかけたりしない**
水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。

**燃焼器具と併用して使用する場合は換気をする**
一酸化炭素中毒などを起こすことがあります。
●この機器は一酸化炭素などの有害なガス成分を除去するものではありません。

**電源プラグのほこり等は定期的にとる**
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

**電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない**
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない**
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**
ぬれ手禁止 感電の原因になります。

**お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く**
感電やけがをすることがあります。

**電源プラグは根元まで確実に差し込む**
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意

**室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使用する場合は運転をしない**
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、健康によくないことがあります。
●殺虫剤使用後は、十分換気してから運転してください。

**本体の上に乗ったり、寄りかかったりしない**
けがや破損の恐れがあります。

**電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く**
感電やショートして発火することがあります。

**火気に近づけない**
火気禁止 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

**浴室・サウナなどの湿気の多いところで使わない**
ぬれ手禁止 感電・故障の原因になります。

**長時間使用しないときは、電源プラグを抜く**
電源プラグを抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


ご使用上のお願い

- この酸素エアチャージャーは家庭用です。酸素エアの吸入以外の目的には、ご使用にならないでください。
- 医療機器ではありません。体調の悪い方、妊娠中の方は、医師に相談したうえでご使用ください。
- O₂マウスは、必ず装着してご使用ください。
- アロマテラピーや芳香剤などをカプセルやO₂マウスに入れて使用しないでください。(樹脂のひび割れや変色の原因になります。)
- 本品を使用中に体に異常を感じた場合には、すみやかに使用を中止してください。
- 悪臭や排気ガスのあるところでは使用しないでください。(不快なおいやガス成分が濃縮されることがあります。)
- 本体に殺虫剤・化粧品・消臭剤などのスプレーをかけないでください。(酸素富化膜が目詰まりし性能が低下することがあります。)
- カプセルに水がたまったら水を捨て、水滴が気になるときはふき取ってください。(水が口元にふきだしたり、においなどの発生の原因になります。たまった水は飲まないでください。)
- たばこを吸いながらのご使用はさけてください。(においなどの発生の原因になります。)

知っておいていただきたいこと


各部のなまえ

付属品（ご使用いただく前にお確かめください。）

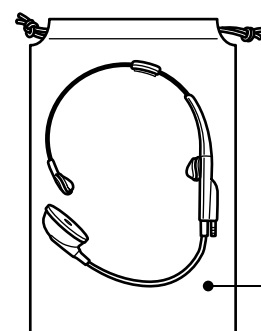


O₂ヘッドセット（1セット）

この袋は捨てずに、
O₂ヘッドセット・
チューブセットの保管に
お使いいただけます。
（Ⅱ 7ページ）

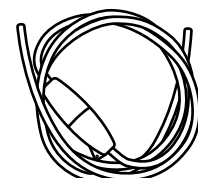


チューブセット（1セット）

表示部

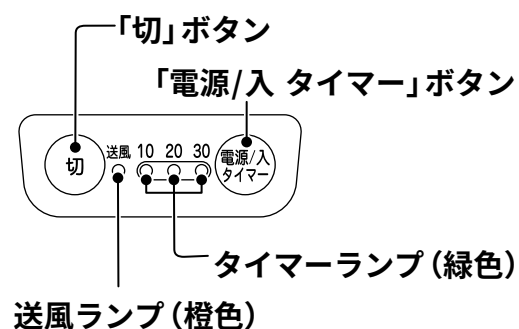

ハンドル

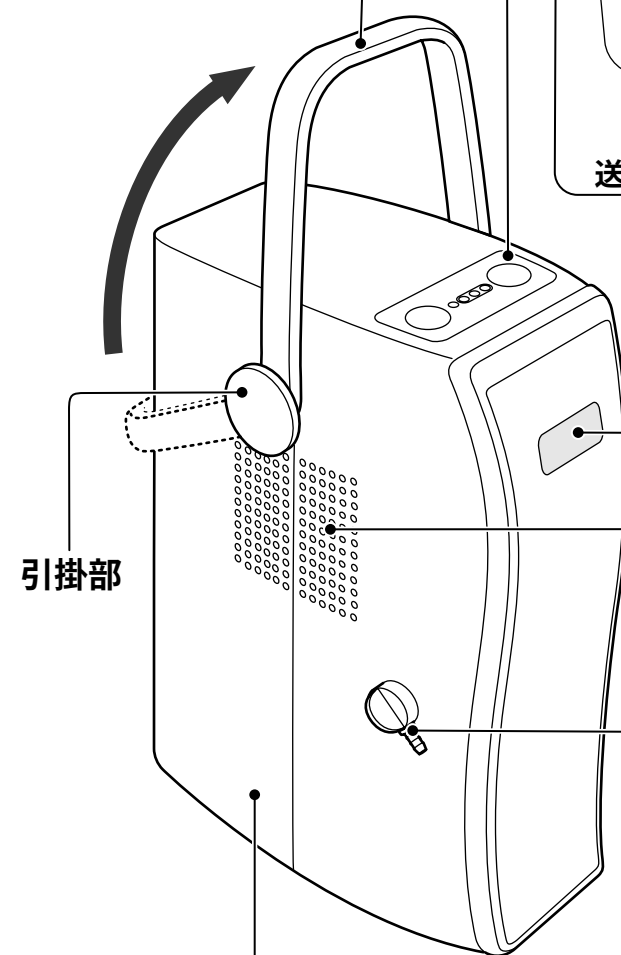


エアチャージャー本体

O₂ランプ（緑色）

排気口


吹出口

ご使用に応じて
角度を調節してください。

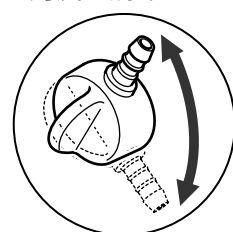

吸気口


中にフィルターが
入っています。

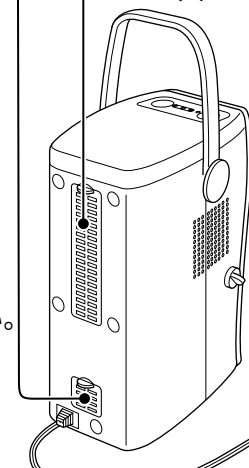

電源プラグ


電源コード

準備

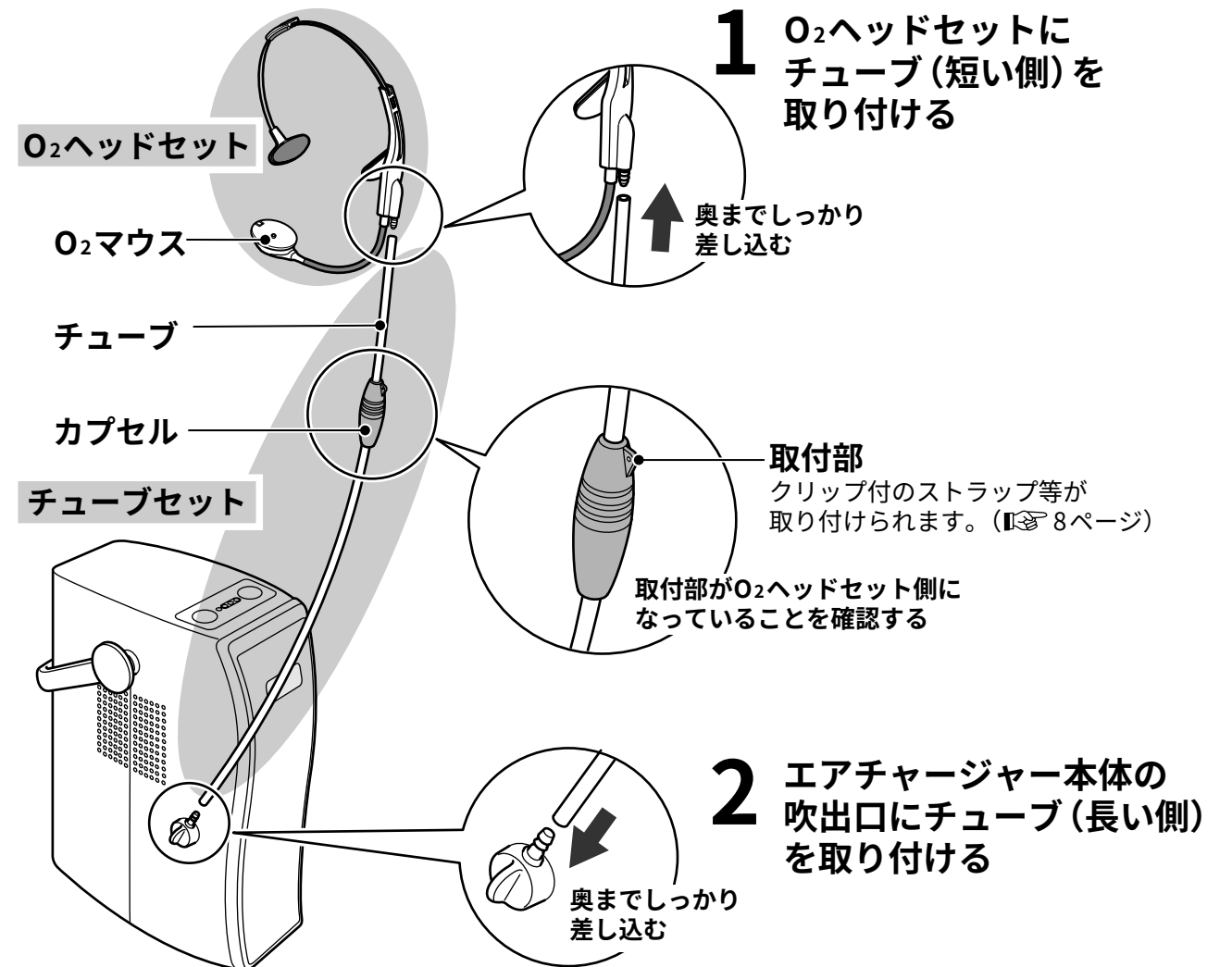


保管のしかた

●O₂ヘッドセットとチューブセットを束ね、
引掛部に引っ掛けます。

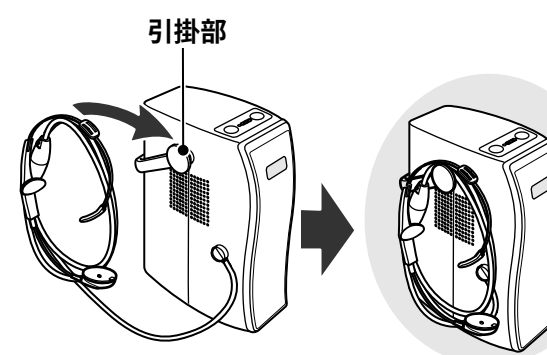

●O₂ヘッドセットとチューブセットを束ね、
袋に入れてハンドルに引っ掛けて収納できます。

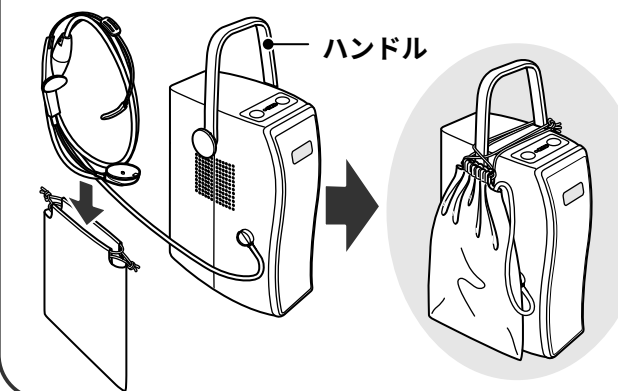

はじめに

使いかた

こんなときは

使いかた

本体の使用場所について

- 使用される部屋の温度は10℃～30℃でのご使用をおすすめします。
(微量ですが、低温では酸素濃度は濃く、吹出し風量は少なくなり、
高温では酸素濃度は薄く、吹出し風量は多くなります。)
- ラジオの近くで運転すると雑音が入り、放送が聞きにくくなることがあります。
1m以上離してご使用ください。
- 移動の際は、電源プラグをコンセントから抜き、電源コード・付属品を持って行ってください。

1. O₂ヘッドセットを装着し、O₂マウスを準備する

●O₂ヘッドセットのバンド部の長さ調節をしてください。
●O₂マウスを鼻から約1～3cmの位置に合わせてください。
(左図のように、O₂ヘッドセットを持ちながらO₂マウスを調整してください。)

お願い

●O₂マウスの吹出し風で唇等が乾くようであれば、リップクリームや保湿クリーム等をご使用ください。

お知らせ

カプセルの重さが気になるとき
お手持ちのクリップ付のストラップ等を取付部に取り付けて、衣服などにとめてご使用ください。

バンド部の長さ調節部

約1～3cm

O₂マウス O₂ヘッドセット

取付部

<O₂ヘッドセット装着例>

使用場所や姿勢などに合わせて使いやすい方法でご使用ください。



ご使用のはじめには、部品材料のにおいがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。

2. 電源プラグをコンセントに差し込み「電源/入 タイマー」ボタンを押して運転する

「電源/入 タイマー」ボタン

タイマーランプ

●「電源/入 タイマー」ボタンを押すと、タイマーランプ(緑色)が点灯し、O₂マウスから高濃度酸素を含んだ空気が放出されます。このときO₂ランプ(緑色)も同時に点灯します。

「電源/入 タイマー」ボタンを押すごとに10分→20分→30分の順に設定時間が切り替わります。

10分 20分 30分

目安として毎日10分程度使用することをおすすめします。
お好みにより、20分・30分にセットしてご使用できます。

●時間が経過すると、タイマーランプは10分ごとの残り時間を示します。

「30分」にセットした場合

●セットした時間が終了すると、自動的に運転が停止します。

3. O₂ヘッドセットをはずす


●運転停止後、約7秒間送風ランプが点滅。

●送風ランプが点灯し、約1分間の送風運転※を行い、自動停止する。

※. 送風運転は、チューブや本体内の換気をするはたらきをします。

■「切」ボタンで運転を停止することができます (ただし、送風運転は停止できません。)

- 「切」ボタンを押すと運転が停止し、タイマーランプが消えます。運転停止後、約7秒間送風ランプが点滅します。その後、送風ランプが点灯し、約1分間の送風運転を行い、自動停止します。

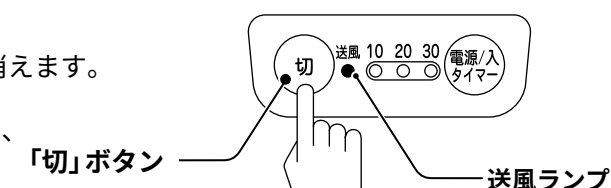


お手入れのしかた

■お手入れの前には、「切」ボタンを押し、電源プラグを抜いてください。



こまめなお手入れ

カプセル

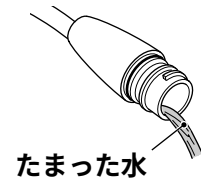

- カプセル内に水がたまった場合は、都度、水を捨ててください。また、水滴程度の場合は、柔らかい布などでふき取ってください。

カプセル内に水がたまり過ぎると、バイオ除菌フィルター・HEPAフィルターに水が付着したり、O₂マウスから水滴が出る場合があります。バイオ除菌フィルター・HEPAフィルターに水が付着した場合は、取りはずして清潔な場所で陰干しにして十分乾燥させてからご使用ください。ティッシュペーパーなどにはさんで吸水させると、乾燥しやすくなります。(取りはずしかたは11ページ参照)

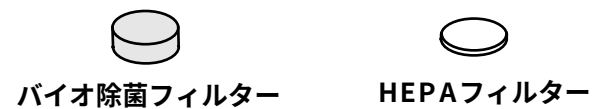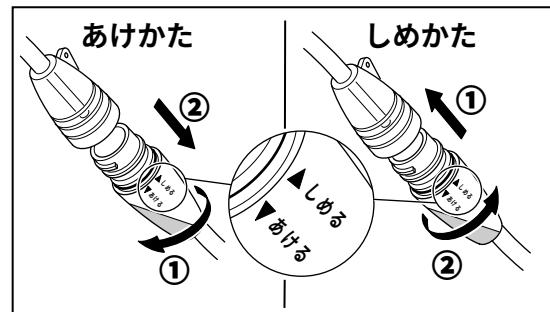


酸素エアチャージャーを連続使用または、湿度の高い日や場所で使用すると水がたまりやすくなります。

- お願い ●たまった水は、飲まないでください。

定期的なお手入れ (月に1回程度)


フィルター

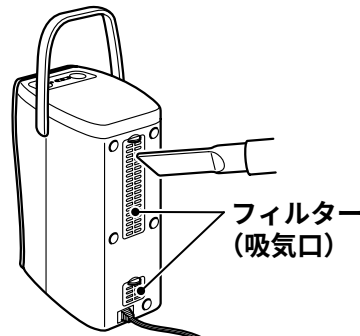

- エアチャージャー本体後部のフィルターのほこりなどを掃除機などで吸い取ります。

- フィルターを取りはずして水洗いすることもできます。水洗い後は、十分乾燥させてから取り付けてご使用ください。


- お願い ●お手入れ後は、必ずフィルターを取り付けてからご使用ください。

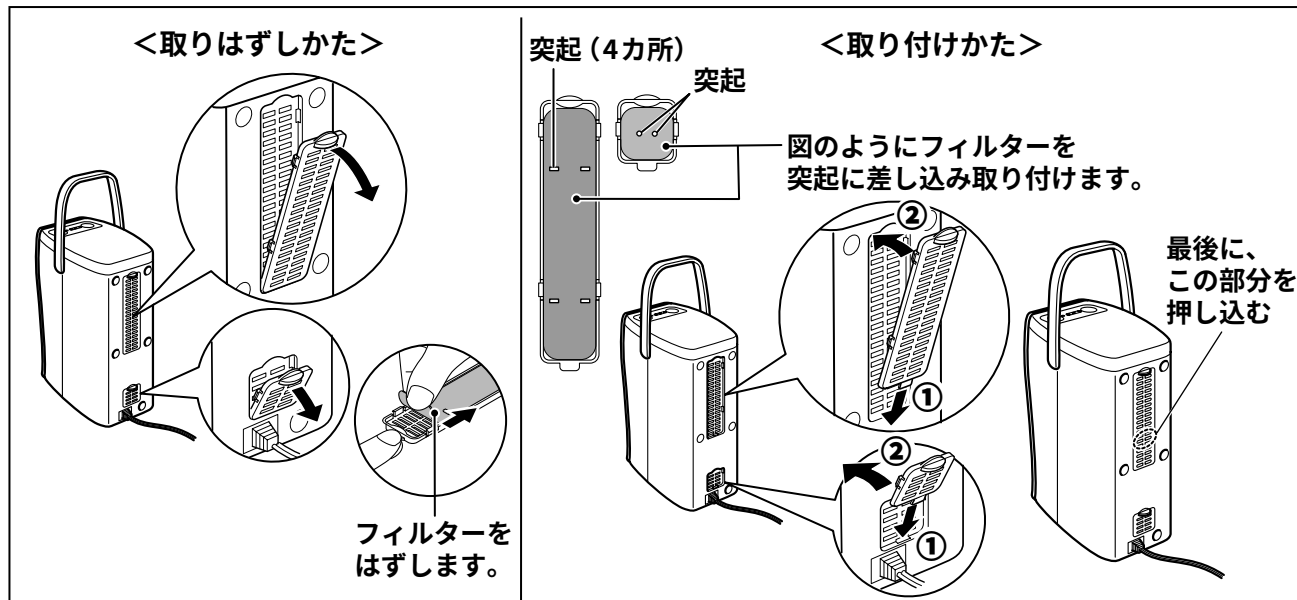

においや汚れが気になる場合や長期間使用しなかった場合のお手入れ

- ①カプセル・チューブをはずす (お手入れ時以外はセットしたままにしておいてください。)

- ②O₂マウスのバイオ除菌フィルター・HEPAフィルターを取り出す

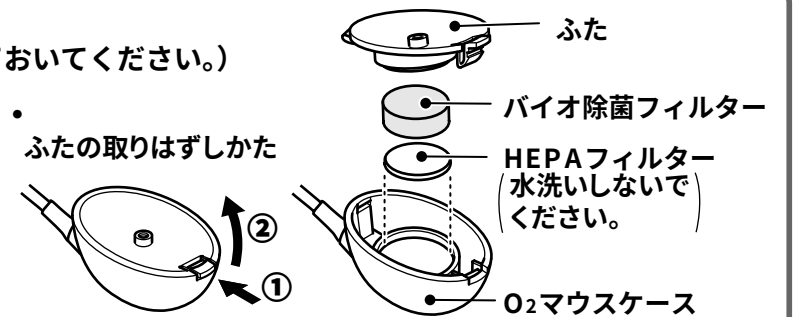

- ③水洗いする

- O₂マウスケース・ふた・バイオ除菌フィルター・カプセル・チューブを水に2～3分浸し、チューブの中に水を通すように洗う。においが強い場合は、60℃以下のお湯に2～3分浸して洗うと効果的です。(やけどにご留意ください。)




- お願い ●O₂ヘッドセットは、まるごと水洗いしないでください。

- ④乾燥させる

- ①水分をふき取り、水気を切る。
- ②O₂マウスケース・カプセル・チューブをそれぞれ取り付け、チューブを本体に取り付ける。
- ③電源プラグをコンセントに差し込み、エアチャージャー本体を30分間運転させ、O₂マウスケースから水滴を出す。
- ④O₂マウスケース・カプセル・チューブをそれぞれはずして、清潔な場所で陰干しにして十分乾燥させる。(乾燥不十分でご使用になると、O₂マウスから水滴が出る場合があります。)

- ⑤もとのように取り付ける


- ①O₂マウスケースにHEPAフィルター (青い面を下にする)・バイオ除菌フィルターをセットし、ふたを取り付けてO₂ヘッドセット本体に取り付ける。
- ②カプセルにチューブを取り付ける。
- ③O₂ヘッドセットにチューブセットを取り付けエアチャージャー本体に取り付ける。(11ページ)

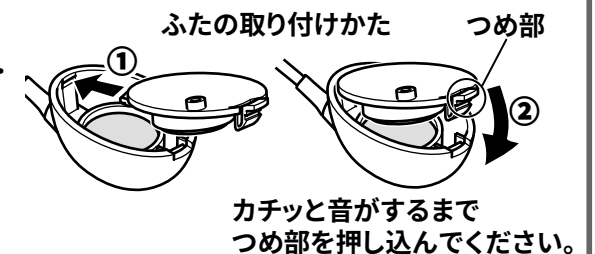


- お願い ●バイオ除菌フィルター・HEPAフィルターを、必ず取り付けてからご使用ください。

O₂マウスは、O₂ヘッドセットからはずしてお手入れできます。(必ず再装着してください。)

O₂マウスの取りはずしかた

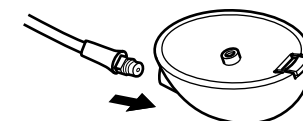

O₂マウスの取り付けかた

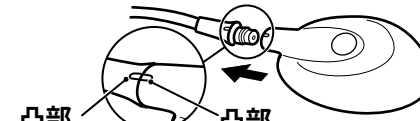

左図のように、凸部を合わせ、カチッと音がするまで押し込んでください。

長期間使用しない場合は、

晴れた日 (乾燥した日) に30分間運転してチューブおよびカプセル内を乾燥させてから収納してください。




お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。(ひび割れや変色の原因になります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形や故障の原因になります。)

消耗品 (買い替えや買い増しの場合)

故障かな! ?と思ったら

お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店でお求めください。

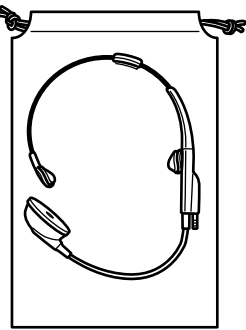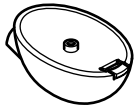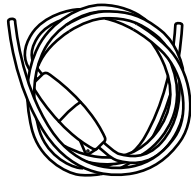O₂ヘッドセット  品番 AMS-42BJ9 希望小売価格 2,200円(税別)	O₂マウス  品番 AMS-44BJ9 希望小売価格 500円(税別)	チューブセット  品番 AMS10Q-J5 希望小売価格 800円(税別) (2003年8月現在)
--	---	---

こんなときは	ここが原因	直しかた
吹出し風が出ない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●チューブがはずれていませんか？ ●チューブが折れたり曲がったりしていませんか？ ●チューブ内に異物等がつまっていませんか？ ●フィルターが目詰まりしていませんか？ ●カプセルがしっかりしまっていますか？ ●高い温度の部屋で連続して長時間運転すると、保護装置が働きます。	●電源プラグをコンセントに差し込みなおしてください。 ●チューブをしっかり取り付けてください。 ●チューブの折れ曲がりをおこなしてください。 ●チューブ内の異物等を取り除いてください。 ●フィルターのお手入れをしてください。(P.10ページ) ●カプセルをしめなおしてください。
「電源/入タイマー」ボタンで作動しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？	●電源プラグをコンセントに差し込みなおしてください。
O ₂ ランプが点灯しない	●送風運転になっていませんか？	●「電源/入タイマー」ボタンを押してください。O₂ランプが点灯します。
吹出し風量が多い	●送風運転になっていませんか？ ●部屋の温度が高くないですか？	●「電源/入タイマー」ボタンを押してください。 ●高温では、酸素濃度が薄く、吹出し風量は多くなります。10℃～30℃での使用をおすすめします。(P.8ページ)
吹出し風量が少ない	●部屋の温度が低くないですか？	●低温では、酸素濃度が濃く、吹出し風量は少なくなります。10℃～30℃での使用をおすすめします。(P.8ページ)
吹出し風が不快なおいがある	●カプセル・チューブ内が汚れていませんか？ ●O₂マウスが汚れていませんか？ ●ご使用のはじめには、部品材料のにおいがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。	●カプセルおよびチューブ内を水洗いしてください。(P.11ページ) ●O₂マウスを水洗いしてください。(P.11ページ)

保護装置

高い温度の部屋で連続して長時間運転すると、本体内のポンプモーターの過熱を防ぐため保護装置が働き、運転が自動的に停止します。涼しい場所で、30分～1時間程度(周囲温度によって異なります)待ちますと、保護装置が解除され、再びご使用になれます。

点検後なお異常がある	ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品をご持参ください。 (詳しくは、14～15ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。)
------------	---

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

13ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料

は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（別添付）

お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただしO₂ヘッドセット・O₂マウス・チューブセットは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この酸素エアチャージャーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	酸素エアチャージャー
品 番	MS-X1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ソーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

ナショナル／パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区			近 畿 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021
旭川	旭川市2条通2丁目1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都	京都市伏見区竹田中原町71-4 ☎(075)672-9636
				大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225
				奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
				和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
				兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東 北 地 区			中 国 地 区		
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
				出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
				浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
首 都 圏 地 区			四 国 地 区		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011				
中 部 地 区			九 州 地 区		
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
				熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
				天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
				鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
				大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
沖 縄 地 区			沖 縄 地 区		
			沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0503